


Druckstandskizze für / Printing sketch for:	
Gebrauchsinformation Suprasorb A REF 20440-442, 20445	
Mat.-Nr. / Mat. No.: 4022087	
Abmessungen / Sizes:	
plano:	360 mm
gefaltet/folded:	85 mm x 180 mm
Druck / Print:	
<input type="checkbox"/> Rot / Red Pantone 1795 C	
<input checked="" type="checkbox"/> Grün / Green Pantone 348 C	
<input type="checkbox"/> Schwarz / Black	
Die Druckstandskizzen sind nicht farbfähig. Für die Farbführung und Farmlösungen ist das L-Farb-Druckmuster verbindlich. Dieses dient zur optischen, subjektiven Beurteilung der Farbführung auf unterschiedlichen Druckdrucken oder Unterdrucken. Abweichende Ergebnisse bedürfen vor Aufdruckdruck des Abdruckung und Freigabe durch den Auftraggeber.	
This Printing Sketch is no template concerning the colours. The colour samples on the L-F-Colour sample book are binding for the final and mixing. They are used for optical subjective assessment of the colours when printed on different materials or substrates. Deviating results require the order's approval and release prior to printing.	
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Verpackungstechnik, Postfach 10 56133 Neuwied Telefon: 0 26 34 99-66, Telefax: 0 26 34 99-69 95 www.Lohmann-Rauscher.com	

Bedruckung / Printing:	<input checked="" type="checkbox"/> einseitig / on one side <input checked="" type="checkbox"/> zweiseitig / on two sides
Faltart: / Type of fold:	Kombifalt (Leporelle+Einbruch)
Coodart / Type of code:	
Druckpasser / Print tolerance:	± mm
Druckstand / Position of print (tolerance):	± 1,0 mm
Schnitttoleranz / Cutting tolerance:	± 1,0 mm
Falttoleranz / Folding tolerance:	± 1,0 mm
Papierqualität / Paper quality:	weiß, holzfrei 60 g/m ²
Maßangaben in mm/Mesurements in mm / Hinweis/Note: Kopien unmaßstäblich! / copies not true to scale!	

Zeichnungs-Nr. / Drawing No. Index	DR4022087. 00
Datum / Date	26.08.2013
Kurzzeichen / Initials	afu
Erstellt / Drawn by:	26.08.2013
Geprüft / Checked:	26.08.2013
Geändert / Amended:	
Geprüft / Checked:	
Verteiler / Distributor:	<input checked="" type="checkbox"/> Lieferant
Sonstiges (Bitte entsprechend eintragen)	
Verteil: Datum / Kurz. Distributed: Date / Initials	
Änderungsgrund / Reason for change:	Textkorrekturen, Ergänzung Firmenzeile, Änderung „Made in..“, etc.
Datum / Date:	26.08.13
REVISIONS	

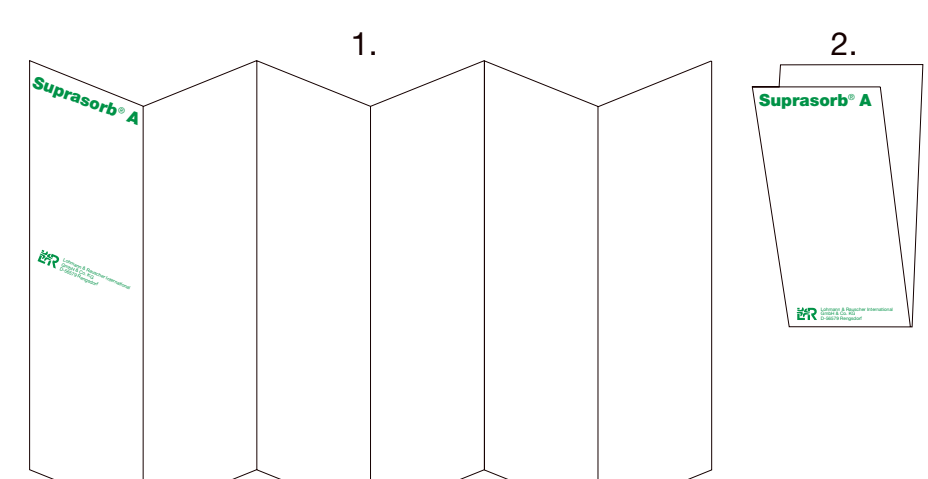

Suprasorb® A

Calciumalginat-Verband
Pañamiento de alginato de calcio
Calcium Alginate Wound Dressing
Apósito de alginato de calcio
Penso de Alginato de Cálcio
Medicazione di alginato di calcio
Calciumalginatverband
Calciumalginat-forebinding
Calciumalginatförband
Kalsiumalginatförbinding
Kalsiumalginatnaitside
Kalsiumalginatový obväz
Kalsiumalginatový obväz
Kálciumalginát-kötés
Альгинат кальция, повязка на рану
Opbrutnek z wlokiem alginatnu wapnia
Orbrazac za rano s kalcijevim alginatom
Kalcij-alginat povoj
Επιθεμα τραυμάτων αλγινικού ασβεστίου
藻酸钙敷料

Gebrauchsanweisung
Produktbeschreibung:
 Suprasorb® A Calciumalginat Kompressen und Tamponaden sind sehr weiche, anpassungsfähige Wundabdeckungen. Sie schaffen ein ideales Mikroklima und sind geeignet für die Versorgung von stark exsudierenden oberflächlichen Wunden. Die Wunden, die auch tief sein können. Die Calciumalginat-Fasern reagieren mit Wundexsudat oder Blut und bilden ein Gel, das ein feuchtes Wundklima schafft. Suprasorb® A Calciumalginat Kompressen und Tamponaden sind Gamma-sterilisiert und dürfen nicht resterilisiert werden. Das Produkt ist für die Behandlung von Augenerkrankungen ungeeignet und nicht wiederverwendbar.
Produktzusammensetzung:
 Calciumalginat-Fasern
Indikationen:
 Suprasorb® A Calciumalginat Kompressen und Tamponaden sind zum einseitigen Gebrauch bestimmt und können für die Versorgung folgender Wunden angewendet werden:
 • Druckgeschwüre
 • arterielle Geschwüre
 • venöse Ulcerationsgeschwüre
 • diabetische Geschwüre
 • Spaltwunden/Injektionsstellen,
 wenn sie
 • stark exsudierend und
 • oberflächlich oder
 • tief sind.
Kontraindikationen:
 • nicht geeignet bei trockenen Wundverhältnissen
 • nicht geeignet für Verwundungen 3. Grades
Nebenwirkungen:
 Bisher sind keine bekannt.
Anwendungshinweise:
1. Vorbereitung der Wunde: Die Wunde sorgfältig reinigen. Die umgebende Haut sollte sauber und trocken sein.
2. Anlegen des Wundverbandes:
 a) Kompresse auf das feuchte Wundbett auflegen, wenn nötig, durch Feilen der Wundränder anpassen, bis ein gleichmäßiger Kontakt zwischen Verband und physiologischer Kochsalzlösungsauflösung erreicht ist.
 b) Teile Wunden mit der Tamponade locker tamponieren.
 c) Suprasorb® A Calciumalginat Verband mit einem geeigneten Verband (z.B. mit Suprasorb® H Hydrokolloid-Verband).
3. Verbandwechsel:
 Verbandwechsel nach Anweisung des praktizierenden Arztes, oder wenn Feuchtigkeit durch den Verband entsteht, oder spätestens nach 5-7 Tagen. Entfernen und eventuelle in der Wunde zurückbleibendes Gel mit physiologischer Kochsalzlösung ausspülen.
Vorsichtsmaßnahmen:
 • Bei bekannter Unverträglichkeit oder einer Allergie gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe darf das Produkt nicht angewendet werden.



Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG, Westwallstraße 4, 56573 Rengsdorf, Germany

Indicações:
 Suprasorb® A Penso e Córdão de Alginato de Cálcio, são produtos de utilização única e podem ser utilizados no tratamento do seguinte tipo de feridas:
 • Úlceras de pressão
 • Úlceras arteriais
 • Úlceras venozas
 • Úlceras do doente diabético
 • Enxertos de pele
 Se form
 • Feridas com muito exsudado
 • Feridas superficiais
 • Feridas profundas
Contra-Indicações:
 • não indicado para feridas secas
 • não indicado para feridas de grau III
Efeitos secundários:
 Desconhece-se até agora.
Aplicação:
1. Preparação da ferida:
 Limpe a ferida cuidadosamente. Faça uma circundante devendo fazer limpa e seca.
2. Aplicação do penso:
 a) Coloque o penso na ferida. Se necessário dobre o penso para melhor se ajustar ao tipo de ferida. No caso de feridas com muito exsudado, humedecida o penso com água fisiológica.
 b) Preença suavemente as feridas profundas com o cordão.
 c) Fixe Suprasorb® A Penso e Córdão de Alginato de Cálcio, com o tipo de fixação adequado, ex. Suprasorb® H Penso Hidrocolóide.
3. Renovação de penso:
 O penso deve ser mudado de acordo com as indicações do médico assistente ou quando o exsudado parar/não tem, ou ainda após 5-7 dias. Remova o interior da mesma, com ser fisiológico.
Medidas de segurança:
 • Produto não deve ser usado no caso de existir uma biocompatibilidade conhecida, ou uma alergia perante uma ou mais das substâncias constituintes.
Precauções:
 • não aplicar sobre feridas secas
 • não aplicar sobre feridas de grau III
Contra-Indicações:
 • não indicado para feridas secas
 • não indicado para feridas de grau III
Aplicação:
1. Preparazione della lesione:
 Pulire accuratamente la lesione. Detergere e tamponare la cute periferica.
2. Applicazione della medicazione:
 a) Stendere la compressa sulla parte unita della ferita e, se necessario, ricorrendo ad un pezzo di garza sterile, adattare il pezzo di rete fibroelastica esudanti ruvidine la medicazione con soluzione salina.
 b) In caso di ferite profonde inserire attentamente il tampono.
 c) Fissare Suprasorb® A compressa o tampono di alginato di calcio con una medicazione secondaria, p.es. Suprasorb® H medicinale all'idrocolloide.
3. Rinovazione del medicinale:
 Cambiare la medicazione secondo l'indicazione del medico, o quando la medicazione secondaria risulta impregnata, o in ogni caso dopo 5-7 giorni. Rimuovere la medicazione secondaria ed eventualmente ripulire la ferita dal residuo gel con soluzione salina.
Misure precauzionali:
 • In caso di incompatibilità nota o di allergia verso uno o più dei componenti, il prodotto non deve essere applicato.
Confezione:
 Confezione Misura Pz
 20440 5 x 5 cm 10
 20441 10 x 10 cm 10
 20442 10 x 20 cm 10
 20445 30 cm / 2g 5

Mode d'emploi
Description du produit:
 Les compresses et les tampons d'alginate de calcium Suprasorb® A sont des pansements extensibles doux et adaptés. Ils créent un milieu idéal pour la guérison.
Indications:
 • ulcères artériels
 • ulcères veineux della gamba
 • ulcères diabétiques
 • zone de pression cutanée,
 per ferite
 • fortement exsudants e
 • superficiels o
 • profonds.
Contre-indications:
 • non indicati su ferite in condizioni asciutte
 • non indicati su ferite per ustioni di 3° grado
Utilizzo:
1. Preparazione della lesione:
 Pulire accuratamente la lesione. Detergere e tamponare la cute periferica.
2. Applicazione della medicazione:
 a) Stendere la compressa sulla parte unita della ferita e, se necessario, ricorrendo ad un pezzo di garza sterile, adattare il pezzo di rete fibroelastica esudanti ruvidine la medicazione con soluzione salina.
 b) In caso di ferite profonde inserire attentamente il tampono.
 c) Fissare Suprasorb® A compressa o tampono di alginato di calcio con una medicazione secondaria, p.es. Suprasorb® H medicinale all'idrocolloide.
3. Rinovazione del medicinale:
 Cambiare la medicazione secondo l'indicazione del medico, o quando la medicazione secondaria risulta impregnata, o in ogni caso dopo 5-7 giorni. Rimuovere la medicazione secondaria ed eventualmente ripulire la ferita dal residuo gel con soluzione salina.
Misure precauzionali:
 • In caso di incompatibilità nota o di allergia verso uno o più dei componenti, il prodotto non deve essere applicato.
Confezione:
 Confezione Misura Pz
 20440 5 x 5 cm 10
 20441 10 x 10 cm 10
 20442 10 x 20 cm 10
 20445 30 cm / 2g 5

the treatment of heavily exuding and deep wounds which may also be infected. The calcium alginate fibres react with wound exudate or blood and form a gel which creates a moist and humid environment. The calcium alginate Wound Dressing and Rope are sterilized by gamma irradiation and must not be re-sterilized. The products are sterile unless the package is opened or damaged.
Product composition:
 Calcium alginate fibres
Indications:
 Suprasorb® A Calcium Alginate Wound Dressing and Rope are for single use only and can be used for the treatment of the following wounds:
 • pressure sores
 • arterial ulcers
 • venous lower leg ulcers
 • diabetic ulcers
 • skin donor sites
 if they are
 • heavily exuding and
 • superficial wounds or
 • deep wounds.
Contraindications:
 • not suitable for dry wound conditions
 • not suitable for 3rd degree burns
Adverse reactions:
 None known to date.
Instructions for Use:
 a) Place the dressing on the moist wound. If necessary, fold the dressing to match the wound size. In case of slightly exuding wounds, moisten to adjust with sterile saline solution.
 b) Cut the rope gently into cavity wounds.
 c) Secure Suprasorb® A Calcium Alginate Wound Dressing with suitable retention (e.g. Suprasorb® H Hydrocolloid Dressing).
3. Dressing change:
 Change the dressing as directed by the clinician in charge or when strike through occurs, or at least after 5-7 days.
Precautions:
 • The product may not be used in the presence of known allergens to one or several of its components.
Presentation:

Product Code	Size	Pieces
20440	5 x 5 cm	10
20441	10 x 10 cm	10
20442	10 x 20 cm	10
20445	30 cm / 2g	5

Composición del producto:
 Fibras de alginato de calcio
Indicaciones:
 Suprasorb® A compresas y tapones de alginato de calcio están destinados al uso único y pueden ser utilizados para la cura de las heridas siguientes:
 • úlceras por decúbito
 • úlceras arteriales
 • úlceras venozas de la pierna
 • úlceras diabéticas
 • sitios de separación dermo-epidérmica, si son
 • de secreción intensa y
 • superficiales o
 • profundas.
Contraindicaciones:
 • inadecuadas si el ambiente de la herida es seco
 • inadecuadas para quemaduras de 3º grado
Efectos secundarios:
 No se conoce ninguno hasta la fecha.
Modo de aplicación:
1. Preparar la herida:
 Limpiar la herida meticulosamente. La piel a su alrededor debe estar limpia y seca.
2. Aplicar el apósito:
 a) Colocar la compresa sobre el lecho húmedo de la herida, en caso necesario se adaptará al tamaño de la herida plegando la compresa, en heridas de secreción reducida, humedecer el vendaje con solución salina fisiológica.
 b) Heridas profundas se taparon ligemente con el vendaje.
 c) Fijar Suprasorb® A vendaje de alginato de calcio con un vendaje adecuado, p.ej. con vendaje hidrocoloidal Suprasorb® H.
3. Cambio de vendaje:
 Cambiar el vendaje según las indicaciones del médico responsable, o cuando la compresa se moja o cuando la herida se seca, o al menos reducida de gel eventuales presentes en la herida enjuagándose con solución salina fisiológica.
Medidas de precaución:
 • El producto no puede ser empleado en caso de intolerancia conocida o de alergia a uno o varios componentes.
Presentación del producto:

REF	Dimensiones	Unidades
20440	5 x 5 cm	10
20441	10 x 10 cm	10
20442	10 x 20 cm	10
20445	30 cm / 2g	5

Instruções de utilização
Descrição do Produto:
 O penso e o cordão de Alginato de Cálcio Suprasorb® A são produtos muito macios e ajustáveis às feridas. Criam uma atmosfera ideal no interior da ferida e criam condições ideais para o tratamento de feridas superficiais ou muito exudadas e para feridas profundas que podem estar infectadas. As Fibras de alginato de cálcio reagem com o exsudado da ferida e formam um gel, que cria um ambiente húmido e adequado para a cicatrização da ferida. Os produtos Suprasorb® A são esterilizados por radiação gama e não devem ser reesterilizados. Os produtos são estéreis, a menos que o pacote esteja danificado.
Composição do produto:
 Fibras de alginato de cálcio
Indicações:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er svært myke og anvendelige sårtilbedninger. De skaper et ideelt sårklima og egner seg for behandling av svært eksuderende overfladiske og dype sår, som også kan være infisert. Kalsiumalginatfibrerne reagerer med sårsekundat eller blod og danner en gel som gir et fuktig sårklima. Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er gamma-sterilisert og må ikke resteriliseres på nytt. Produktene er sterile så lenge pakningen er uåpnet og ikke skadet.
Produktens sammensetning:
 Calciumalginatfibrer
Indikationer:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er ment for engangsbruk og kan brukes til behandling av følgende sår:
 • trykksår
 • arterielle sår
 • venøse leggsår
 • diabetiske sår
 • huddonorområder
Brugsanvisning:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er meget bløde og tilpassede til behandling af følgende sår:
 • trykksår
 • arterielle sår
 • venøse lår
 • diabetiske sår
 • huddonorområder
Indikationer:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er avsedda för engångsbruk och kan användas för behandling av följande sår:
 • trykksår
 • artärrelle sår
 • venösa lår
 • diabetiska sår
 • hudtransplanterat
Indikaciones:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er svært myke og anvendelige sårtilbedninger. De skaper et ideelt sårklima og egner seg for behandling av svært eksuderende overfladiske og dype sår, som også kan være infisert. Kalsiumalginatfibrerne reagerer med sårsekundat eller blod og danner en gel som gir et fuktig sårklima. Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er gamma-sterilisert og må ikke resteriliseres på nytt. Produktene er sterile så lenge pakningen er uåpnet og ikke skadet.
Produktens sammensetning:
 Calciumalginatfibrer
Indikationer:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er ment for engangsbruk og kan brukes til behandling av følgende sår:
 • trykksår
 • arterielle sår
 • venøse lår
 • diabetiske sår
 • huddonorområder
Brugsanvisning:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er meget bløde og tilpassede til behandling af følgende sår:
 • trykksår
 • artärrelle sår
 • venösa lår
 • diabetiska sår
 • hudtransplanterat
Indikaciones:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er svært myke og anvendelige sårtilbedninger. De skaper et ideelt sårklima og egner seg for behandling av svært eksuderende overfladiske og dype sår, som også kan være infisert. Kalsiumalginatfibrerne reagerer med sårsekundat eller blod og danner en gel som gir et fuktig sårklima. Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er gamma-sterilisert og må ikke resteriliseres på nytt. Produktene er sterile så lenge pakningen er uåpnet og ikke skadet.
Produktens sammensetning:
 Calciumalginatfibrer
Indikationer:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er ment for engangsbruk og kan brukes til behandling av følgende sår:
 • trykksår
 • arterielle sår
 • venøse lår
 • diabetiske sår
 • huddonorområder
Brugsanvisning:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er meget bløde og tilpassede til behandling af følgende sår:
 • trykksår
 • artärrelle sår
 • venösa lår
 • diabetiska sår
 • hudtransplanterat
Indikaciones:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er svært myke og anvendelige sårtilbedninger. De skaper et ideelt sårklima og egner seg for behandling av svært eksuderende overfladiske og dype sår, som også kan være infisert. Kalsiumalginatfibrerne reagerer med sårsekundat eller blod og danner en gel som gir et fuktig sårklima. Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er gamma-sterilisert og må ikke resteriliseres på nytt. Produktene er sterile så lenge pakningen er uåpnet og ikke skadet.
Produktens sammensetning:
 Calciumalginatfibrer
Indikationer:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er ment for engangsbruk og kan brukes til behandling av følgende sår:
 • trykksår
 • arterielle sår
 • venøse lår
 • diabetiske sår
 • huddonorområder
Brugsanvisning:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er meget bløde og tilpassede til behandling af følgende sår:
 • trykksår
 • artärrelle sår
 • venösa lår
 • diabetiska sår
 • hudtransplanterat
Indikaciones:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er svært myke og anvendelige sårtilbedninger. De skaper et ideelt sårklima og egner seg for behandling av svært eksuderende overfladiske og dype sår, som også kan være infisert. Kalsiumalginatfibrerne reagerer med sårsekundat eller blod og danner en gel som gir et fuktig sårklima. Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er gamma-sterilisert og må ikke resteriliseres på nytt. Produktene er sterile så lenge pakningen er uåpnet og ikke skadet.
Produktens sammensetning:
 Calciumalginatfibrer
Indikationer:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er ment for engangsbruk og kan brukes til behandling av følgende sår:
 • trykksår
 • arterielle sår
 • venøse lår
 • diabetiske sår
 • huddonorområder
Brugsanvisning:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er meget bløde og tilpassede til behandling af følgende sår:
 • trykksår
 • artärrelle sår
 • venösa lår
 • diabetiska sår
 • hudtransplanterat
Indikaciones:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er svært myke og anvendelige sårtilbedninger. De skaper et ideelt sårklima og egner seg for behandling av svært eksuderende overfladiske og dype sår, som også kan være infisert. Kalsiumalginatfibrerne reagerer med sårsekundat eller blod og danner en gel som gir et fuktig sårklima. Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er gamma-sterilisert og må ikke resteriliseres på nytt. Produktene er sterile så lenge pakningen er uåpnet og ikke skadet.
Produktens sammensetning:
 Calciumalginatfibrer
Indikationer:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er ment for engangsbruk og kan brukes til behandling av følgende sår:
 • trykksår
 • arterielle sår
 • venøse lår
 • diabetiske sår
 • huddonorområder
Brugsanvisning:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er meget bløde og tilpassede til behandling af følgende sår:
 • trykksår
 • artärrelle sår
 • venösa lår
 • diabetiska sår
 • hudtransplanterat
Indikaciones:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er svært myke og anvendelige sårtilbedninger. De skaper et ideelt sårklima og egner seg for behandling av svært eksuderende overfladiske og dype sår, som også kan være infisert. Kalsiumalginatfibrerne reagerer med sårsekundat eller blod og danner en gel som gir et fuktig sårklima. Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er gamma-sterilisert og må ikke resteriliseres på nytt. Produktene er sterile så lenge pakningen er uåpnet og ikke skadet.
Produktens sammensetning:
 Calciumalginatfibrer
Indikationer:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er ment for engangsbruk og kan brukes til behandling av følgende sår:
 • trykksår
 • arterielle sår
 • venøse lår
 • diabetiske sår
 • huddonorområder
Brugsanvisning:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er meget bløde og tilpassede til behandling af følgende sår:
 • trykksår
 • artärrelle sår
 • venösa lår
 • diabetiska sår
 • hudtransplanterat
Indikaciones:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er svært myke og anvendelige sårtilbedninger. De skaper et ideelt sårklima og egner seg for behandling av svært eksuderende overfladiske og dype sår, som også kan være infisert. Kalsiumalginatfibrerne reagerer med sårsekundat eller blod og danner en gel som gir et fuktig sårklima. Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er gamma-sterilisert og må ikke resteriliseres på nytt. Produktene er sterile så lenge pakningen er uåpnet og ikke skadet.
Produktens sammensetning:
 Calciumalginatfibrer
Indikationer:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er ment for engangsbruk og kan brukes til behandling av følgende sår:
 • trykksår
 • arterielle sår
 • venøse lår
 • diabetiske sår
 • huddonorområder
Brugsanvisning:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er meget bløde og tilpassede til behandling af følgende sår:
 • trykksår
 • artärrelle sår
 • venösa lår
 • diabetiska sår
 • hudtransplanterat
Indikaciones:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er svært myke og anvendelige sårtilbedninger. De skaper et ideelt sårklima og egner seg for behandling av svært eksuderende overfladiske og dype sår, som også kan være infisert. Kalsiumalginatfibrerne reagerer med sårsekundat eller blod og danner en gel som gir et fuktig sårklima. Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er gamma-sterilisert og må ikke resteriliseres på nytt. Produktene er sterile så lenge pakningen er uåpnet og ikke skadet.
Produktens sammensetning:
 Calciumalginatfibrer
Indikationer:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er ment for engangsbruk og kan brukes til behandling av følgende sår:
 • trykksår
 • arterielle sår
 • venøse lår
 • diabetiske sår
 • huddonorområder
Brugsanvisning:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er meget bløde og tilpassede til behandling af følgende sår:
 • trykksår
 • artärrelle sår
 • venösa lår
 • diabetiska sår
 • hudtransplanterat
Indikaciones:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er svært myke og anvendelige sårtilbedninger. De skaper et ideelt sårklima og egner seg for behandling av svært eksuderende overfladiske og dype sår, som også kan være infisert. Kalsiumalginatfibrerne reagerer med sårsekundat eller blod og danner en gel som gir et fuktig sårklima. Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er gamma-sterilisert og må ikke resteriliseres på nytt. Produktene er sterile så lenge pakningen er uåpnet og ikke skadet.
Produktens sammensetning:
 Calciumalginatfibrer
Indikationer:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er ment for engangsbruk og kan brukes til behandling av følgende sår:
 • trykksår
 • arterielle sår
 • venøse lår
 • diabetiske sår
 • huddonorområder
Brugsanvisning:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er meget bløde og tilpassede til behandling af følgende sår:
 • trykksår
 • artärrelle sår
 • venösa lår
 • diabetiska sår
 • hudtransplanterat
Indikaciones:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er svært myke og anvendelige sårtilbedninger. De skaper et ideelt sårklima og egner seg for behandling av svært eksuderende overfladiske og dype sår, som også kan være infisert. Kalsiumalginatfibrerne reagerer med sårsekundat eller blod og danner en gel som gir et fuktig sårklima. Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er gamma-sterilisert og må ikke resteriliseres på nytt. Produktene er sterile så lenge pakningen er uåpnet og ikke skadet.
Produktens sammensetning:
 Calciumalginatfibrer
Indikationer:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er ment for engangsbruk og kan brukes til behandling av følgende sår:
 • trykksår
 • arterielle sår
 • venøse lår
 • diabetiske sår
 • huddonorområder
Brugsanvisning:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er meget bløde og tilpassede til behandling af følgende sår:
 • trykksår
 • artärrelle sår
 • venösa lår
 • diabetiska sår
 • hudtransplanterat
Indikaciones:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er svært myke og anvendelige sårtilbedninger. De skaper et ideelt sårklima og egner seg for behandling av svært eksuderende overfladiske og dype sår, som også kan være infisert. Kalsiumalginatfibrerne reagerer med sårsekundat eller blod og danner en gel som gir et fuktig sårklima. Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er gamma-sterilisert og må ikke resteriliseres på nytt. Produktene er sterile så lenge pakningen er uåpnet og ikke skadet.
Produktens sammensetning:
 Calciumalginatfibrer
Indikationer:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er ment for engangsbruk og kan brukes til behandling av følgende sår:
 • trykksår
 • arterielle sår
 • venøse lår
 • diabetiske sår
 • huddonorområder
Brugsanvisning:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er meget bløde og tilpassede til behandling af følgende sår:
 • trykksår
 • artärrelle sår
 • venösa lår
 • diabetiska sår
 • hudtransplanterat
Indikaciones:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er svært myke og anvendelige sårtilbedninger. De skaper et ideelt sårklima og egner seg for behandling av svært eksuderende overfladiske og dype sår, som også kan være infisert. Kalsiumalginatfibrerne reagerer med sårsekundat eller blod og danner en gel som gir et fuktig sårklima. Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er gamma-sterilisert og må ikke resteriliseres på nytt. Produktene er sterile så lenge pakningen er uåpnet og ikke skadet.
Produktens sammensetning:
 Calciumalginatfibrer
Indikationer:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er ment for engangsbruk og kan brukes til behandling av følgende sår:
 • trykksår
 • arterielle sår
 • venøse lår
 • diabetiske sår
 • huddonorområder
Brugsanvisning:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er meget bløde og tilpassede til behandling af følgende sår:
 • trykksår
 • artärrelle sår
 • venösa lår
 • diabetiska sår
 • hudtransplanterat
Indikaciones:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er svært myke og anvendelige sårtilbedninger. De skaper et ideelt sårklima og egner seg for behandling av svært eksuderende overfladiske og dype sår, som også kan være infisert. Kalsiumalginatfibrerne reagerer med sårsekundat eller blod og danner en gel som gir et fuktig sårklima. Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er gamma-sterilisert og må ikke resteriliseres på nytt. Produktene er sterile så lenge pakningen er uåpnet og ikke skadet.
Produktens sammensetning:
 Calciumalginatfibrer
Indikationer:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er ment for engangsbruk og kan brukes til behandling av følgende sår:
 • trykksår
 • arterielle sår
 • venøse lår
 • diabetiske sår
 • huddonorområder
Brugsanvisning:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er meget bløde og tilpassede til behandling af følgende sår:
 • trykksår
 • artärrelle sår
 • venösa lår
 • diabetiska sår
 • hudtransplanterat
Indikaciones:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er svært myke og anvendelige sårtilbedninger. De skaper et ideelt sårklima og egner seg for behandling av svært eksuderende overfladiske og dype sår, som også kan være infisert. Kalsiumalginatfibrerne reagerer med sårsekundat eller blod og danner en gel som gir et fuktig sårklima. Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er gamma-sterilisert og må ikke resteriliseres på nytt. Produktene er sterile så lenge pakningen er uåpnet og ikke skadet.
Produktens sammensetning:
 Calciumalginatfibrer
Indikationer:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er ment for engangsbruk og kan brukes til behandling av følgende sår:
 • trykksår
 • arterielle sår
 • venøse lår
 • diabetiske sår
 • huddonorområder
Brugsanvisning:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er meget bløde og tilpassede til behandling af følgende sår:
 • trykksår
 • artärrelle sår
 • venösa lår
 • diabetiska sår
 • hudtransplanterat
Indikaciones:
 Suprasorb® A Kalsiumalginat kompress og tamponer er svært myke og anvendelige sårtilbedninger. De skaper et ideelt sårklima og egner seg for behandling av svært eksuderende overfladiske og dype sår, som også kan være infisert. Kalsiumalginatfibrerne reagerer med sårsekundat eller blod og danner en gel som