



PERIPHERAL INTERVENTION

Embosphere®

Микросферы



Предсказуемые. Целенаправленные. Признанные.

Embosphere®

Микросферы

Предсказуемые. Целенаправленные. Признанные.

Микросферы Embosphere изготовлены из молекул трис-акрила, связанных с молекулами желатина, что позволяет легко использовать и контролировать их. Микросферы Embosphere предназначены для использования при эмболизации артериовенозных мальформаций (АВМ), гиперваскулярных опухолей и симптоматических фибромиом матки. Они являются наиболее клинически изученными и используемыми сферическими эмболами — не требуется делать никаких предположений. Эффективность микросфер Embosphere была доказана:



- Более чем 350 000 процедурами, проведенными по всему миру
- Более чем 15 годами применения в клинической практике
- Более чем 200 научными статьями


Отсутствие агрегации

Гидрофильная поверхность и сферическая форма микросфер Embosphere предотвращает агрегацию в просвете катетера и сосудов.

Улучшенная способность восстановления


Эластичные свойства микросфер Embosphere позволяют микросферам временно сжиматься на величину до 33% для обеспечения беспрепятственного прохождения по микрокатетеру (А).¹ После прохождения по микрокатетеру микросферы Embosphere возвращаются к своей изначальной сферической форме и заявленному диаметру (Б) для предсказуемой, целенаправленной доставки.¹

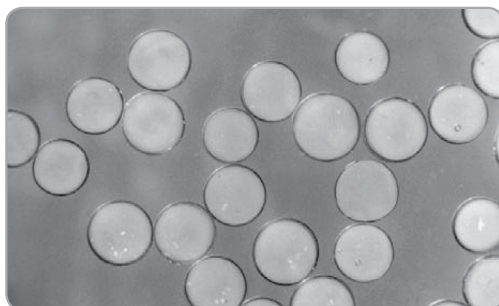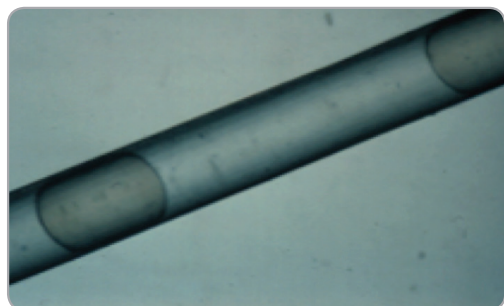

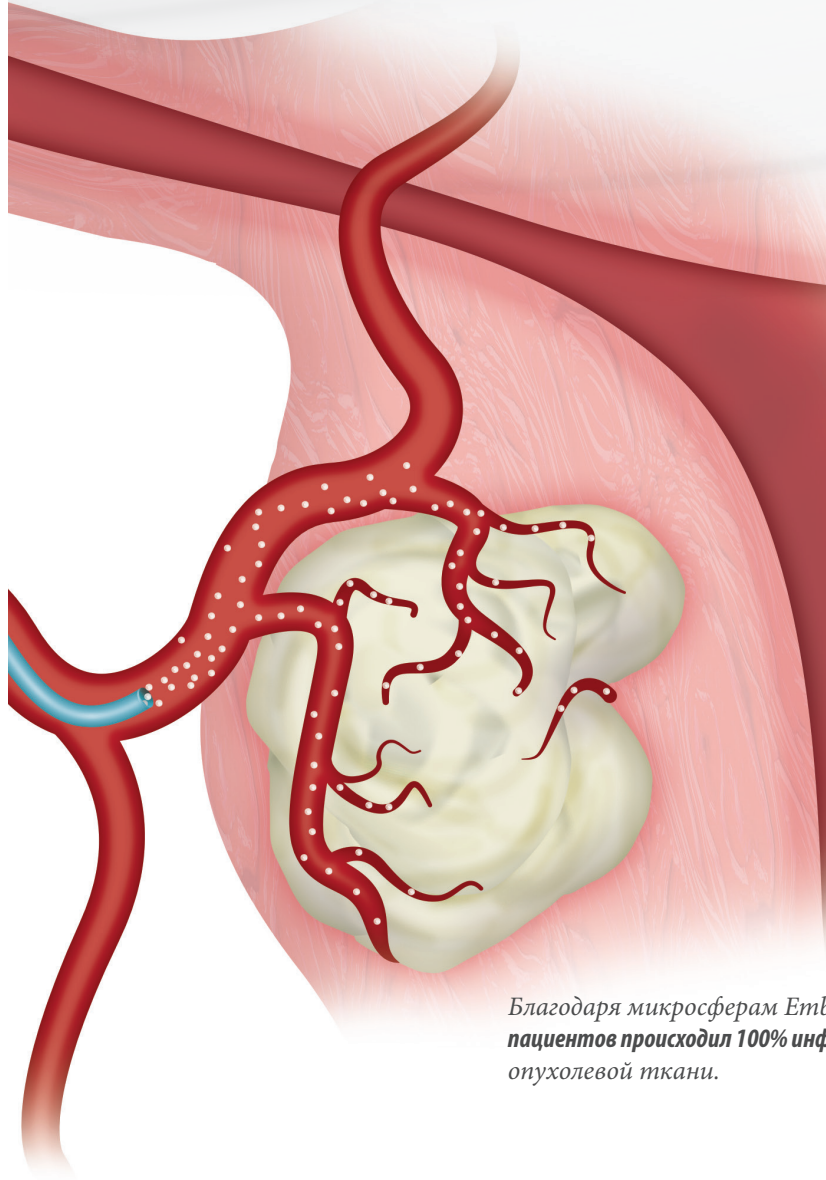

Длительная окклюзия

Микросферы Embosphere (биосовместимые и нерассасывающиеся) обладают клеточно-адгезивными свойствами, обеспечивающими полную и длительную механическую окклюзию.

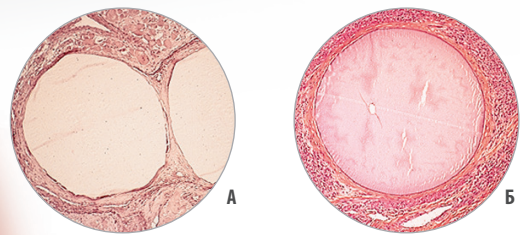


Микросферы Embosphere через шесть месяцев (А) и шесть лет (Б) после эмболизации АВМ лицевой области.

Фотографии предоставлены д-ром Алексом Лораном (Alex Laurent), больница Ларибуазьер, Париж, Франция

Благодаря микросферам Embosphere®, пациентов происходил 100% инфаркт опухолевой ткани.

Показатель частоты инфарктов фиброматозного узла

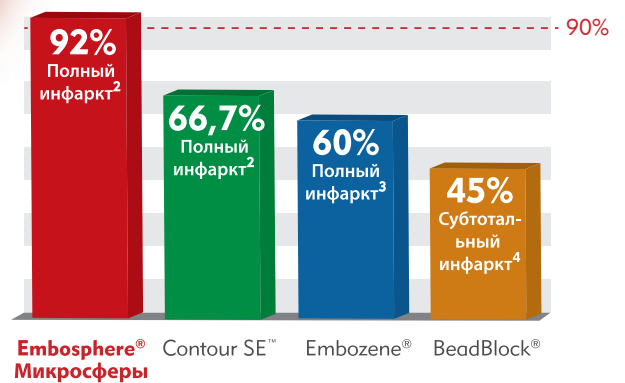

«Долгосрочное клиническое улучшение после ЭМА зависит от инфаркта миомы, а не от уменьшения миомы».

— Д-р Жан-Пьер Пелаж (Jean-Pierre Pelage)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Laurent, et al. Am J Neuroradiol 17:533-540, March 1996. Trisacryl Gelatin Microspheres for Therapeutic Embolization, I: Development and In Vitro Evaluation
2. Siskin, et al. JVIR 2008. Leiomyoma Infarction after Uterine Artery Embolization: A Prospective Randomized Study Comparing Tris-acryl Gelatin Microspheres versus Polyvinyl Alcohol Microspheres
3. Smeets, et al. JVIR 2010. Embolization of Uterine Leiomyomas with Polyzene F-coated Hydrogel Microspheres: Initial Experience
4. Chrisman, et al. JVIR 2010. Prospective Evaluation of the Embolic Agent Bead Block in the Treatment of Uterine Leiomyomas with Uterine Artery Embolization: A Phase II Study

Embosphere®

Микросферы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Диапазон размеров в шприцах (мкм)	Цветовая кодировка	Номер продукта – шприц 1 мл	Номер продукта – шприц 2 мл
40-120	Оранжевая	S110GH	S120GH
100-300	Желтая	S210GH	S220GH
300-500	Синяя	S410GH	S420GH
500-700	Красная	S610GH	S620GH
700-900	Зеленая	S810GH	S820GH
900-1200	Фиолетовая	S1010GH	S1020GH

Микросферы Embosphere поставляются в стерильном физиологическом растворе в 20 мл шприце.

Диапазон размеров во флаконах (мкм)	Цветовая кодировка	Номер продукта – флакон 1 мл	Номер продукта – флакон 2 мл
40-120	Оранжевая	V110GH	V120GH
100-300	Желтая	V210GH	V220GH
300-500	Синяя	V410GH	V420GH
500-700	Красная	V610GH	V620GH
700-900	Зеленая	V810GH	V820GH
900-1200	Фиолетовая	V1010GH	V1020GH

Микросферы Embosphere поставляются в стерильном физиологическом растворе в 5 мл флаконе.



СПЕЦИФИЧНЫЕ ДИАПАЗОНЫ РАЗМЕРОВ

Микросферы Embosphere доступны в шести специфических диапазонах размеров для достижения предсказуемой и эффективной окклюзии сосудов и охвата опухоли.



Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.208.4300
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733

MeritEMEA.com

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (Français)

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Portugal
308 801 034

Russia
+7 495 221 89 02

Spain
+34 911238406

Sweden
020 792 445

Switzerland
(Deutsch)
+41 225180252

(Français)
+41 225948000

(Italiano)
+41 225180035

UK
0800 973 115