

НаетоСегTM PLUS

Гемостатическая пудра

100%
Резорбируемый

Растительного
происхождения

Сделано
в Германии

Натуральный - Безопасный - Эффективный

BioCег

BioCer

НаемоСer™ PLUS

НаемоСer™ PLUS – адсорбируемый полисахаридный гемостатик (АПГ), представляет собой запатентованную технологию, созданную в результате инженерно-технической разработки ультрагидрофильных резорбируемых полисахаридов (PURE™). НаемоСer™ PLUS является полностью рассасывающимся гемостатиком растительного происхождения и не содержит компонентов животного или челове-

ческого происхождения. Гемостаз достигается за счет ускорения процесса нормального физиологического свертывания крови без участия химических или фармацевтических веществ. Независимые исследования показывают, что гемостатическая пудра на растительной основе НаемоСer™ PLUS снижает риск образования послеоперационных спаек.

Натуральный

- Растительного происхождения
- Не содержит компонентов человеческого или животного происхождения
- Полностью резорбируется

Безопасный

- Не приводит к воспалительным реакциям и формированию гранул благодаря быстрому рассасыванию
- Снижает необходимость переливания крови

Эффективный

- Поглощающая способность выше в два раза, компактная упаковка
- Не требуется специальных условий хранения, прост в применении

Способ применения DAPI

Осушить (D – Dry)

Удалите выступившую кровь с помощью отсоса или марли

Нанести (A – Apply)

Незамедлительно и обильно нанесите НаемоСer™ PLUS на источник кровотечения

Прижать (P – Press)

Осторожно надавите на источник кровотечения, используя сухую марлю. Удерживайте марлю до 2 минут в случае обильного кровотечения

Смочить (I – Irrigate)

Перед осторожным удалением марли смочите ее физраствором, чтобы сохранить гелеобразную матрицу



Сделано
в Германии

Улучшенная формула

НаемоСer™ PLUS – адсорбируемая полисахаридная гемостатическая (АПГ) система, основанная на усовершенствованной технологии межмолекулярных взаимодействий полимеров растительного происхождения (полисахаридная ультрагидрофильная резорбируемая система) PURE™, которая создает ультрагидрофильные, биосовместимые частицы.


В результате контакта НаемоСer™ PLUS с кровью запускается механизм двойного действия. Во-первых, происходит ускорение естественного процесса свертывания крови посредством быстрой дегидратации крови и ускорения концентрации тромбоцитов, белков крови и других компонентов свертывающей системы в месте кровотечения.

Во-вторых, образуется прочная гелеобразная матрица, которая выступает в качестве механического барьера и предупреждает повторное кровотечение.


НаемоСer™ PLUS не содержит компонентов животного или человеческого происхождения, расщепляется амилазой и выводится из организма в течение 48 часов.

При лапароскопических вмешательствах, в ЛОР-хирургии, спинальной и минимально инвазивной хирургии применяется удлиненный аппликатор НаемоСer™ Universal Applicator.

Применение гемостатика НаемоСer™ PLUS

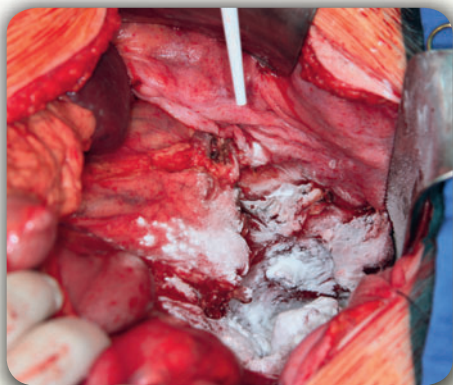


Общая хирургия

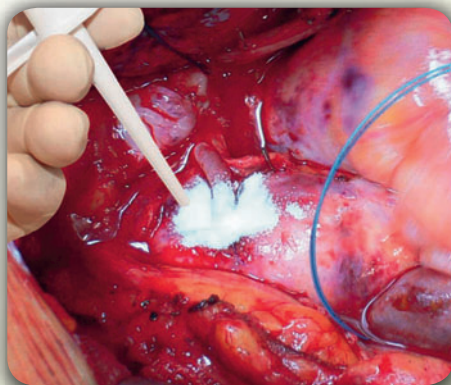


Кардиохирургия




Трансплантация почки

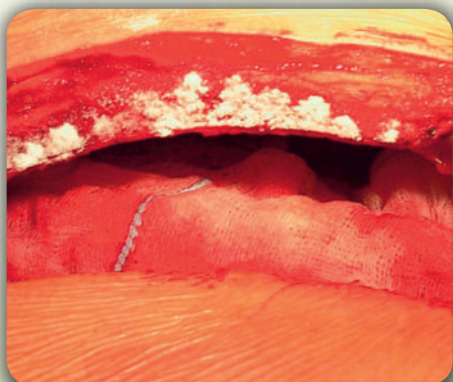

Стернотомия

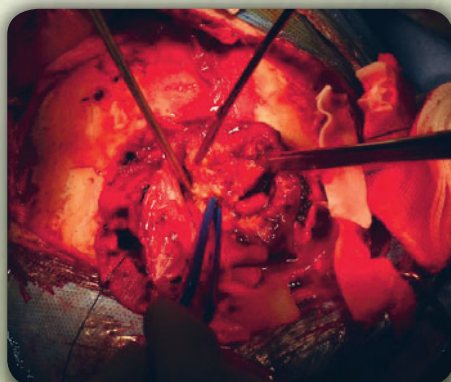

Удаление опухоли
головного мозга

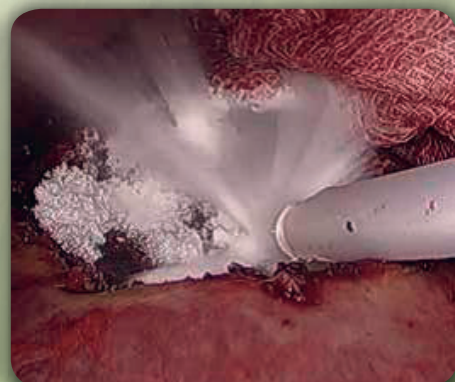

Использование
удлиненного аппликатора

Широкое применение HaemoCer™ PLUS:

- остановка диффузных и локализованных кровотечений;
- для остановки кровотечений при негерметичности линии шва;
- в качестве замены фибринового клея для остановки кровотечений в сосудистой хирургии;
- в качестве замены костного воска для остановки костных кровотечений;
- сокращает необходимость использования электрокоагуляции и снижает риск сопряженного с этим повреждения тканей;
- использование с совместимыми фильтр-системами для аутогемотрансфузии.

Области применения:

- Кардиохирургия, сосудистая и торакальная хирургия
- Общая хирургия
- Трансплантация
- Травматология
- Удаление опухоли
- ЧЛХ
- ЛОР-хирургия
- Урология/гинекология
- Ортопедия
- Пластическая хирургия
- Ожоговая хирургия
- Нейрохирургия
- Педиатрия

Информация для заказа

Код	Описание	Кол-во
HFP201	HaemoCer™ PLUS 1 г, во флаконе с аппликатором	упак./5 шт.
HFP202	HaemoCer™ PLUS 2 г, во флаконе с аппликатором	упак./5 шт.
HFP203	HaemoCer™ PLUS 3 г, во флаконе с аппликатором	упак./5 шт.
HFP205	HaemoCer™ PLUS 5 г, во флаконе с аппликатором	упак./5 шт.
HFZ101	Универсальный аппликатор HaemoCer™ Universal Applicator 440 мм	упак./5 шт.



«НДА ДЕЛОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ»
 190121, Санкт-Петербург, Перевозная ул., д. 6 (Матисов остров).
 Тел./факс: (812) 714-06-14 (многоканальный).
 E-mail: nda@nda.ru, http: //www.nda.ru

CE 0197

