



Pegaso Plus

Combi/Cough



- Самый легкий и компактный из представленных в РФ
- Возможность выбора соотношения вдох/выдох I:E по состоянию пациента для достижения лучшего результата в режиме Перкуссии*.
- Выбор оптимального режима терапии:
 - ✓ Автоматический
 - ✓ Ручной
 - ✓ Синхронизированный Auto-Sync
 - ✓ Стартовая синхронизация EasyStart
- 3 уровня нарастания потока.
- Активация функции Перкуссии* или Пульсации в ходе терапии в режиме откашливания.
- Расширенный диапазон времени вдоха/выдоха/паузы
- Сохранение параметров терапии и просмотр на экране монитора.
- Индикация клинически значимых значений P_i , SpO_2 и PR благодаря высокочувствительному датчику MASIMO (опционально).
- Установка диапазона и аудиоиндикация оповещений.
- Встроенная литий-полимерная батарея.
- Возможность сочетания с подогреваемым увлажнителем или небулайзером.

* для варианта исполнения Pegaso Plus Combi

Интрапульмональная перкуSSIONная вентиляция легких* и искусственный кашель.

Pegaso Plus COMBI/Cough

Назначение

Показания	Для пациентов с пониженной способностью кашлять из-за таких состояний, как мышечная дистрофия, тяжелая миастения, полиомиелит, паралич дыхательных мышц, повреждение спинного мозга, эмфизема или кистозный фиброз.
Пациент	Взрослые и дети от 5 кг

Физические характеристики

Вес основного блока	3,2 кг
Размеры	270 x 260 x 130 мм

Параметры терапии

Режимы	Автоматический, Ручной, EasyStart, AutoSync, ПеркуSSIONный
Давление вдоха	от 0 до +70 см H ₂ O
Давление выдоха	от 0 до -70 см H ₂ O
Время вдоха	от 0,5 до 9,9 сек
Время выдоха	от 0,5 до 9,9 сек
Время паузы	от 0,0 до 9,9 сек
Чувствительность триггера	от 1 до 9
Поток (Скорость нарастания)	Высокий, средний, низкий
Максимальная скорость выдоха	от 70 до 240 л/мин
Объем вдоха	от 0 до 2500 см ³
Частота перкуSSION*	от 50 до 600 циклов/мин
Частота пульсации	300 циклов/мин
Соотношение вдох/выдох*	от 5,0:1 до 1:5,0

Настройки комфорта

- Синхронизация с дыханием пациента
- Выбор начальной или постоянной синхронизации
- Остановка цикла в автоматическом режиме на этапе вдоха или выдоха по необходимости

Дополнительные функции

- Подключение увлажнителя
- Подключение небулайзера
- Настройки диапазона минимальных/максимальных значений SpO_2 и частота пульса для оповещения
- Настройка времени сигнализации о насыщении кислородом
- Функция смены перкуSSIONного режима на режим откашливания и обратно в ходе терапии*


Данные мониторинга

- Максимальная скорость выдоха
- Объем вдоха
- Актуальное давление вдоха/выдоха
- SpO_2
- Частота пульса
- Индекс перфузии
- Сохранение данных в устройстве (до 200 процедур с детализацией) и просмотр на мониторе
- Передача данных для анализа в ПК

Комплектация

PegasoPlus	Стандартная комплектация
Сумка для переноски	Стандартная комплектация
Контур пациента	Стандартная комплектация
Руководство пользователя	Стандартная комплектация
Встроенная батарея	Стандартная комплектация
Пульсоксиметрический датчик	Опция
ПеркуSSIONный переходник	Опция

Запись и анализ данных Therapies_Downloader

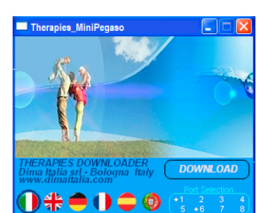

PEGASO PLUS использует технологию



DIMAITALIA®

Адрес производителя: Dima Italia®
Via C. Vighi, 29
I40133 Болонья ИТАЛИЯ
www.dimaitalia.com

