

# АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ ЭНСИЛ

НОВАЯ ЭРА  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ГЕМОСТАЗА

Для медицинских специалистов

**ETHICON**  
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES


**Enseal**

# АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ ЭНСИЛ

## Обеспечивает гемостаз, как никто другой!\*


Перпендикулярный доступ к структурам обеспечит более надежное лигирование!


- позволяет добиться перпендикулярного доступа к структурам за счет 110° артикуляции и полной ротации ствола на 360°
- показатель давления на разрыв сосудов, заваренных при перпендикулярном доступе, на 28% выше аналогичного показателя при доступе 45°
- позволяет одновременно захватить большую площадь сосуда, без предварительного выделения

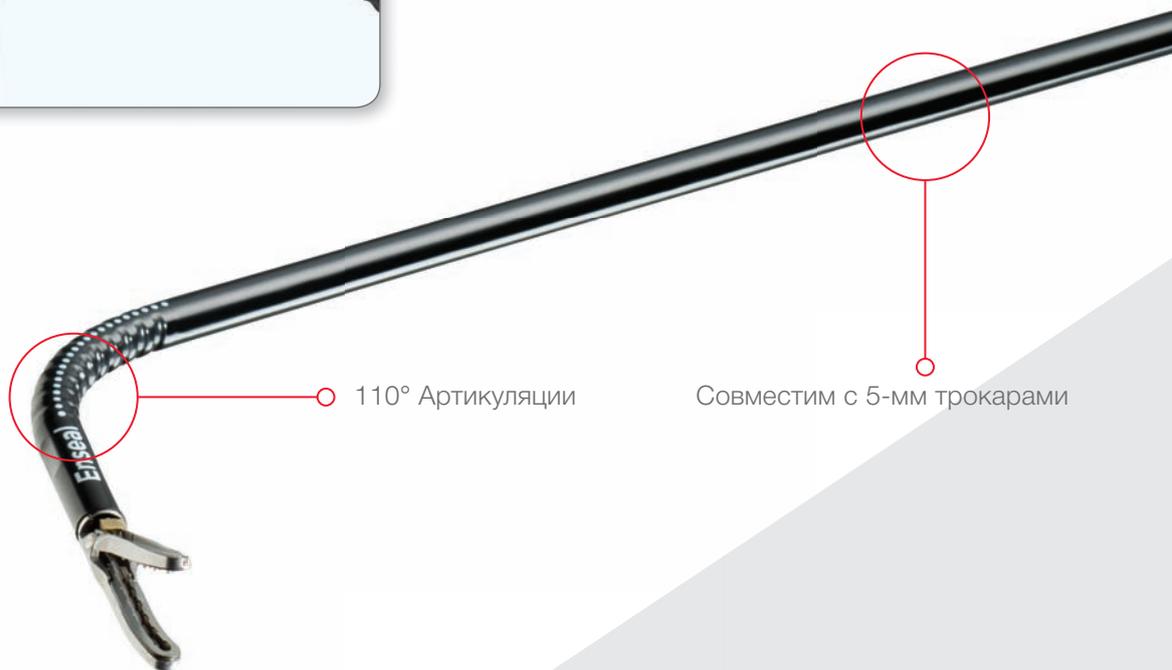

Большая маневренность для обеспечения лучшего доступа

- Предоставляет возможность для маневра вокруг и за структурами в условиях сложной анатомии
- Предоставляет возможность доступа к структурам, располагающимся в глубоких и/или узких местах, обеспечивая возможность перпендикулярного лигирования
- Может сократить количество манипуляций тканями, необходимых для достижения оптимального доступа к наметенной структуре.

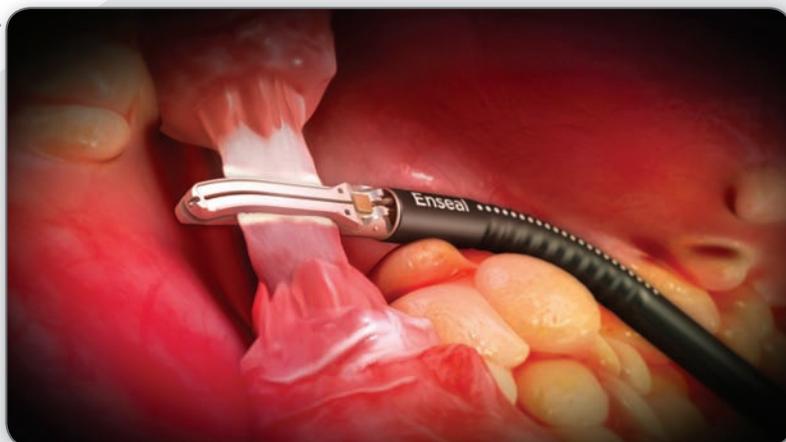

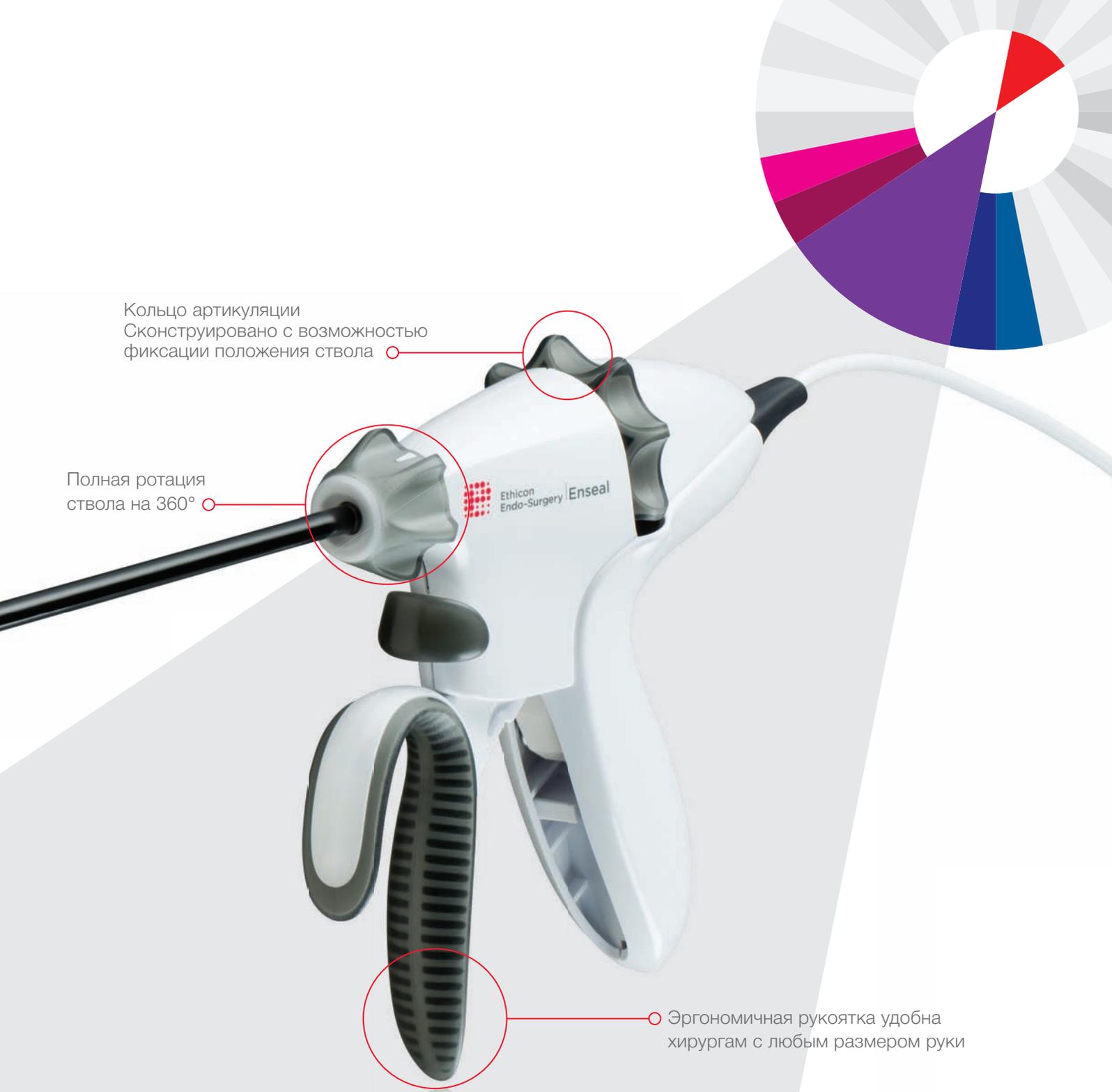

Кольцо артикуляции  
Сконструировано с возможностью  
фиксации положения ствола

Полная ротация  
ствола на 360°

Эргономичная рукоятка удобна  
хирургам с любым размером руки

## Технология биполярной электрокоагуляции Энсил

### БЕЗОПАСНО

- Заваривает и рассекает кровеносные и лимфатические сосуды до 7 мм включительно
- Обеспечивает превосходную равномерную компрессию тканей по всей длине браншей

### БЕРЕЖНО

- РТС-полимер контролирует температуру нагрева ткани в браншах в пределах 100 °С, обеспечивая меньше налипания, обугливания и задымленности
- Особая конфигурация электродов обеспечивает минимальное латеральное термическое повреждение ткани, в пределах 1 мм, позволяя работать вблизи жизненно важных органов.

Второе поколение инструментов Энсил

# Обеспечивает гемостаз, как никто другой!



## Артикуляционный Энсил, изогнутый

Код	Диаметр ствола	Длина ствола	Кол-во в упаковке
NSLG2C35A	5 мм	35 см	6



## Артикуляционный Энсил, прямой

Код	Диаметр ствола	Длина ствола	Кол-во в упаковке
NSLG2S35A	5 мм	35 см	6



## Энсил G2 изогнутая

Код	Диаметр ствола	Длина ствола	Кол-во в упаковке
NSLG2C14	5 мм	14 см	6
NSLG2C25	5 мм	25 см	6
NSLG2C35	5 мм	35 см	6
NSLG2C45	5 мм	45 см	6



## Энсил G2 прямая

Код	Диаметр ствола	Длина ствола	Кол-во в упаковке
NSLG2S14	5 мм	14 см	6
NSLG2S25	5 мм	25 см	6
NSLG2S35	5 мм	35 см	6
NSLG2S45	5 мм	45 см	6



## Энсил G2 Super Jaw (Супер Джоу)

Код	Диаметр ствола	Длина ствола	Кол-во в упаковке
NSEALX22L	12 мм	22 см	6



Все инструменты Энсил и Гармоник совместимы с генератором GEN11 (Джен Илевен)

Для более подробного ознакомления с инструментами Энсил свяжитесь со своим представителем Эतिकон Эндо-Хирургия и Энергия

Инструменты ENSEAL® были протестированы на 5-мм свиных сонных артериях.

У инструментов NSLG2C35A средние значения давления на разрыв были на 51% выше для сосудов, пересеченных под углом 90°, по сравнению с сосудами, пересеченными под углом 45° (P=0,0007).

У инструментов NSLG2S35A средние значения давления на разрыв были на 29% выше для сосудов пересеченных под углом 90° по сравнению с сосудами, пересеченными под углом 45° (P=0,001).

Внутреннее исследование компании Эतिकон Эндо-Хирургия и Энергия.

\* За счет применения РТС-полимера, обеспечивающего ограничение температуры нагрева ткани в пределах 100 °С, а также особой конфигурации электродов инструмента, обеспечивающей минимальное латеральное термическое повреждение тканей.

ПУ № ФСЗ 2012/11598 от 14.03.2012.

ПУ № ФСЗ 2011/11397 от 30.12.2011.

ПУ № ФСЗ 2012/11599 от 14.03.2012

Товар сертифицирован.

ООО «Джонсон & Джонсон»

121614, Москва

ул. Крылатская 17, корп. 3, этаж 2

Тел.: +7 (495) 580-77-77,

Факс: +7 (495) 580-78-78.

**ETHICON**  
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES