
Каталог продукции ETHICON®

- Шовные материалы
- Сетчатые импланты
- Дренажные системы
- Кожные клеи
- Гемостатические средства местного действия и другие решения для разных областей хирургии

VICRYL® RAPIDE* (Полиглактин 910)

Синтетический рассасывающийся
многофиламентный шовный материал



ETHICON
Johnson & Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

* Репид

VICRYL® RAPIDE*

(Полиглактин 910 с покрытием из Полилактина 370 и стеарата кальция)

Синтетический рассасывающийся многофиламентный шовный материал состоит из полиглактина 910 – синтетического сополимера. По химическому составу идентичен VICRYL®, но проходя специальную обработку в гамма-камере, VICRYL® RAPIDE* меняет свой молекулярный вес таким образом, что срок поддержки раны и полного рассасывания шовного материала сокращается.



Быстрый профиль рассасывания

Рассасывание нити происходит под действием химического процесса – гидролиза. Полное рассасывание нити происходит через 42 дня.

Прочность на разрыв

В зависимости от срока нахождения в ушитой ране, прочность нити на разрыв меняется.



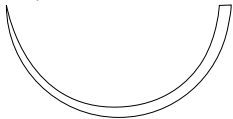
Срок имплантации	Остаточная прочность
5 суток	50%
10–14 суток	0%

Быстрая потеря прочности на разрыв предотвращает необходимость снятия швов.

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	
⊙ RB-1 (17 мм) 	75			W9970	W9969	12
⊙ SH-1 (22 мм) 	75		W9974			12
⊖ CT-2 PLUS (26 мм)  уплощенный кончик усиленная игла	70	V55H				36

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	
▼ V-34 (36 мм) 	90	W9964	W9963	W9962	12
▼ V-37 (40 мм) 	90			W9946	12
▼ V-39 (45 мм) 	90		W9947		12



КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		4/0 (M1,5)		
▼ UV-17 (17 мм) 	75	W9928		12









РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	
▲ PS-22 CONV PRIME (22 мм) 	45		W9926	12
▲ X-1 CONV (22 мм) 	45	W9935		12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	
▲ PC-3 PRIME (16 мм) 	75		W9918	12
▲ FS-3 (16 мм) 	75	W9925	W9924	12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	6/0 (M0,7)	
▼ P-1 PRIME (11 мм) 	45				W9915 ■	W9913 ■	12
▼ PS-4C PRIME (16 мм)  со сложным изгибом	45			W9911 ■	W9910 ■		12
▼ PS-2 PRIME (19 мм) 	75		W9923 ■	W9922 ■			12
▼ FS-2 (19 мм) 	75		W9931 ■	W9930 ■			12
▼ FS (26 мм) 	75	W9941 ■	W9940 ■				12
▼ PS PRIME (26 мм) 	75		W9932 ■				12
▼ FSLX (36 мм) 	75	W9961 ■					12
▼ PSLX PRIME (36 мм) 	75	W9938 ■	W9937 ■				12

ВИКРИЛ РАПИД БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		1 (M4)	0 (M3,5)	
БЕЗ ИГЛЫ	2x70	V8655H ■		36
БЕЗ ИГЛЫ	2x70		V8654E ■	24