



РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ОПЕРАЦИОННОЙ

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
РЕШЕНИЙ, КОТОРОМУ
ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ



ШОВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Каталог продукции 2018/2019

Medtronic
Further. Together

CAPROSYN™

Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал

Поддерживает, когда это вам необходимо.
Рассасывается, когда больше вам не нужен.



Быстрое рассасывание, что
уменьшает возможные осложнения
раны.

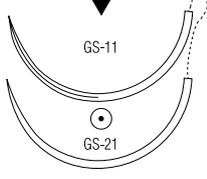
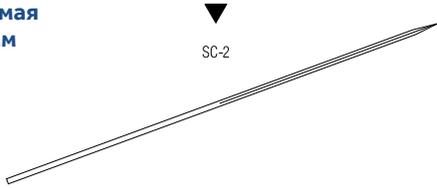
Описание материала	Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал Caprosyn™ изготавливается из синтетического полиэфира POLYGLYTONE™ 6211, который состоит из гликолида, капролактона, триметилен карбоната и лактида.
Показания	Синтетический рассасывающийся шовный материал Caprosyn™ предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования в общей, пластической и косметической хирургии, урологии и гинекологии. Применение в сердечно-сосудистой хирургии и на нейрохирургии, микрохирургии и офтальмологии не рекомендуется.
Применение	Синтетический рассасывающийся шовный материал Caprosyn™ вызывает минимальную острую воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется. Прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание шовного материала Caprosyn™ происходит путем гидролиза.
Срок поддержки раны	Проведенные исследования в области подкожной имплантации шовного материала Caprosyn™ определили, что минимум 50 - 60% прочности узла по USP и EP сохраняется в первые 5 дней и около 20 - 30% сохраняется по истечении 10 дней после имплантации шовного материала. Полная потеря прочности происходит к 21 дню после имплантации.
Стерилизация	Окись этилена.
Рассасывание	Процесс рассасывания начинается, как потеря прочности без потери массы и заканчивается к 56 дню.
Упаковка	Шовный материал CAPROSYN™ производится в бесцветном варианте или окрашенными в фиолетовый D&C цвет № 2. Возможные варианты размеров от 1 USP (4 UP) до 6-0 (0.7 EP). Стерильный шовный материал поставляется в отрезках, катушках, безыгольном исполнении или с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми. Формируется в коробках по 12, 24 и 36 шт. Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.

Caprosyn™ - шовный материал, которому вы доверяете более 10 лет, имеющий доказанную временем эффективность.

КАТУШКИ / REEL

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
	0	3.5	150	Неокрашенный	36		C-214

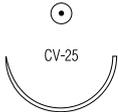
ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	SC-690G
	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SC-691
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SC-692
3/8 круга 26 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SC-587
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	SC-586
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36	CC-543
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	150	Неокрашенный	36	CC-983
Прямая 60 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	SC-644
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	SC-643

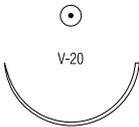
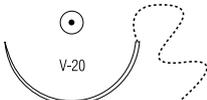
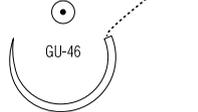
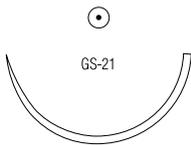
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
3/8 круга 11 мм		6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-3625G
		5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-3626G
3/8 круга 13 мм		6-0	0.7	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5688G
		5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5689G
		5-0	1	45	Фиолетовый	12	Surgalloy™	SC-5587G
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5690G
		4-0	1.5	45	Фиолетовый	12	Surgalloy™	SC-5590G
3/8 круга 16 мм		5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5626G
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5686G
3/8 круга 19 мм		5-0	1	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5616G
		4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5617G
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5637G
		3-0	2	45	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5618G
		3-0	2	75	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5638G
3/8 круга 24 мм		4-0	1.5	45	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SC-5679
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	SC-5779
		3-0	2	75	Неокрашенный	12	Surgalloy™	SC-5780G

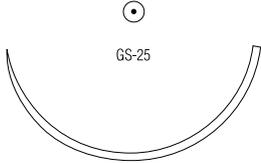
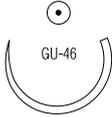
КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание		Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
		USP	Метрик					
1/2 круга 17 мм		5-0	1	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UC-202
		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UC-203
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UC-204
1/2 круга 22 мм		4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UC-403
		3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	UC-404

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер		Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
	USP	Метрик					
1/2 круга 22 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36		UC-863
1/2 круга 26 мм 	4-0	1.5	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	GC-121
	4-0	1.5	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GC-321
	3-0	2	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	GC-122
	3-0	2	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GC-322
	2-0	3	75	Неокрашенный	36	Surgalloy™	GC-123
	2-0	3	75	Фиолетовый	36	Surgalloy™	GC-323
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		GC-124
1/2 круга 26 мм 	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CC-658
5/8 круга 27 мм 							
1/2 круга 27 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CC-883
	2-0	3	75	Фиолетовый	36		CC-830
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CC-884
	1	4	75	Неокрашенный	36		CC-885
1/2 круга 37 мм 	3-0	2	75	Неокрашенный	36		CC-810
	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CC-811
	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CC-923
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CC-812
	0	3.5	75	Фиолетовый	36		CC-844
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CC-924
	1	4	75	Неокрашенный	36		CC-813
	1	4	75	Фиолетовый	36		CC-845
	1	4	90	Неокрашенный	36		CC-925
1/2 круга 40 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36		CC-801
	2-0	3	90	Неокрашенный	36		CC-915
	0	3.5	75	Неокрашенный	36		CC-802
	0	3.5	90	Неокрашенный	36		CC-913
	1	4	75	Неокрашенный	36		CC-803
	1	4	90	Неокрашенный	36		CC-914

КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга 48 мм 	0	3.5	90	Неокрашенный	36	CC-904
	1	4	90	Неокрашенный	36	CC-905
5/8 круга 27 мм 	2-0	3	75	Неокрашенный	36	UC-978

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ / TAPER CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
1/2 круга 37 мм 	2-0	3	90	Неокрашенный	12	CC-1945G

КОСМЕТИЧЕСКАЯ РЕЖУЩАЯ / COSMETIC CONVENTIONAL CUTTING

Описание	Размер	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Комментарии	Код для заказа
3/8 круга 13 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	12	XC-834
3/8 круга 16 мм 	5-0	1	45	Неокрашенный	12	XC-844
	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	XC-845
3/8 круга 19 мм 	4-0	1.5	45	Неокрашенный	12	XC-823