


ГЕРНИОСТЕПЛЕР RELIATACK™ И КОМПОЗИТНАЯ СЕТКА SYMBOTEX™ СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА

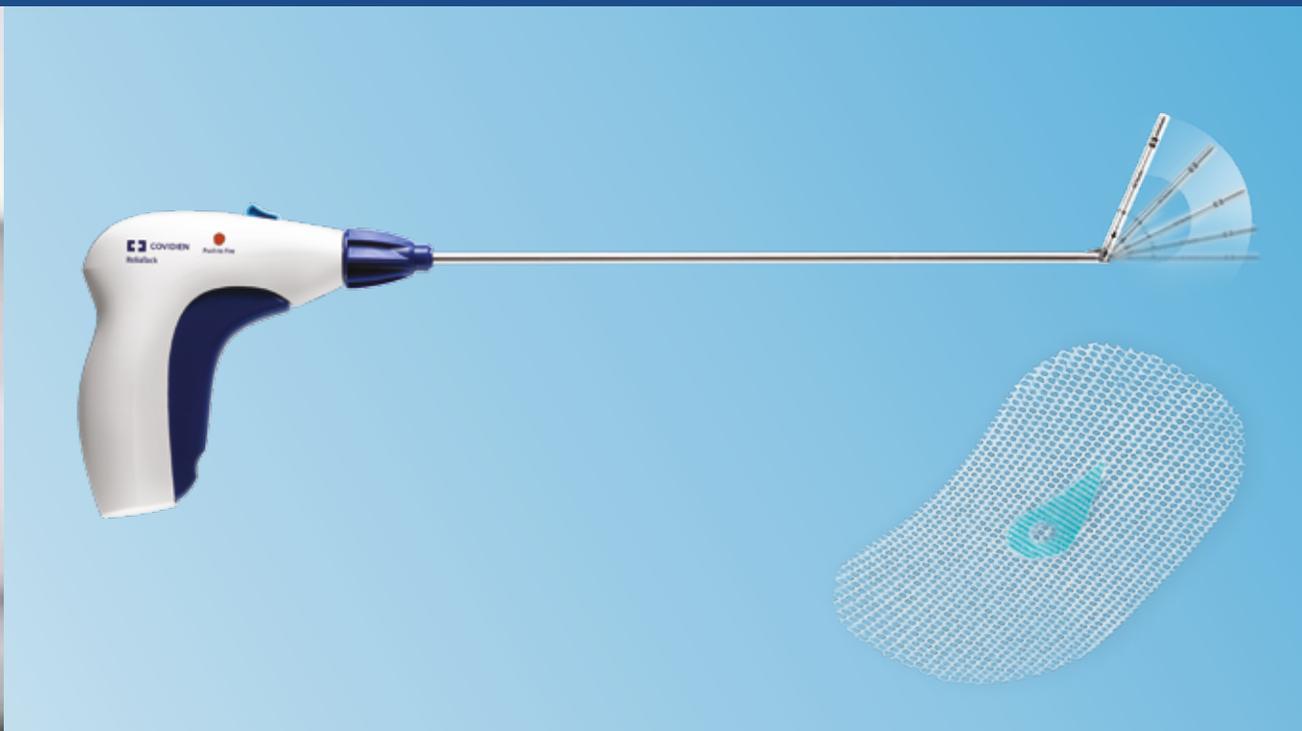

ХИРУРГИЯ ГРЫЖ ■ СЕТКИ ■ ГЕРНИОСТЕПЛЕРЫ ■ PERMACOL™ ■ БАЛЛОНЫ

Medtronic
Further, Together

ДВА РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРОДУКТА ДЛЯ ГЕРНИОПЛАСТИКИ **RELIATACK™ И SYMBOTEX™** ДАЮТ ПРОЧНОСТЬ И ПРОСТОТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА

RELIATACK™ ИЗГИБАЕМЫЙ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ ГЕРНИОСТЕПЛЕР



Преимущества с многих
точек зрения

- **Лучший доступ**
Изгибание до 65 градусов = меньше смещение сетки и перпендикулярное вхождение фиксатора^{ε,1,4}
- **Более прочная фиксация**
Резьбовой фиксатор + изгибание = высокая прочность фиксации^{†,2}
- **Экономичность**
Возможность перезарядки кассетами по 5 или 10 фиксаторов помогает избежать открывания дополнительных степлеров, а функция изгибания - дополнительных троакаров^{ε,†,1,5}

SYMBOTEX™ КОМПОЗИТНАЯ СЕТКА



Просто продумано.

- **Продуманная структура**
Уникальная 3D структура с рассасывающейся пленкой на висцеральной стороне, минимизирующая спайкообразование^{6,7,8}
- **Продуманные свойства**
Прозрачность и наличие пространственной маркировки для лучшей визуализации и размещения^{Ω,8}
- **Продуманная операция**
Оптимальная функциональность и простота использования заложены в конструкции^{6,8,9,10,11}

ε В сравнении с герниостеплером AbsorbaTack™
Ω Если сетка не обрезается (см. инструкцию)
‡ При использовании от 30 до 60 фиксаторов
† В сравнении с SecureStrap™*
и Sorbafix™*, при угле фиксации 30, 45 и 60 градусов

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩАЯ КОМБИНАЦИЯ **RELIATACK™ И SYMBOTEX™** СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА



ПРОЧНОСТЬ


Повышенная прочность
сетки и ее фиксации^{†,2,6}

- Эксклюзивная макропористая монофиламентная 3D конструкция повышает прочность сетки и обеспечивает прорастание тканями^{6,7}
- Прочный шток даже при изгибании на 65 градусов²

ПРОСТОТА

Облегчение позиционирования
и лучший доступ:^{€,1,8}

- Прозрачность сетки улучшает визуализацию анатомии при размещении⁸
- Изгибание штока степлера до 65 градусов обеспечивает перпендикулярное вхождение фиксатора⁴

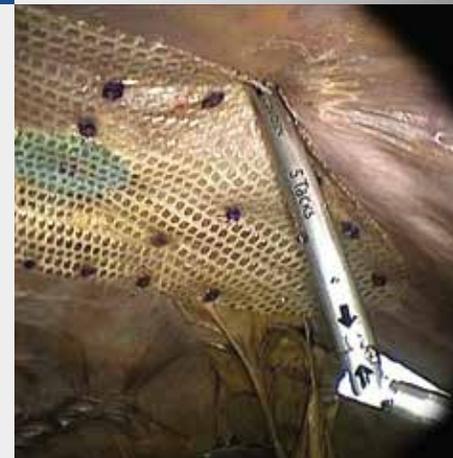

Изгибаемость и рассасывающиеся фиксаторы с винтовой насечкой дают прочную фиксацию²



Изгибаемость обеспечивает стабильность вхождения фиксаторов для достижения большей надежности².


€ В сравнении герниостеплером AbsorbaTack™
Ω В сравнении со средней прочностью фиксации SecureStrap и SorbaFix
† В сравнении с устройствами SecureStrap™* и Sorbafix™*
при угле 30, 45 и 60 градусов

КАТАЛОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

RELIATACK™ ИЗГИБАЕМЫЙ, ПЕРЕЗАРЯЩАЕМЫЙ ГЕРНИОСТЕПЛЕР 5 ММ С РАССАСЫВАЮЩИМИСЯ ФИКСАТОРАМИ

поставляется заряженным кассетой с 10 фиксаторами. В комплекте поставляются две кассеты в 10 фиксаторами каждая. Кассеты с 5 или 10 фиксаторами могут заказываться отдельно. Кассеты взаимозаменяемы и поставляются в коробках по 6 шт.

- Степлер (1) и кассеты с 10 фиксаторами (3)
КОД: RELTACK3X10

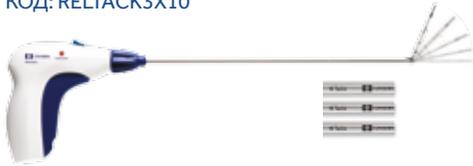

- Кассета с 5 фиксаторами
КОД: RELTACK5R



- Кассета с 10 фиксаторами
КОД: RELTACK10R



SYMBOTEX™ КОМПОЗИТНАЯ СЕТКА

доступна в широком спектре размеров, форм и модификаций для различных вариантов пластики

ВЕНТРАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИ

РАЗМЕР	КОД
9 см диаметр	SYM9
12 см диаметр	SYM12
15 см диаметр	SYM15
20 × 12 см	SYM2012E
17 × 10 см	SYM1710E
25 × 15 см	SYM2515E
34 × 20 см	SYM3420E
40 × 24 см	SYM4024E
15 × 10 см	SYM1510
20 × 15 см	SYM2015
25 × 20 см	SYM2520
30 × 20 см	SYM3020
37 × 28 см	SYM3728
42 × 32 см	SYM4232

* Чтобы заказать сетки с трансфасциальными нитями добавьте букву "F" в конце перечисленных выше кодов.

ВЕНТРАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ ОТКРЫТО

РАЗМЕР	КОД
8 см диаметр	SYM8OS
15 × 10 см	SYM1510OS
20 × 15 см	SYM2015OS
25 × 20 см	SYM2520OS
30 × 20 см	SYM3020OS



Ссылки

1. Отчет о тестировании перекрытия краев дефекта R0054140 P =0.007 (Март 2014)
 2. Отчет об измерении усилия на отрыв при перпендикулярном вхождении фиксатора ReliaTack™ R0048913 P =0.00 (Март 2014)
 3. Ценовое сравнение ReliaTack™, сравнение доступных цен ReliaTack™, SecureStrap™* и SorbaFix™* при необходимости от 30 до 60 фиксаторов
 4. Сопоставление проектных характеристик – отчет об углах изгиба R0055574 (Март 2014)
 5. Инженерная документация – отчет о тестировании надежности R0050861 (Март 2014)
 6. Композитная сетка Symbotex™ - Внутренний отчет Covidien о корреляции свойств текстиля 3DS с физиологическими и хирургическими задачами - TEX043 (Июль 2013)
 7. D. Weyhe, W. Cobb, D. Lomanto et al, Сравнительный анализ свойств серий сетчатых имплантатов на основе удельного веса и размера пор с использованием новой модели грыж у свиней - EHS 2013 (SC130037)
 8. Пре-клиническое исследование на свиньях с целью валидации проектного дизайна сетки Symbotex™ - внутренний отчет Covidien 0901CR252a (Июль 2013)
 9. Подтверждено в ходе пре-клинического исследования характеристик тканевой реакции, интеграции и предупреждения спайкообразования сеток Symbotex™ и Parietex™ Optimized Composite с использованием модели дивисцерации слепой кишки у крыс. – отчет Namsa No.162750 (Май 2013)
 10. Подтверждено в ходе пре-клинического исследования характеристик тканевой реакции, интеграции и предупреждения спайкообразования сеток Symbotex™ и Parietex™ Optimized Composite после лапароскопической пластики вентральных грыж на свиной модели – отчет Namsa no. 163005 (Май 2013)
 11. Композитная сетка Symbotex™ в сравнении конкурентными продуктами с использованием модели модели дивисцерации кишки свиньи – отчет Namsa No.163905 (Октябрь 2013)
- € В сравнении с герниостеплером AbsorbaTack™
- Ω Если сетка не обрезалась (см. инструкцию)
- В сравнении со средними показателями прочности фиксации SecureStrap™* и SorbaFix™*
- ‡ В случае если требуется от 30 до 60 фиксаторов
- † В сравнении с SecureStrap™* и SorbaFix™* при углах применения 30, 45 и 60 градусов

Medtronic



Для связи с нами, пожалуйста, пройдите по ссылке medtronic.eu/product-catalog

ВАЖНО: Полная информация о применении, противопоказаниях и предупреждениях находится внутри упаковки.

© Medtronic 2016. Все права защищены. Medtronic, логотип Medtronic logo и Further, Together являются торговыми марками компании Medtronic. Все прочие бренды являются торговыми марками компании Medtronic. 16-eu-reliatack-symbotex-combo-bro-reb-1153259

Используйте приложение для сканирования

Подробнее о продукции для лечения грыж смотрите на medtronic.eu/herniacare