

# Ambu® AuraStraight™



## Ключевые преимущества

- Усиленный наконечник устойчив к подворачиванию во время введения и входит в верхний пищеводный сфинктер
- Манжета и дыхательная трубка выполнены как единое целое для повышенной безопасности — без швов
- Поверхность имеет текстуру EasyGlide для легкости введения
- Чрезвычайно мягкая манжета обеспечивает наилучшее прилегание при наименьшем возможном давлении на слизистую
- Контрольный баллон позволяет определить размер маски и обеспечивает точные тактильные ощущения степени надувания
- Информативные метки глубины для контроля положения маски
- Пакет с цветовой маркировкой и указаниями по применению
- Доступна в 8 размерах для различных возрастных групп
- Может использоваться во время МРТ
- Не содержит фталатов

## Ambu® AuraStraight™

Ambu AuraStraight — это одноразовая ларингеальная маска, предназначенная для использования в анестезиологии и реаниматологии. Маска предоставляет пользователю дополнительный выбор и является альтернативой уже завоевавшей популярность изогнутой ларингеальной маске AuraOnce.


В отличие от других ларингеальных масок AuraStraight имеет уникальную цельнолитую конструкцию, которая обеспечивает не только идеальную консистенцию, но и отсутствие швов на дыхательной трубке или манжете.

Кроме того, AuraStraight имеет очень мягкую, тонкостенную манжету. Таким образом, прилегание маски еще лучше соответствует форме дыхательных путей, при этом давление минимально. Кроме того, усиленный наконечник и поверхность EasyGlide облегчают введение и извлечение.

Ambu AuraStraight доступна в 8 размерах (от новорожденного до крупного взрослого).

## Технические характеристики

|                                       | Младенцы                          |                                 | Дети                            |                                 | Взрослые                        |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Размер маски                          | № 1                               | № 1 1/2                         | № 2                             | № 2½                            | № 3                             | № 4                             | № 5                             | № 6                             |
| Цветовой код упаковки                 | ●                                 | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |
| Вес пациента                          | < 5 кг                            | 5–10 кг                         | 10–20 кг                        | 20–30 кг                        | 30–50 кг                        | 50–70 кг                        | 70–100 кг                       | > 100 кг                        |
| Максимальный объем наполнения манжеты | 4 мл                              | 7 мл                            | 10 мл                           | 14 мл                           | 20 мл                           | 30 мл                           | 40 мл                           | 50 мл                           |
| Максимальное давление внутри манжеты  | 60 см водн. ст.                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Коннектор дыхательной трубки          | 15 мм, ISO 5356-1                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Мин. внутренний диаметр Трубки        | 5,7 мм                            | 6,5 мм                          | 7,4 мм                          | 8,9 мм                          | 9,8 мм                          | 10,7 мм                         | 11,0 мм                         | 12,1 мм                         |
| Макс. н.д. Трубки                     | 9,6 мм                            | 11 мм                           | 12,2 мм                         | 14,4 мм                         | 16,1 мм                         | 17,6 мм                         | 19,3 мм                         | 19,5 мм                         |
| Клапан надувания                      | Луеровский наконечник (ISO 594-1) |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Допустимая температура хранения       | от +10 до +25 °C                  |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Вес                                   | 9,8 г                             | 13,6 г                          | 17,8 г                          | 27,0 г                          | 38,2 г                          | 44,9 г                          | 62,9 г                          | 69,6 г                          |
| Внутренний объем дыхательных путей    | 3,5 мл                            | 5,4 мл                          | 6,7 мл                          | 9,7 мл                          | 13 мл                           | 15 мл                           | 20 мл                           | 22 мл                           |
| Падение давления                      | < 1,5 см водн. ст. при 15 л/мин   | < 1,0 см водн. ст. при 15 л/мин | < 1,9 см водн. ст. при 30 л/мин | < 1,0 см водн. ст. при 30 л/мин | < 2,2 см водн. ст. при 60 л/мин | < 1,8 см водн. ст. при 60 л/мин | < 1,2 см водн. ст. при 60 л/мин | < 1,2 см водн. ст. при 60 л/мин |
| Мин. межзубный промежуток             | 12,8 мм                           | 15,1 мм                         | 17,1 мм                         | 20 мм                           | 23 мм                           | 25,4 мм                         | 27,4 мм                         | 28,7 мм                         |
| Внутренний канал                      | 10,9 см                           | 11,6 см                         | 14,4 см                         | 15,9 см                         | 16 мм                           | 17,1 мм                         | 18,8 мм                         | 20,4 см                         |
| <b>Специальное применение</b>         |                                   |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Макс. размер фибробронхоскопа         | 2,7 мм                            | 2,7 мм                          | 3,9 мм                          | 3,9 мм                          | 5,4 мм                          | 5,4 мм                          | 5,4 мм                          | 5,4 мм                          |

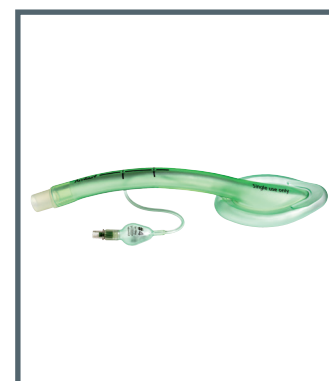

AuraStraight



AuraStraight с усиленным наконечником



AuraStraight в пакете с цветовым кодом и инструкцией по применению

## Материалы

| Изделие                      | Не содержит фталатов | Материал    |
|------------------------------|----------------------|-------------|
| Дыхательная трубка           | Да                   | ПВХ         |
| Манжета                      | Да                   | ПВХ         |
| Коннектор дыхательной трубки | Да                   | ПЭТГ        |
| Контрольный баллон           | Да                   | ПВХ         |
| Клапан надувания             | Да                   | ПВХ/силикон |
| Трубка контрольного баллона  | Да                   | ПВХ         |

В производстве Ambu AuraStraight не используется натуральный латекс.

| Упаковка | Кол-во | Материал  |
|----------|--------|---|
| Мешок    | 1      | Тупек* / полиэтилентерефталат (ПЭТ) / полиэтилен (ПЭ) |
| Коробка  | 10     | Картон  |

## Информация для заказа

| № позиции   | Размер | Тип                                      |
|-------------|--------|--|
| 324 100 000 | 1      | Одноразовая ларингеальная маска — прямая |
| 324 150 000 | 1 1/2  | Одноразовая ларингеальная маска — прямая |
| 324 200 000 | 2      | Одноразовая ларингеальная маска — прямая |
| 324 250 000 | 2 1/2  | Одноразовая ларингеальная маска — прямая |
| 324 300 000 | 3      | Одноразовая ларингеальная маска — прямая |
| 324 400 000 | 4      | Одноразовая ларингеальная маска — прямая |
| 324 500 000 | 5      | Одноразовая ларингеальная маска — прямая |
| 324 600 000 | 6      | Одноразовая ларингеальная маска — прямая |