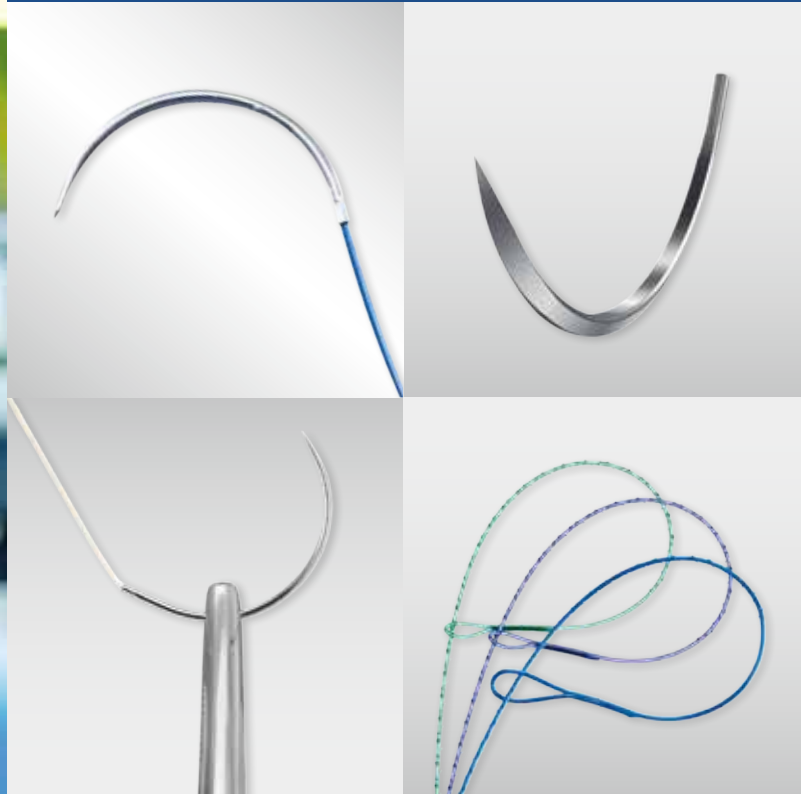




РАСХОДНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  
**ОПЕРАЦИОННОЙ**

ПОЛНЫЙ СПЕКТР  
РЕШЕНИЙ, КОТОРОМУ  
**ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ**



ШОВНЫЕ  
**МАТЕРИАЛЫ**

Каталог продукции 2018/2019

**Medtronic**  
Further. Together

# SOFSILK™

Плетёный нерассасывающийся покрытый шелк

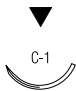
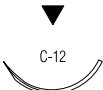
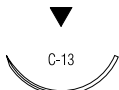



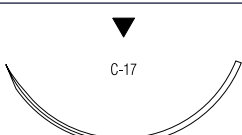
Оптимальные манипуляционные свойства.



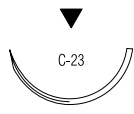
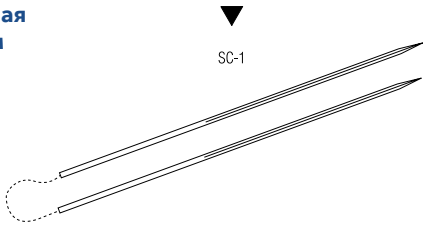
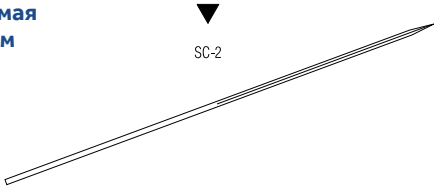
|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Описание материала</b>  | Шовный материал Sof silk™ представляет собой нерассасывающийся, стерильный, немутагенный хирургический шовный материал, состоящий из натуральных белковых шёлковых волокон - фиброин. Этот белок получают от одомашненных гусениц тутового шелкопряда Bombyx mori семейства Bombycidae. Для получения хирургического шовного материала SOFSILK™ шёлковые волокна обрабатываются для удаления серициновой смазки, отбеливаются, сплетаются. Плетёные нити равномерно покрываются силиконом или особой восковой рецептурой для снижения капиллярности и увеличения смачиваемости, обеспечивающей оптимальные манипуляционные свойства, плавное прохождение через ткани и опускание узла. |
| <b>Показания</b>           | Шовный материал Sof silk™ предназначен для сопоставления тканей и/или для лигирования, применения в общей, торакальной, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии, ортопедии и нейрохирургии.  |
| <b>Применение</b>          | Шовный материал Sof silk™ вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях, быстро инкапсулируется.  |
| <b>Срок поддержки раны</b> | Шовный материал Sof silk™ является нерассасывающимся. Деградация протеиновых волокон шелка in vivo может приводить к частичной потере прочности шовного материала со временем.   |
| <b>Стерилизация</b>        | Гамма облучение.   |
| <b>Упаковка</b>            | Шовный материал Sof silk™ выпускается белым или окрашенным в черный цвет и покрыт или силиконом, или специальной восковой рецептурой, размерами от 2 USP (5 EP) до 8-0 USP (0.4 EP). Стерильный шовный материал Sof silk™ поставляется с различными видами игл, зафиксированными перманентно или отсоединяемыми.<br>Формируется в коробках по 12,24 или 36 шт.   |

Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией из каждой индивидуальной упаковки. Внимательно изучите все показания, противопоказания, меры предосторожности и способы применения.



**ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING**

| Описание  | Размер |        | Длина (см) | Цвет   | Кол-во в упаковке | Комментарии        | Код для заказа |
|---|--------|--------|------------|--------|-------------------|--------------------|----------------|
|   | USP    | Метрик |            |        |                   |                    |                |
| <b>3/8 круга 12 мм</b><br>   | 5-0    | 1      | 45         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | S-1173         |
|   |        |        |            |        |                   |                    |                |
| <b>3/8 круга 16 мм</b><br>   | 6-0    | 0.7    | 45         | Чёрный | 36                | Покрытие силиконом | SS-681         |
|   | 5-0    | 1      | 75         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-673         |
|   | 4-0    | 1.5    | 75         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-645         |
|   | 3-0    | 2      | 75         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-745         |
| <b>3/8 круга 19 мм</b><br>   | 5-0    | 1      | 45         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-682         |
|   | 5-0    | 1      | 75         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-652         |
|   | 4-0    | 1.5    | 45         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-683         |
|   | 3-0    | 2      | 45         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-694         |
|   | 3-0    | 2      | 75         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-654         |
|   | 0      | 3.5    | 75         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-656         |
| <b>3/8 круга 24 мм</b><br> | 4-0    | 1.5    | 45         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-629         |
|   | 3-0    | 2      | 45         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-684         |
|   | 2-0    | 3      | 45         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-695         |
|   | 2-0    | 3      | 75         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-785         |
| <b>3/8 круга 26 мм</b><br> | 2-0    | 3      | 45         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-685         |
| <b>3/8 круга 30 мм</b><br> | 3-0    | 2      | 75         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-675         |
|   | 2-0    | 3      | 75         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-679         |
|   | 0      | 3.5    | 45         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-678         |
|   | 0      | 3.5    | 75         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-680         |
|   | 1      | 4      | 75         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-689         |
| <b>3/8 круга 39 мм</b><br> | 2-0    | 3      | 75         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-648         |
|   | 0      | 3.5    | 75         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-647         |
|   | 1      | 4      | 75         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-646         |
|   | 2      | 5      | 75         | Чёрный | 36                | Покрытие воском    | SS-651         |

**ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / REVERSE CUTTING**

| Описание  | Размер |        | Длина (см) | Цвет   | Кол-во в упаковке | Комментарии     | Код для заказа |
|---|--------|--------|------------|--------|-------------------|-----------------|----------------|
|   | USP    | Метрик |            |        |                   |                 |                |
| <b>1/2 круга</b><br><b>24 мм</b><br> | 3-0    | 2      | 75         | Чёрный | 36                | Покрытие воском | SS-632         |
|   | 2-0    | 3      | 75         | Чёрный | 36                | Покрытие воском | SS-633         |
| <b>Прямая</b><br><b>51 мм</b><br>    | 2-0    | 3      | 75         | Чёрный | 36                | Покрытие воском | SS-523         |
| <b>Прямая</b><br><b>60 мм</b><br>    | 2-0    | 3      | 75         | Чёрный | 36                | Покрытие воском | SS-623         |
|   | 2-0    | 3      | 100        | Чёрный | 36                | Покрытие воском | SS-723         |
|   | 0      | 3.5    | 75         | Чёрный | 36                | Покрытие воском | SS-624         |

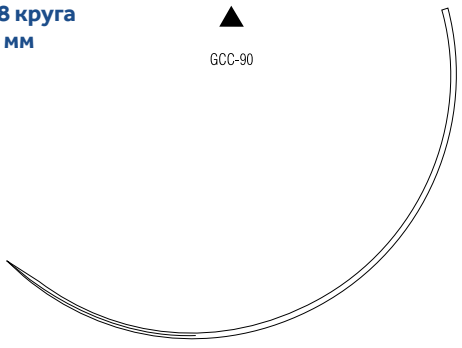
**КОСМЕТИЧЕСКАЯ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / COSMETIC REVERSE CUTTING**

| Описание  | Размер |        | Длина (см) | Цвет   | Кол-во в упаковке | Комментарии                      | Код для заказа |
|---|--------|--------|------------|--------|-------------------|----------------------------------|----------------|
|   | USP    | Метрик |            |        |                   |                                  |                |
| <b>3/8 круга</b><br><b>11 мм</b><br> | 6-0    | 0.7    | 45         | Чёрный | 36                | Surgalloy™<br>Покрытие силиконом | SS-5639        |
| <b>3/8 круга</b><br><b>13 мм</b><br> | 5-0    | 1      | 45         | Чёрный | 36                | Surgalloy™<br>Покрытие воском    | SS-5640        |

**ПРЕМИУМ ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ / PREMIUM POINT REVERSE CUTTING**

| Описание  | Размер |        | Длина (см) | Цвет   | Кол-во в упаковке | Комментарии     | Код для заказа |
|---|--------|--------|------------|--------|-------------------|-----------------|----------------|
|   | USP    | Метрик |            |        |                   |                 |                |
| <b>3/8 круга</b><br><b>13 мм</b><br> | 4-0    | 1.5    | 45         | Чёрный | 12                | Покрытие воском | S-1789-K       |


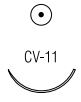
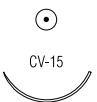
## РЕЖУЩАЯ / CONVENTIONAL CUTTING

| Описание  | Размер |        | Длина (см) | Цвет   | Кол-во в упаковке | Комментарии     | Код для заказа |
|---|--------|--------|------------|--------|-------------------|-----------------|----------------|
|   | USP    | Метрик |            |        |                   |                 |                |
| <b>3/8 круга<br/>90 мм</b><br> | 2-0    | 3      | 100        | Чёрный | 36                | Покрытие воском | CS-791         |
|   | 0      | 3.5    | 100        | Чёрный | 36                | Покрытие воском | CS-792         |
|   | 1      | 4      | 100        | Чёрный | 36                | Покрытие воском | CS-793         |
|   | 2      | 5      | 100        | Чёрный | 36                | Покрытие воском | CS-794         |

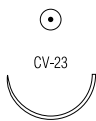
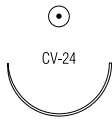
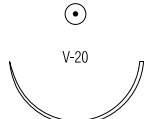

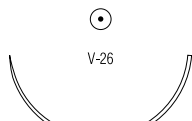

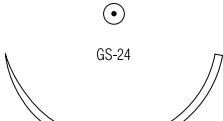
## ПРЕМИУМ ШПАТЕЛЬ / PREMIUM SPATULA

| Описание   | Размер |        | Длина (см) | Цвет   | Кол-во в упаковке | Комментарии                      | Код для заказа |
|--|--------|--------|------------|--------|-------------------|----------------------------------|----------------|
|  | USP    | Метрик |            |        |                   |                                  |                |
| <b>3/8 круга<br/>6.3 мм</b><br> | 8-0    | 0.4    | 45         | Чёрный | 12                | Surgalloy™<br>Покрытие силиконом | S-1734-K       |

## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

| Описание  | Размер |        | Длина (см) | Цвет   | Кол-во в упаковке | Комментарии                      | Код для заказа |
|---|--------|--------|------------|--------|-------------------|----------------------------------|----------------|
|   | USP    | Метрик |            |        |                   |                                  |                |
| <b>3/8 круга<br/>9 мм</b><br>  | 7-0    | 0.5    | 45         | Чёрный | 36                | Surgalloy™<br>Покрытие силиконом | VS-809         |
| <b>3/8 круга<br/>13 мм</b><br> | 6-0    | 0.7    | 75         | Чёрный | 36                | Surgalloy™<br>Покрытие силиконом | VS-889         |
|   | 5-0    | 1      | 75         | Чёрный | 36                | Surgalloy™<br>Покрытие воском    | VS-890         |
| <b>3/8 круга<br/>17 мм</b><br> | 4-0    | 1.5    | 75         | Чёрный | 36                | Surgalloy™<br>Покрытие воском    | VS-881         |
|   | 3-0    | 2      | 75         | Чёрный | 36                | Surgalloy™<br>Покрытие воском    | VS-882         |

## КОЛЮЩАЯ / TAPER POINT

| Описание  | Размер | Длина (см) | Цвет | Кол-во в упаковке | Комментарии | Код для заказа                |         |
|---|--------|------------|------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------|
|   |        |            |      |                   |             |                               | USP     |
| <b>1/2 круга<br/>17 мм</b><br>   | 4-0    | 1.5        | 75   | Чёрный            | 36          | Surgalloy™<br>Покрытие воском | VS-871  |
|   | 3-0    | 2          | 75   | Чёрный            | 36          | Surgalloy™<br>Покрытие воском | VS-872  |
| <b>1/2 круга<br/>20 мм</b><br>   | 4-0    | 1.5        | 75   | Чёрный            | 36          | Surgalloy™<br>Покрытие воском | GS-451  |
|   | 3-0    | 2          | 75   | Чёрный            | 36          | Surgalloy™<br>Покрытие воском | GS-452  |
| <b>1/2 круга<br/>26 мм</b><br>   | 3-0    | 2          | 75   | Чёрный            | 36          | Покрытие воском               | GS-832  |
|   | 2-0    | 3          | 5x45 | Чёрный            | 24          | D-Tach™<br>Покрытие воском    | GS-62-M |
|   | 2-0    | 3          | 75   | Чёрный            | 36          | Покрытие воском               | GS-833  |
|   | 0      | 3.5        | 75   | Чёрный            | 36          | Покрытие воском               | GS-834  |
| <b>1/2 круга<br/>30 мм</b><br>   | 3-0    | 2          | 75   | Чёрный            | 36          | Покрытие воском               | GS-822  |
|   | 2-0    | 3          | 75   | Чёрный            | 36          | Покрытие воском               | GS-823  |
|   | 0      | 3.5        | 75   | Чёрный            | 36          | Покрытие воском               | GS-824  |
| <b>1/2 круга<br/>37 мм</b><br> | 0      | 3.5        | 75   | Чёрный            | 36          | Покрытие воском               | VS-844  |
|   | 1      | 4          | 75   | Чёрный            | 36          | Покрытие воском               | VS-845  |
|   | 2      | 5          | 75   | Чёрный            | 36          | Покрытие воском               | VS-846  |
| <b>1/2 круга<br/>37 мм</b><br> | 2-0    | 3          | 75   | Чёрный            | 36          | Покрытие воском               | CS-423  |
|   | 0      | 3.5        | 75   | Чёрный            | 36          | Покрытие воском               | CS-424  |
| <b>1/2 круга<br/>40 мм</b><br> | 2      | 5          | 75   | Чёрный            | 36          | Покрытие воском               | CS-575  |