

smiths medical
level 1



Прибор для обогрева пациента и одеяла Snuggle Warm®

Тихо. Просто. Безопасно.



ПРИБОР ДЛЯ КОНВЕКЦИОННОГО ОБОГРЕВА ПАЦИЕНТА И ОДЕЯЛА SNUGGLE WARM® ТИХО. ПРОСТО. БЕЗОПАСНО.

В состав нашей системы конвекционного обогрева входят высокопоточный конвекционный обогреватель с регулировкой температуры на конце шланга, согревающее одеяло и принадлежности.

Конвекционный обогреватель всасывает воздух с температурой окружающей среды через воздушный фильтр HEPA. Отфильтрованный воздух нагревается до выбранной температуры.

Нагретый воздух поступает через шланг в конвекционное согревающее одеяло и распределяется по нему через специальные каналы. Перфорация на одеяле со стороны пациента обеспечивает мягкое рассеивание теплого воздуха над пациентом.

Предохранительный контур является независимым средством отключения, которое прекращает подачу питания на нагреватель, что позволяет уберечь пациентов от воздействия чрезмерно высоких температур. Вы можете непрерывно контролировать состояние пациента благодаря специальным сигналам тревоги, срабатывающим при превышении и понижении температуры от каждого температурного режима.

ШУМ В
ОПЕРАЦИОННОЙ
МОЖЕТ СТАТЬ
ПРИЧИНОЙ
КОММУНИКАТИВНЫХ
ОШИБОК.¹



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



Безопасность



Договор на
обслуживание



Низкий
уровень шума

Тихо

Хирургическая операция всегда сопряжена со стрессом; наш конвекционный обогреватель предназначен для того, чтобы вы и ваши пациенты чувствовали себя комфортно до, во время и после операции.

- Уровень шума нашего прибора ниже 42дБА

Просто

Отсутствие необходимости в проведении калибровки и интуитивно понятный дизайн позволяют вам сконцентрироваться на поддержании нормальной температуры тела пациента.

- Обеспечение нормотермии одним нажатием кнопки

Безопасно

Возможность установить точную температуру при использовании нашего прибора позволяет обеспечить безопасность и комфорт пациента.


- Точные настройки температуры в пределах +/- 1°C
- Оповещения о превышении температуры для каждого заданного температурного режима (37°C, 40°C и 43°C)

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА В БОЛЬНИЦЕ
МОЖЕТ НЕГАТИВНО
ВЛИЯТЬ НА
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПАЦИЕНТОВ И
ПЕРСОНАЛА.²

Одеяла Snuggle Warm®

Мы предлагаем широкий выбор согревающих одеял для удовлетворения самых различных потребностей. На протяжении всего периоперационного периода наши одеяла демонстрируют надежность, способствуя более быстрому выздоровлению пациента. Одеяла Snuggle Warm®:

- Изготовлены из мягкого, похожего на ткань, непромокаемого материала, устойчивого к разрывам и проколам
- Разработаны в соответствии с потребностями пациента
- Оснащены точно расположенными вентиляционными отверстиями и специально разработанным каналом для максимальной подачи тепла
- *Не содержат латекс, рентгенопрозрачны

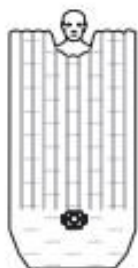


SWU-2001

Полное укрывное



SWU-2002

Детское полное укрывное

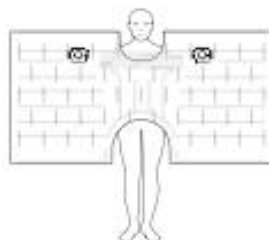


SWU-2003

Верхнее укрывное



SWU-2004

Нижнее укрывное

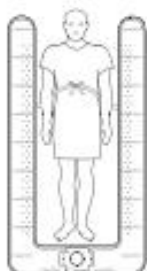

SWU-2007

Трубчатое




SWU-2008

Стерильное
кардиохирургическое



SWU-2009

Детское подкладное

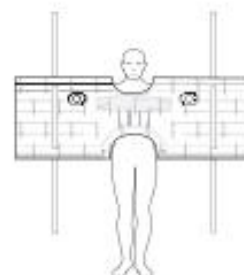


SWU-2010

Верхнее малое



SWU-2011

Большое детское
подкладное

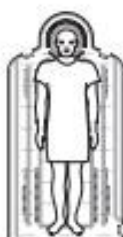

SWU-2013

Взрослое подкладное




SWU-2013

Взрослое подкладное с
прорезями для рук




SWU-2014L

С левым боковым доступом

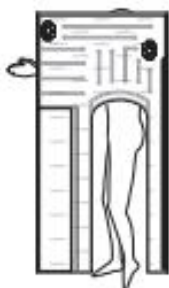


SWU-2014R

С правым боковым доступом

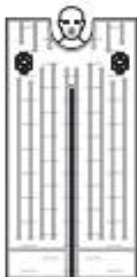


SWU-2016

Полное с раздельным
доступом

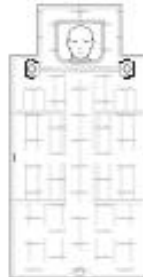

SWU-2018

С множественным доступом

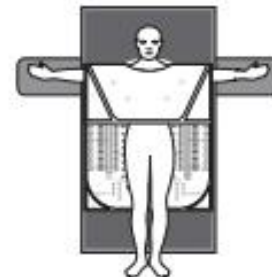

SWU-2019

Комбинированное «пончо» с
прорезями для рук

Информация для заказа

Convective Warmer		
Product Code	Description	Units per Case
L1-CW-100V	100V, 50/60 Hz	1
L1-CW-120V	110-127V, 50/60 Hz	1
L1-CW-220V	220-240V, 50/60 Hz	1
L1-Hose	Replacement L1-CW Hose	1
L1-Cart	Cart/Trolley	1
L1-Shelf	Cart/Trolley Storage Shelf	1
L1-Filter	Replacement L1-CW Filter	10
L1-Clamp	IV Pole Clamp	1

Convective Warmer Power Cord/Sheet Clip/Cord Wrap		
Product Code	Description	Units per Case
L1-PWR-ARG	Argentina	1
L1-PWR-B	Americas	1
L1-PWR-BR1	Brazil	1
L1-PWR-I-China	China and Mongolia	1
L1-PWR-H	Israel	1
L1-PWR-I	ANZ	1
L1-PWR-J	Switzerland	1
L1-PWR-JP	Japan	1
L1-PWR-K	Denmark and Bangladesh	1
L1-PWR-KOR	South Korea	1
L1-PWR-L	Chile and Italy	1
L1-PWR-M	India, Pakistan, Sri Lanka	1
L1-PWR-THA	Thailand	1
L1-PWR-ZAF	South Africa	1
L1-PWR-EU	CE 7/7 style, includes multi-lingual printed manual	1
L1-PWR-G	UK style, includes English printed manual	1
SC-5000	Replacement sheet clip	1
CW-5000	Replacement cord wrap	1

Snuggle Warm® Blankets			
Product Code	Description	Size (cm/in)	Units per Case
SWU-2001	Adult Full Body Blanket	102x203/40x80	10
SWU-2003	Adult Upper Body Blanket	203x102/80x40	10
SWU-2004	Lower Body Blanket	102x163/40x64	10
SWU-2007	Tube Blanket	58x175/28x69	10
SWU-2008	Sterile Cardiac Blanket	102x163/40x64	10
SWU-2010	Small Upper Body Blanket	203x76/80x30	10
SWU-2013	Adult Underbody Blanket	102x203/40x80	10
SWU-2113	Adult Underbody Blanket – with arm openings	102x203/40x80	10
SWU-2014L	Left Lateral Access Blanket	102x203/40x80	10
SWU-2014R	Right Lateral Access Blanket	102x203/40x80	10
SWU-2016	Full Body Split Access Blanket	102x203/40x80	10
SWU-2018	Multi-Access Blanket	102x203/40x80	10
SWU-2119	Poncho Blanket with Arm Openings	102x164/40x64.5	10
SWU-2002	Pediatric Fully Body Blanket	102x146/40x58	10
SWU-2009	Pediatric Underbody Blanket	66x114/26x45	10
SWU-2011	Large Pediatric Underbody Blanket	102x136/40x53	10

References

- Mazer, S. Creating a Culture of Safety Reducing Hospital Noise; Biomedical Instrumentation & Technology Sept/Oct 2012.
- AORN Position Statement on Managing Distractions and Noise During Perioperative Patient Care

For more information visit our website at www.smiths-medical.com

PRODUCT(S) DESCRIBED MAY NOT BE LICENSED OR AVAILABLE FOR SALE IN CANADA AND OTHER COUNTRIES

Smiths Medical International
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford Kent, TN25 4BF
Tel: +44 (0)845 850 0445
www.smiths-medical.com

Find your local contact information at: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

Smiths Medical is part of the global technology business Smiths Group plc. Please see the Instructions for Use/Operator's Manual for a complete listing of the indications, contraindications, warnings and precautions. Snuggle Warm, Level 1 and the Smiths Medical design mark are trademarks of Smiths Medical. All other names and marks mentioned are the trademarks or service marks of their respective owners. The symbol ® indicates the trademark is registered in the U.S. Patent and Trademark Office and certain other countries. ©2018 Smiths Medical. All rights reserved. TM1948980B-082018

MPAUC-1708

Rx CE
ONLY 0086

smiths medical