

CF5/CF8
Фетальный монитор

Каждый удар важен

COMEN Поделись с миром



CF5

CF8



**«Шэньчжэнь Комен Медикал Инструменты Ко., Лтд.»
(Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.)**
«Шэньчжэнь Комен Медикал Инструменты Ко., Лтд.» (Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.)
Адрес: Этаж 10, этаж 11 и секция С этажа 12 здания 1А и с этажа 1 по этаж 5 Здание 2, FIYTA Таймпис
Билдинг, проспект Наньхуан, подрайон Матин, район Гуанмин, Шэньчжэнь, Гуандун, 518106, КНР
Тел: +86-755-2643 1236 Факс: +86-755-2643 1232 Веб-сайт: rus.comen.com E-mail: info@szcomen.com
P/N: RU-CF5/CF8-10P-20240528-V1.0

Оптимизация пользовательского опыта в передовых системах фетального мониторинга


Несколько вариантов отображения

Благодаря трем различным экранам мониторинга - материнский и фетальный, фетальный и материнский - пользователи могут быстро переключаться между интерфейсами с помощью интуитивно понятного сенсорного управления. Это позволяет медперсоналу оценивать физиологические параметры матери и одновременно следить за состоянием плода.




Мягкий и простой дизайн

Использование теплых цветовых параметров, нескольких цветовых режимов позволяет создать более теплый пользовательский интерфейс и уменьшить беспокойство медицинского персонала.

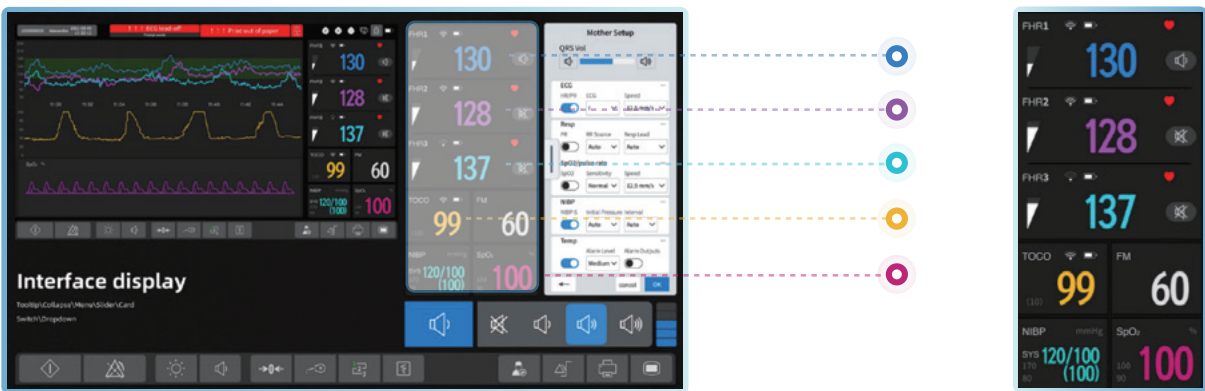


Переключение интерфейса

Сочетать больше техник взаимодействия, таких как скольжение двумя пальцами и скольжение по краю страницы, которые больше похожи на мобильные устройства. Это может повысить производительность пользователя на 50 % и побудить пользователя исследовать более легко.

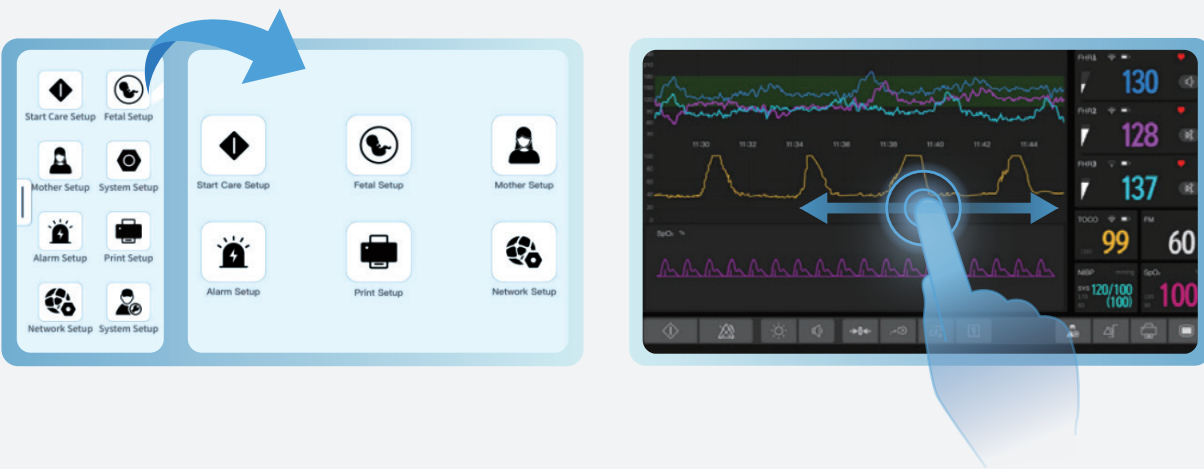

Несколько вариантов пользовательского интерфейса

Несколько вариантов пользовательского интерфейса: Поддерживаются настраиваемые параметры и цвета отображения осциллограмм, причем на выбор пользователя предлагаются два цветовых стиля интерфейса. Обеспечивая разнообразие визуальных впечатлений и гарантируя четкое отображение при любых обстоятельствах, медицинские работники получают максимальное удобство использования и комфорт в работе.

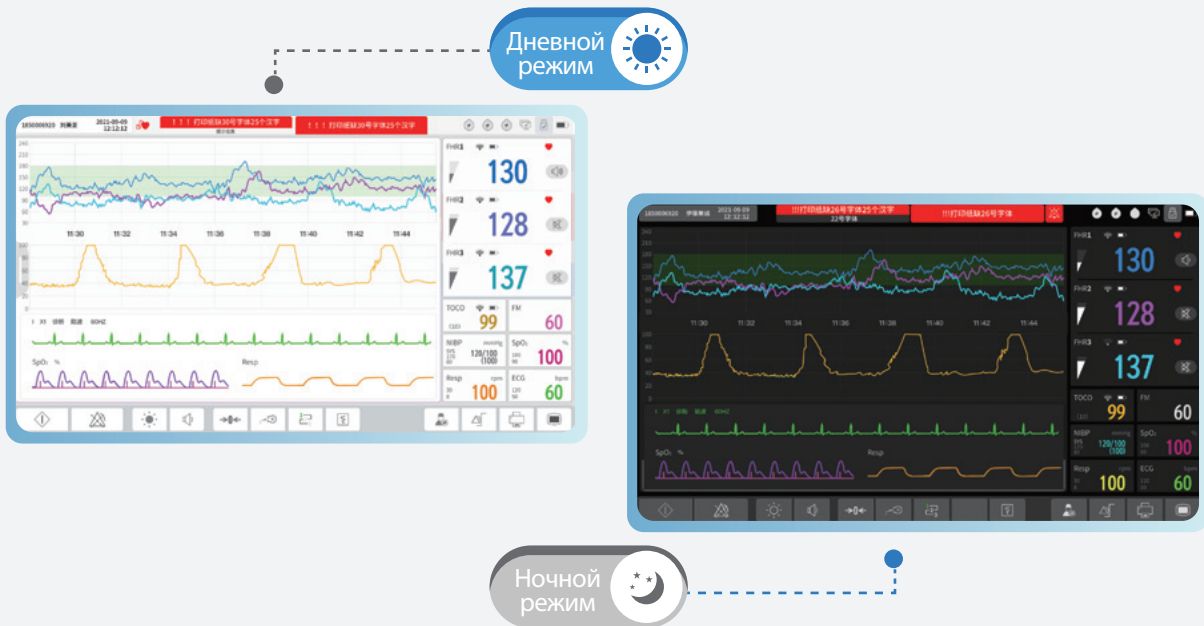

Расширенная стабильность: Расширенные функции для оптимизированного мониторинга

Мониторинг состояния плода и матери

Передовые алгоритмы

Алгоритмы, снижающие вероятность ложных срабатываний, вызванных движениями плода, обеспечивая точный мониторинг.



Система оценки КТГ

Выбрать один из семи критериев оценки - KREBS, Fischer, Modified Fischer, NST, NST Report, NST Three-level Sorts Report и Oxford - для комплексной оценки.



Индикатор сигналов сердца плода

Трехуровневая индикация уровня сигнала позволяет быстро обнаружить сигналы сердца плода и отрегулировать положение датчика для оптимального качества измерений.



Измерение материнских параметров

Мониторинг параметров матери, включая ЭКГ, SpO2, НИАД, Дыхание и ТЕМП, наряду с мониторингом плода для комплексного ухода.




12-кристальный преобразователь

12-кристальный преобразователь CF5R и CF8R повышает чувствительность и стабильность, обеспечивая высококачественный мониторинг даже в сложных условиях.




Экранирующая крышка

Экранирующая крышка на основных цепях может повысить помехоустойчивость датчика для обеспечения стабильности сигнала и высокого качества обнаружения ЧССП.

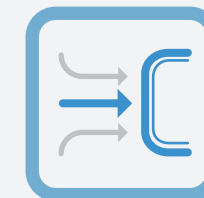

Микросхема 24-битного АЦП

Микросхема 24-битного аналого-цифрового преобразователя позволяет легче улавливать сильные и слабые аналоговые сигналы, что делает результаты сбора более точными.

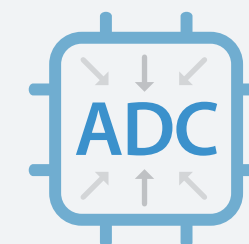

Повышенная гибкость с инновационной системой беспроводных датчиков

Передовая технология беспроводных датчиков революционизирует мониторинг плода, обеспечивая непревзойденное удобство и гибкость.



Долговечная водонепроницаемость

Имеет класс водонепроницаемости IP68, что позволяет использовать его для подводных работ без ущерба для производительности.



Структура держателя датчика

Способы подвешивания и отсоединения просты для понимания и эксплуатации. При подвешивании и вытаскивании сила прикладывается умеренная, и при этом раздается звук "щелчок", по которому можно определить, на месте ли штекер.



Бесшовная интеграция




Беспроводные датчики обеспечивают медицинского персонала с аккуратным рабочим местом. Кроме того, это позволяет снизить нагрузку на организацию кабелей и повысить эффективность работы. Для беременных беспроводной мониторинг может повысить комфорт и гибкость, ограниченные шнурами.



Удобные транспортировки

Беспроводной датчик оснащен функцией сохранения данных при отключении питания в течение не менее 10 минут, что обеспечивает непрерывность сохранения данных мониторинга. Таким образом, он позволяет легко переходить из предродовой палаты в родильный зал без необходимости смены датчиков. Когда беспроводной датчик переносится в родильный зал из предродовой палаты, он подключается к новому фетальному монитору и загружает данные в новый аппарат.

● Беспроводной датчик

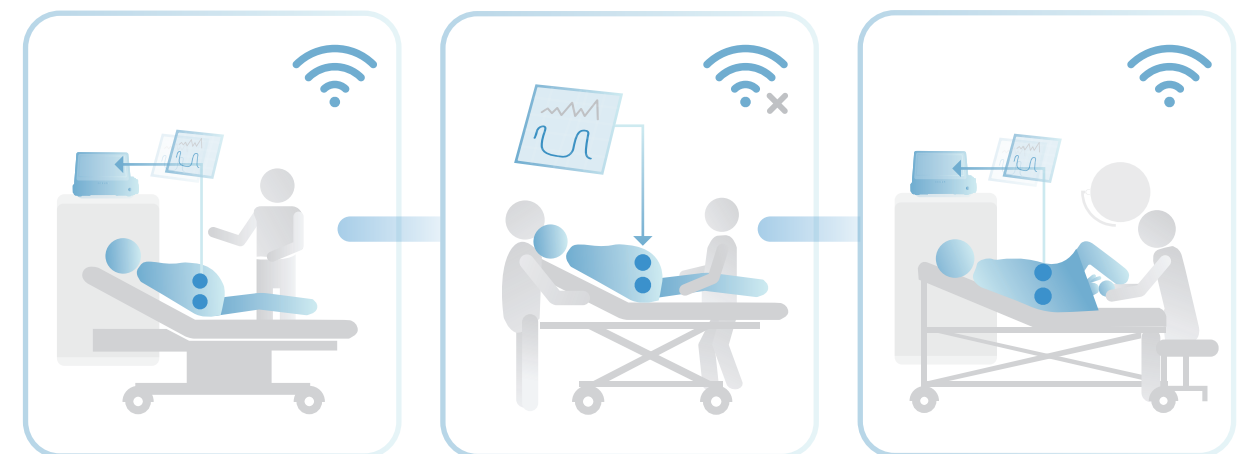

Дородовая палата

Транспортировка


Комната для родов

Упрощать работу

Удобное управление данными и гибкая передача

Длительный срок службы батареи

Оснащенные встроенным аккумулятором высокой емкости, эти мониторы могут работать в течение длительного времени, не требуя источника питания.

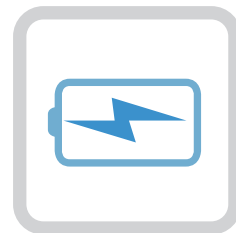

Большой экран с регулируемым углом обзора

Опыт беспрецедентной универсальности с огромным экраном, регулируемым углом обзора и стабильной осью, удовлетворяя разнообразные потребности в мониторинге для медицинских работников.



Скрытая конструкция ручки

Сочетание функциональности и эстетика, скрытая ручка обеспечивает удобство переноски, сохраняя при этом элегантный внешний вид.



CF5



CF8

Ввод данных о пациенте с помощью сканера

Упростите ввод данных о пациенте благодаря совместимости со сканером совместимости.

Универсальные возможности печати

Встроенные или внешние сетевые принтеры обеспечивают удобный вывод данных.

Эффективное хранение данных

Автоматически сохраняя данные о пациенте каждые 10 минут, монитор обеспечивает бесперебойное ведение записей. С возможностью хранения до 24 часов данных на одну запись, CF5R и CF8R гарантируют комплексное управление данными.


LIS

HIS

PACS

EMR

Госпитальная сеть

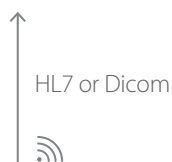

CF5



CF8

Разблокировать мощь беспроводной передачи данных и интеграции с фетальными мониторами серии CF. Усовершенствуйте свой клинический рабочий процесс и расширьте возможности для комплексного ухода за пациентами.