

Medtronic



Хирургическая энергия

Каталог продукции 2025-2026

Компания Medtronic - мировой лидер в создании энергетических систем для хирургии - стремится предоставить пользователям полную линейку продукции для максимально безопасной и эффективной работы в операционной.

Мы предлагаем полный спектр радиочастотной энергетической продукции - электрохирургические платформы (коагуляторы и лигирующие генераторы), электрохирургические держатели и активные электроды, возвратные электроды пациента, пинцеты, кабели и переходники. Наши комплексные системы устанавливают отраслевой стандарт хирургического лечения пациентов и экономической эффективности.

Система электролигирования (заваривания) сосудов LigaSure является эталонной в отрасли, и сопровождается наиболее широким набором необходимых принадлежностей.

Хирургический ультразвук представлен вторым поколением единственной в мире беспроводной портативной системы Sonicision для диссекции тканей и остановки кровотечений из сосудов до 5 мм.

Для абляции очаговых образований в паренхиматозных органах и костях предлагаются две технологии - собственно радиочастотная (Cool-Tip серии E) и микроволновая радиочастотная (Emprint) системы.



Содержание

Электрохирургические генераторы и принадлежности

Генераторы

Платформа энергетическая серии FT Valleylab FT10

Платформа энергетическая серии FX Valleylab FX8

Аппарат для удаления хирургического дыма RapidVac

Генератор системы радиочастотной абляции Cool-Tip серии E

Генератор для микроволновой (СВЧ) абляции Emprint

Наборы активации функций к энергетической платформе Force Triad

Принадлежности для режимов биполярной резекции

Педали (ножные переключатели)

Тележки и транспортные модули

Инструменты LigaSure для электролигирования сосудов и система ультразвуковой диссекции Sonicision Curved Jaw

Инструменты LigaSure с нанопокрытием и без него

Диссектор Sonicision беспроводной ультразвуковой с изогнутыми
браншами - компоненты системы

Устройство для тонзиллэктомии BiZact, усовершенствованный биполярный инструмент

Устройство для тонзиллэктомии BiZact

Инструменты для электрохирургии монополярные

Ручки (держатели электродов) электрохирургические

Монополярные электроды

Электроды с антипригарным EDGE-покрытием

Электроды-иглы микрохирургические вольфрамовые POINT

Гинекологические электроды LLETZ, LEEP

Электроды из нержавеющей стали

Электроды монополярные многоразовые

Лапароскопические электроды одноразовые

Лапароскопические электроды с покрытием Cleancoat

Инструмент и электроды лапароскопические полые Opti⁴

Пластины пациента (возвратные или рассеивающие электроды)

Кабели для пластин пациента многоразовые

Кабели монополярные и переходники к ним

Инструменты для электрохирургии биполярные

Пинцеты биполярные с управлением педалью, многоразовые

Кабели биполярные

Содержание

Оборудование и инструменты для удаления дыма

Аппарат для удаления хирургического дыма RapidVac и принадлежности

Оборудование и инструменты для термоабляции очаговых образований и проводящих путей

Оборудование для РЧА - генератор системы радиочастотной абляции Cool-Tip серии E и принадлежности

Оборудование для микроволновой абляции - аппарат для СВЧ-абляции Emprint и принадлежности

Оборудование для торакоскопической изолирующей РЧА при фибрилляции предсердий - платформа энергетическая серии FT Valleylab FT10 и принадлежности

Указатели

Указатели кодов

Электрохирургические генераторы и принадлежности



Электрохирургические генераторы и принадлежности

Регистрационные удостоверения:

Платформа энергетическая серии FT Valleylab FT10 с принадлежностями, РЗН 2017/5614 от 19 февраля 2024

Платформа энергетическая серии FX Valleylab FX8, РЗН 2019/8046 от 30 января 2024

Аппараты электрохирургические с принадлежностями, ФСЗ 2011/10147 от 09 июля 2020

Аппарат электрохирургический высокой мощности с принадлежностями, РЗН 2019/8752 от 19 января 2023

Генератор системы радиочастотной абляции Cool Tip серии E с принадлежностями, ФСЗ 2012/13093 от 21 декабря 2022

Комплекс аппаратов для микроволновой (или СВЧ) абляции с принадлежностями, ФСЗ 2011/10148 от 18 января 2023

Диссектор Sonicision беспроводной ультразвуковой с изогнутыми браншами с принадлежностями, РЗН 2020/9858 от 03 апреля 2020

Аппарат для удаления хирургического дыма RapidVac с принадлежностями, ФСЗ 2011/09932 от 29 сентября 2021

Электрохирургические генераторы и принадлежности

Генераторы



Платформа энергетическая Valleylab FT10

Платформа энергетическая серии FT Valleylab FT10 поддерживает работу всех электрохирургических инструментов компании. Генератор Valleylab FT10 работает эффективнее прежних аппаратов компании, увеличив скорость электролигирования, качество рассечения тканей, и доставляя точное количество энергии для достижения оптимального хирургического эффекта.

VLFT10GEN

1 штука

- Простота настроек с минимумом манипуляций
 - Последнее поколение системы электролигирования LigaSure
 - Система TissueFect сканирует сопротивление ткани и адаптирует характеристики подаваемой энергии 434,000 раз в секунду
 - Автоматическое распознавание инструментов
 - Поддерживает все актуальные инструменты LigaSure
 - Один сенсорный экран с интуитивно понятным управлением
 - Система обновления программного обеспечения Valleylab Exchange
 - Уникальный режим Valleylab с оптимальным сочетанием диссекции с гемостазом
 - Адаптивная система REM* для рассеивающих электродов
 - Аутобиполярная функция для всех биполярных режимов
 - Встроенный режим биполярной резекции с улучшенными характеристиками рассечения. Кабели для ректоскопов K.Storz и R.Wolf
 - Возможность использования для эпикардиальной РЧ абляции при фибрилляции предсердия специальными биполярными и монополярными инструментами
 - Монополярный режим Soft Coag (Мягкая Коагуляция)
- Вес (кг): 10.1
Ширина (см): 36.8
Высота (см): 17.8
Глубина (см): 46.2

Электрохирургические генераторы и принадлежности

Генераторы



Платформа энергетическая Valleylab FX8

Новейший электрохирургический генератор в семействе коагуляторов Valleylab. Платформа Valleylab FX8 имеет интеллектуальную систему опроса тканей TissueFect, которая подстраивает характеристики энергии в соответствии с меняющимся сопротивлением тканей для поддержания оптимального эффекта и безопасности для пациента.

VLFX8GEN

1 штука

- Система TissueFect определяет сопротивление ткани 434,000 раз в секунду
- Автоматическое распознавание инструментов
- Один сенсорный экран с интуитивно понятным управлением
- Адаптивная система REM для рассеивающих электродов
- Эксклюзивная система обновления ПО Valleylab Exchange
- Уникальный режим Valleylab с оптимальным сочетанием диссекции с гемостазом
- Автоматическая адаптация мощности минимизирует время настройки аппарата перед и во время операции
- Аутобиполярная функция для всех биполярных режимов
- Монополярный режим Soft Coag (Мягкая Коагуляция)

Вес (кг): 8.8

Ширина (см): 33.5

Высота (см): 14.6

Глубина (см): 43.6

Электрохирургические генераторы и принадлежности

Генераторы



- Удаляет дым, возникающий при работе электрокоагуляторов и лазеров
- Синхронизируется с энергетическими платформами Valleylab с помощью кабеля SEA3730
- Пять уровней мощности всасывания воздуха плюс турборежим
- Максимальный объем фильтрации 1,25 м3/мин
- Не требует префильтров или переходников для дымоотводных трубок

Вес (кг): 9,9

Ширина (см): 36

Высота (см): 20,5

Глубина (см): 48

Аппарат для удаления хирургического дыма RapidVac

Применяется с электрохирургическими генераторами и хирургическими лазерами. Используется с фильтром SEA3700 (поставляется отдельно).

SE3695

1 штука

Электрохирургические генераторы и принадлежности

Генераторы



Генератор системы радиочастотной абляции Cool-Tip серии E

Радиочастотная абляция – это современный метод хирургического лечения очаговых образований в паренхиматозных органах и костях. Система может применяться для воздействия на опухолевые очаги в печени, почках, легких, надпочечниках, щитовидной железе, матке, костях. Линейный прогрев тканей солидного органа электродами для радиочастотной абляции позволяет выполнить бескровную резекцию печени, почки или селезенки. Простая игольчатая форма электродов и их водяное охлаждение позволяет быстро создать требуемый объем коагулята, а возможность одновременного использования 2-3 электродов сокращает время и увеличивает эффективность процедуры. Радиочастотная абляция в настоящее время является одним из самых широко используемых и экономически-эффективных способов интерстициальной терапии в онкологии.

- Шесть режимов работы
- Возможность подключения от 1 до 3 активных электродов
- Возможность использования дистанционного термозонда
- Русифицированный интерфейс

Ширина (см): 45,7

Высота (см): 25,4

Глубина (см): 50,8

RFAGEN

1 штука

Электрохирургические генераторы и принадлежности

Генераторы



Генератор для микроволновой (СВЧ) абляции Emprint

Излучение сверхвысокой частоты является еще одним диапазоном радиочастотного спектра. Другое его название – микроволны. Благодаря малой длине волны и отсутствию необходимости в замкнутой электрической цепи, микроволновая абляция имеет преимущества перед РЧА при работе у крупных сосудов, в скорости формирования и величине коагулята. Особенности технологических решений компании-производителя позволили создавать практически шарообразные коагуляты в печени и легких, вместо традиционно веретенообразных. Технология получила название термосферической.

- Технология Thermosphere™
- Выходная частота 2,45 ГГц
- Охлаждаемые излучающие антенны
- Возможность использования дистанционного термозонда

Ширина (см): 30

Высота (см): 9

Глубина (см): 30

Вес (кг): 4,5

CAGEN1

1 штука

Принадлежности к электрохирургическим генераторам

Наборы активации функций к энергетической платформе Force Triad



Набор активации биполярной резекции для энергетической платформы Force Triad

Применяется только для электрохирургического аппарата Force Triad

FTBRKIT

1 штука



Набор активации дистанционного управления для энергетической платформы Force Triad

Применяется только для электрохирургического аппарата Force Triad с версией ПО 3.4 и выше. После активации программы энергетическая платформа может быть подключена к системе, имеющей единый центр управления аудио, видео и коммуникационными устройствами.

FTCKKIT

1 штука



Стартовый пакет для резектоскопов K.Storz

Пакет применяется только с энергетической платформой Force Triad

- Комплект активации биполярной резекции FTBRKIT
- Педаль FT6009 для биполярной резекции
- Кабель FT0021S для биполярной резекции к резектоскопам K.Storz

STORZBRSET

1 штука



Стартовый пакет для резектоскопов R.Wolf

Пакет применяется только с энергетической платформой Force Triad

- Комплект активации биполярной резекции FTBRKIT
- Педаль FT6009 для биполярной резекции
- Кабель FT0022W для биполярной резекции к резектоскопам R.Wolf

WOLFBRSET

1 штука

Принадлежности к электрохирургическим генераторам

Принадлежности для режимов биполярной резекции



Кабель для биполярной резекции K.Storz

Для использования с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10

- Используется с биполярными резектоскопами K.Storz
- Многоразовый
- Длина 4.6 м

FT0021S

1 штука



Педаль для биполярной резекции

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10

- Активирует режимы биполярной резекции – рассечение и коагуляцию в физиологическом растворе
- Кабель 4.6 м

FT6009

1 штука



Кабель для биполярной резекции R.Wolf

Для использования с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10

- Используется с биполярными резектоскопами R.Wolf
- Многоразовый
- Длина 4.6 м

FT0022W

1 штука

Принадлежности к электрохирургическим генераторам

Педали (ножные переключатели)



Педаль монополярная

Совместима с коагуляторами производства Valleylab / Covidien серий Force, FT и FX

- Кабель 4.6 м

E6008L

1 штука



Педаль лигирующая биполярная

Совместима с аппаратами LigaSure-8, Force Triad, Valleylab FT10 и Valleylab LS10

- Кабель 4.6 м

LS0300

1 штука



Педаль биполярная

Совместима с коагуляторами производства Valleylab / Covidien серий Force, FT и FX

- Кабель 4.6 м

E6009

1 штука



Педаль лигирующая биполярная

Совместима только с энергетической платформой Force Triad

- Кабель 4.6 м

LF0500

1 штука



Педаль биполярная

Совместима с коагуляторами производства Valleylab / Covidien серий Force, FT и FX

- Кабель 4.6 м

E6019

1 штука



Педаль монополярная трехклавишная

Совместима с энергетическими платформами Force Triad, Valleylab FT10 и Valleylab FX8

- Кабель 4.6 м

FT6003

1 штука



Педаль биполярная

Совместима с коагуляторами производства Valleylab / Covidien серий Force, FT и FX

- Кабель 4.6 м

E6009L

1 штука



Педаль для биполярной резекции

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10

- Кабель 4.6 м

FT6009

1 штука

Принадлежности к электрохирургическим генераторам

Педали (ножные переключатели)



Двойная педаль управления монополярными режимами FS-16

Для монополярной розетки № 1 коагулятора WEM SS-501SX

06523

1 штука



Педаль FS-10 для плазменного коагулятора одинарная

Используется с коагулятором аргонплазменным WEM Argon 4

03752

1 штука



Двойная педаль управления монополярными режимами FS-17

Для монополярной розетки № 2 коагулятора WEM SS-501SX

06524

1 штука



Педаль FS-11 для плазменного коагулятора двойная

Используется с коагулятором аргонплазменным WEM Argon 4

04029

1 штука



Педаль биполярная FS-24 одинарная

Используется с коагулятором WEM SS-501SX

09921

1 штука



Педаль к аппарату для удаления дыма RapidVac

Пневматический ножной переключатель

SEA3745

1 штука



Педаль биполярная FS-25 двойная

Используется с коагулятором WEM SS-501SX

09922

1 штука



Ножной переключатель

Используется с аппаратом для радиочастотной абляции Cool Tip серии E и с аппаратом для микроволновой абляции Emprint

RFASW

1 штука

Принадлежности к электрохирургическим генераторам

Тележки и транспортные модули



Тележка для генераторов Valleylab

- Система фиксации кабелей
- Выдвижной ящик для хранения
- Все колеса блокируемые

VLFTCRT

1 штука



Полка верхняя к универсальной подставке-держателю

Для универсальной тележки UC8009

- Для размещения дополнительного оборудования
- Комплект крепления кабелей

UC8010

1 штука



Подставка-держатель для генераторов универсальная

Для всех генераторов и энергетических платформ Medtronic

- Поворотные колеса (2 блокируемые)
- Комплект крепления кабелей

UC8009

1 штука



Комплект крепления баллонов к универсальной подставке-держателю

Для универсальной тележки UC8009

- Фиксация 2 баллонов емкостью 5 литров

UC8015

1 штука



Ящик выдвижной к универсальной подставке-держателю

Для универсальной тележки UC8009

- Не совместим с подвесной полкой UC8013 и комплектом крепления баллонов UC8015

UC8012

1 штука



Полка подвесная к универсальной подставке-держателю

Для универсальной тележки UC8009

- Не совместима с выдвижным ящиком UC8012 и комплектом крепления баллонов UC8015

UC8013

1 штука

Принадлежности к электрохирургическим генераторам

Тележки и транспортные модули



Комплект крепления кабелей к универсальной подставке-держателю

Для универсальной тележки UC8009

- Две скобы в комплекте

UC8011

1 штука



Транспортный модуль TU-27

Для генераторов производства WEM

- Наклонная верхняя полка с угловыми фиксаторами аппарата
- Горизонтальная внутренняя полка для аксессуаров
- Блокируемые колеса

04718

1 штука



Транспортный модуль TU-28

Для генераторов производства WEM

- Наклонная верхняя полка с угловыми фиксаторами аппарата
- Сетчатая коробка для аксессуаров
- Блокируемые колеса

04777

1 штука



Транспортный модуль TU-30

Для генераторов и плазменного коагулятора производства WEM

- Наклонная верхняя полка с угловыми фиксаторами аппарата
- Контейнер для двух баллонов с ремнями фиксаторами
- Все колеса блокируемые
- Сетчатый ящик для аксессуаров

04818

1 штука



Передвижная стойка (тележка) для абляции

Для установки частей системы СВЧ-абляции Emprint

- Изолирующий трансформатор с селектором входного напряжения
- Крепеж для насоса, коаксиального кабеля, пакета с жидкостью, кабелей, педали
- Все колеса блокируемые

CART1

1 штука

Инструменты LigaSure для электролигирования сосудов и система ультразвуковой диссекции Sonicision Curved Jaw



Электролигирование сосудов и ультразвуковая диссекция

Регистрационные удостоверения:

Инструменты для электролигирования и разделения тканей LigaSure с нанопокрывтием, РЗН 2019/8109 от 30 января 2024

Лапароскопический инструмент LigaSure для электролигирования и разделения тканей с выдвижным Г-образным крючком, РЗН 2019/8180 от 30 января 2024

Точный диссектор LigaSure с нанопокрывтием, РЗН 2019/8103 от 30 января 2024

Инструмент LigaSure Atlas для соединения тканей, РЗН 2020/9975 от 20 августа 2020

Открытый инструмент LigaSure для электролигирования и разделения тканей, с изогнутыми малыми браншами, 16,5 мм – 19 см, РЗН 2020/11884 от 28 февраля 2024

Инструменты электрохирургические моно- и биполярные в наборах и отдельных упаковках к аппаратам Force FX, Force EZ, Force Argon II, Force Triad, LigaSure, Surgistat II, Cool-Tip RF/Switching Controller, с принадлежностями, ФСЗ 2011/10146 от 20 ноября 2019


Электрод LigaSure для инструмента для электролигирования и разделения тканей с изогнутыми браншами для «открытых» операций, РЗН 2017/6161 от 20 октября 2021

Зажим LigaSure многоразового использования с изогнутыми браншами для «открытых» операций, РЗН 2017/6490 от 21 октября 2021

Диссектор Sonicision беспроводной ультразвуковой с изогнутыми браншами с принадлежностями, РЗН 2020/9858 от 03 апреля 2020

Инструменты LigaSure с нанопокрытием и без него

Для открытой и лапароскопической хирургии

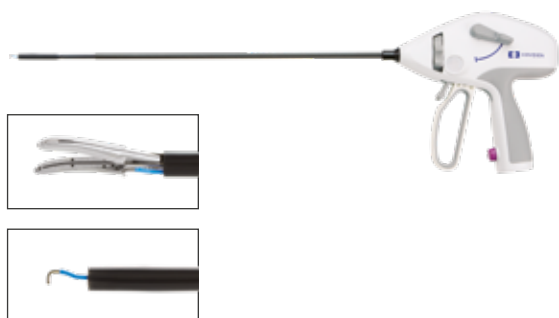

Лапароскопический инструмент Ligasure L-Hook 37 см для электролигирования и разделения тканей с выдвижным Г-образным крючком

Используется только с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10

- Монополярная диссекция тканей и биполярное лигирование сосудов в одном инструменте.
- Изогнутые лигирующие бранши и одноэтапная активация режима LigaSure.
- Встроенный нож для рассечения наложенной сосудистой пломбы
- Диаметр штока 5 мм, длина штока 37 см
- Вращение штока на 315 градусов
- Выдвижной монополярный крючок, сменяющий лигирующие бранши без изменения положения инструмента в троакаре
- Возможность выбора монополярного режима (чистое резание, Valleylab, коагуляция) и подбора необходимой мощности.
- Нанопокрытие на браншах, уменьшающее нагар и прилипание к тканям
- Ручная активация монополярных и лигирующего режимов

LF5637

6 шт. в кор.



Лапароскопический инструмент Ligasure L-Hook 44 см для электролигирования и разделения тканей с выдвижным Г-образным крючком

Используется только с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10


- Монополярная диссекция тканей и биполярное лигирование сосудов в одном инструменте.
- Изогнутые лигирующие бранши и одноэтапная активация режима LigaSure.
- Встроенный нож для рассечения наложенной сосудистой пломбы
- Диаметр штока 5 мм, длина штока 44 см
- Вращение штока на 315 градусов
- Выдвижной монополярный крючок, сменяющий лигирующие бранши без изменения положения инструмента в троакаре
- Возможность выбора монополярного режима (чистое резание, Valleylab, коагуляция) и подбора необходимой мощности.
- Нанопокрытие на браншах, уменьшающее нагар и прилипание к тканям
- Ручная активация монополярных и лигирующего режимов

LF5644

6 шт. в кор.

Инструменты LigaSure с нанопокрытием и без него

Для открытой и лапароскопической хирургии

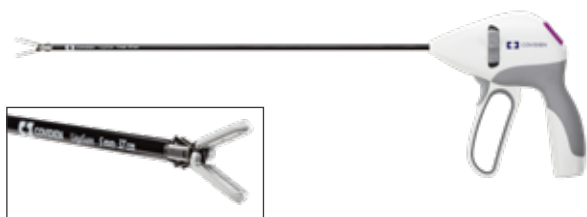


Инструмент LigaSure с нанопокрытием с браншами с тупым концом для открытых операций

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Диаметр штока 5 мм; длина штока 23 см
- Вращение штока на 180 градусов
- Прямые, закругленные, с контурированными концами, билатерально раскрывающиеся бранши
- Специальное нанопокрытие браншей, уменьшает нагар и прилипание к тканям
- Внутренняя кремальера, отдельная кнопка активации заваривания, курок активации рассечения
- Ручное или педальное управление

LF1823

6 шт. в кор.

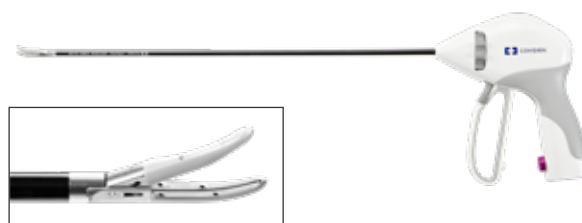

Инструмент LigaSure с нанопокрытием с браншами типа Maryland для открытых операций

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Диаметр штока 5 мм; длина штока 23 см
- Вращение штока на 350 градусов
- Изогнутость браншей улучшает визуализацию сосудистых структур
- Специальное нанопокрытие браншей, уменьшает нагар и прилипание к тканям
- Активация заваривания одновременно с захватом тканей, отдельный курок для рассечения
- Ручное или педальное управление

LF1923

6 шт. в кор.

Инструмент LigaSure с нанопокрытием с браншами с тупым концом для лапароскопических операций

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Диаметр штока 5 мм; длина штока 37 см
- Вращение штока на 180 градусов
- Прямые, закругленные, с контурированными концами, билатерально раскрывающиеся бранши
- Специальное нанопокрытие браншей, уменьшает нагар и прилипание к тканям
- Внутренняя кремальера, отдельная кнопка активации заваривания, курок активации рассечения
- Ручное или педальное управление

LF1837

6 шт. в кор.

Инструмент LigaSure с нанопокрытием с браншами типа Maryland для лапароскопических операций

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Диаметр штока 5 мм; длина штока 37 см
- Вращение штока на 350 градусов
- Изогнутость браншей улучшает визуализацию сосудистых структур
- Специальное нанопокрытие браншей, уменьшает нагар и прилипание к тканям
- Активация заваривания одновременно с захватом тканей, отдельный курок для рассечения
- Ручное или педальное управление

LF1937

6 шт. в кор.

Инструмент LigaSure с нанопокрытием с браншами с тупым концом для бариатрических операций

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Диаметр штока 5 мм; длина штока 44 см
- Вращение штока на 180 градусов
- Прямые, закругленные, с контурированными концами, билатерально раскрывающиеся бранши
- Специальное нанопокрытие браншей, уменьшает нагар и прилипание к тканям
- Внутренняя кремальера, отдельная кнопка активации заваривания, курок активации рассечения
- Ручное или педальное управление

LF1844

6 шт. в кор.

Инструмент LigaSure с нанопокрытием с браншами типа Maryland для бариатрических операций

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10


- Диаметр штока 5 мм; длина штока 44 см
- Вращение штока на 350 градусов
- Изогнутость браншей улучшает визуализацию сосудистых структур
- Специальное нанопокрытие браншей, уменьшает нагар и прилипание к тканям
- Активация заваривания одновременно с захватом тканей, отдельный курок для рассечения
- Ручное или педальное управление

LF1944

6 шт. в кор.

Инструменты LigaSure с нанопокрытием и без него

Для открытой и лапароскопической хирургии

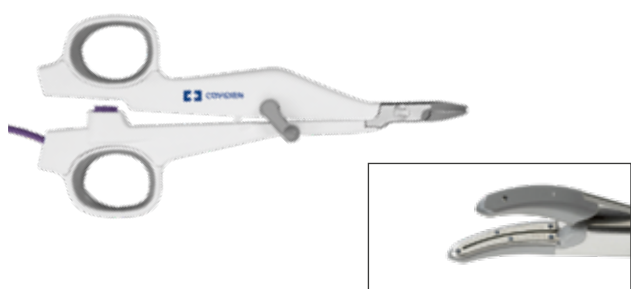

Инструмент LigaSure с малыми изогнутыми браншами

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Общая длина инструмента 19 см
- Контурированные кончики браншей для тупой диссекции
- Активация заваривания одновременно с захватом тканей, отдельный рычаг для рассечения

LF1212

6 шт. в кор.



Диссектор LigaSure точный с нанопокрытием

Используется с платформой энергетической Valleylab FT10 и генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Длина инструмента 21 см
- Изогнутые деликатные бранши
- Специальное нанопокрытие браншей, уменьшает нагар и прилипание к тканям
- Активация заваривания одновременно с захватом тканей, отдельный рычаг для рассечения

LF2019

6 шт. в кор.



Инструмент Ligasure Impact с большими изогнутыми браншами

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Прямоугольный шток длиной 18 см
- Поворот штока на 180 градусов
- Специальное нанопокрытие браншей, уменьшает нагар и прилипание к тканям
- Длина браншей 36 мм
- Изогнутость браншей улучшает визуализацию тканевых структур
- Кремальера, отдельная кнопка активации заваривания, курок активации рассечения

LF4418

6 шт. в кор.

Инструменты LigaSure с нанопокрытием и без него

Для открытой и лапароскопической хирургии




Электрод LigaSure для инструмента (зажима многоразового использования) с изогнутыми браншами для открытых операций

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Электрод используется только вместе с многоразовым лигирующим инструментом длиной 25 см
- Длина инструмента 25 см
- Длина браншей 25 мм
- Изгиб браншей 34 градуса
- Контурные кончики для тупой диссекции

LF3225	3 шт. в кор.
--------	--------------

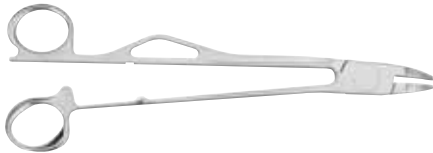

Зажим LigaSure многоразового использования с изогнутыми браншами

Используется с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10, генератором электролигирующим Valleylab LS10

- Не стерильный, многоразовый стальной инструмент
- Длина инструмента 25 см
- Изгиб браншей инструмента 34 градуса
- Используется с электродом LF3225

LF3225C	1 штука
---------	---------

Ультразвуковой беспроводной диссектор Sonicision Curved Jaw

Компоненты системы Sonicision с изогнутыми браншами



Диссектор Sonicision ультразвуковой беспроводной с изогнутыми браншами

- Длина штока 13 см, диаметр штока 5 мм
- Вращение штока на 360 градусов
- Длина активной изогнутой бранши 14.5 мм
- Двухрежимная кнопка активации

SCDA13

6 шт. в кор.



Диссектор Sonicision ультразвуковой беспроводной с изогнутыми браншами

- Длина штока 39 см, диаметр штока 5 мм
- Вращение штока на 360 градусов
- Длина активной изогнутой бранши 14.5 мм
- Двухрежимная кнопка активации

SCDA39

6 шт. в кор.



Диссектор Sonicision ультразвуковой беспроводной с изогнутыми браншами

- Длина штока 26 см, диаметр штока 5 мм
- Вращение штока на 360 градусов
- Длина активной изогнутой бранши 14.5 мм
- Двухрежимная кнопка активации

SCDA26

6 шт. в кор.



Диссектор Sonicision ультразвуковой беспроводной с изогнутыми браншами

- Длина штока 48 см, диаметр штока 5 мм
- Вращение штока на 360 градусов
- Длина активной изогнутой бранши 14.5 мм
- Двухрежимная кнопка активации

SCDA48

6 шт. в кор.



Направляющая для установки аккумулятора многоразовая

- Стерилизация автоклавируанием

SCBIGA

2 шт. в кор.



Многоразовая аккумуляторная батарея Sonicision

- Многоразовая, не стерилизуемая батарея
- Срок службы – до 200 операций
- Емкость батареи 2830 мАч

SCBA

1 штука

Ультразвуковой беспроводной диссектор Sonicision Curved Jaw

Компоненты системы Sonicision с изогнутыми браншами




Многоразовый генератор Sonicision

- Многоразовый, до 150 операций / циклов стерилизации
- Стерилизация в автоклаве
- Встроенный светодиодный индикатор

SCGAA

1 штука

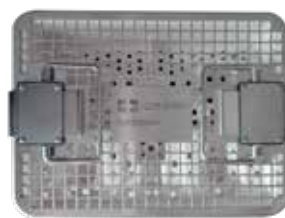

Стерилизационный лоток Sonicision

- Служит для автоклавирования изделий Sonicision
- Места для укладки генератора и двух направляющих рамок

SCSTA

1 штука



Зарядное устройство для аккумуляторов Sonicision

- Четыре зарядные ячейки
- Индикация состояния и срока использования батареи

CBCA

1 штука

Устройство для тонзиллэктомии ViZact, усовершенствованный биполярный инструмент



Устройство для тонзиллэктомии

Регистрационные удостоверения:

Устройство для тонзиллэктомии BiZact, усовершенствованный биполярный инструмент, РЗН 2023/21173
от 30 января 2024

Устройство для тонзиллэктомии

Усовершенствованный биполярный инструмент BiZact



Устройство для тонзиллэктомии BiZact

Совместим только с энергетической платформой LS10 и FT10

- Длина штока 12 см
- Бранши изогнуты для повторения формы миндалин
- Инструмент можно использовать на сосудах диаметром до 3 мм включительно
- Эргономическая рукоятка для комфорта в обеих руках.

BZ4212

6 шт. в кор.

Инструменты для монополярной и биполярной электрохирургии



Инструменты для электрохирургии

Регистрационные удостоверения:

Инструменты электрохирургические моно- и биполярные в наборах и отдельных упаковках к аппаратам Force FX, Force EZ, Force Argon II, Force Triad, LigaSure, Surgistat II, Cool-Tip RF/Switching Controller, с принадлежностями, ФСЗ 2011/10146 от 20 ноября 2019

Электрохирургическое устройство Force TriVerse, РЗН 2020/11528 от 20 февраля 2024

Держатель электродов электрохирургический Valleylab одноразовый, стерильный, для хирургических операций, РЗН 2020/11927 от 19 февраля 2024

Аппараты электрохирургические с принадлежностями, ФСЗ 2011/10147 от 09 июля 2020

Аппарат электрохирургический высокой мощности с принадлежностями, РЗН 2019/8752 от 19 января 2023

Возвратный электрод "Valleylab" Polyhesive, с системой REM, РЗН 2021/13920 от 21 февраля 2024

Инструменты для электрохирургии монополярные

Ручки (держатели электродов) электрохирургические



Держатель электродов (э/х ручка) многоразовый

- Многоразовый электрод-лезвие в комплекте, посадочный диаметр 2,4 мм
- Неразъемный силиконовый кабель 4.6 м
- 3-штырьковый коннектор для подключения к генераторам
- Клавиша активации режимов
- Автоклавирование или газовая стерилизация

E2100

10 шт. в кор.



Держатель электродов (э/х ручка) многоразовый

- Многоразовый электрод- лезвие в комплекте, посадочный диаметр 2,4 мм
- Неразъемный силиконовый кабель 4.6 м
- Коннектор для генераторов Erbe серий ACC/ICC
- Клавиша активации режимов
- Автоклавирование или газовая стерилизация

E2100E

10 шт. в кор.



Держатель электродов (э/х ручка) одноразовый

- Электрод-лезвие в комплекте, посадочный диаметр 2,4 мм
- Неразъемный кабель 3 м
- 3-штырьковый коннектор для подключения к генераторам
- Клавиша активации режимов

E2515

50 шт. в кор.



Держатель электродов (э/х ручка) одноразовый

- Электрод-лезвие в комплекте, посадочный диаметр 2,4 мм
- Неразъемный кабель 3 м
- 3-штырьковый коннектор для подключения к генераторам
- Две кнопки активации режимов

E2516

50 шт. в кор.



Электрохирургическое устройство Force Triverse

Используется с энергетическими платформами Force Triad, Valleylab FT10, Valleylab FX8

- Трехкнопочное управление резанием, коагуляцией и режимом гемостатической диссекции Valleylab
- Электрод-лезвие с антипригарным покрытием EDGE в комплекте, посадочный диаметр 2,4 мм
- Управление настройками мощности режимов
- Стерильный держатель инструментов в комплекте
- Неразъемный кабель 3 м
- Вилка кабеля с маркировкой для автоматического распознавания инструмента

FT3000

25 шт. в кор.



Электрохирургическое устройство Force Triverse

Используется с энергетическими платформами Force Triad, Valleylab FT10, Valleylab FX8

- Трехкнопочное управление резанием, коагуляцией и режимом гемостатической диссекции Valleylab
- Электрод-лезвие с антипригарным покрытием EDGE в комплекте, посадочный диаметр 2,4 мм
- Управление настройками мощности режимов
- Стерильный держатель инструментов в комплекте
- Неразъемный кабель 4.6 м
- Вилка кабеля с маркировкой для автоматического распознавания инструмента

FT3000DB

25 шт. в кор.

Электрохирургические ручки могут использоваться с электродами, имеющими посадочный диаметр 2.4 мм

Инструменты для электрохирургии монополярные

Ручки (держатели электродов) электрохирургические



8 Fr ○

Держатель электрода с функцией аспирации и ручной активацией

- Внутренний диаметр 8 Fr (2,7 мм)
- Длина полого электрода 15,24 см
- Ручная и педальная активация

E2608-6

25 шт. в кор.



12 Fr ○

Держатель электрода с функцией аспирации и ручной активацией

- Внутренний диаметр 12 Fr (4,0 мм)
- Длина полого электрода 15,2 см
- Дополнительная изоляция электрода
- Ручная и педальная активация

E3305

25 шт. в кор.



10 Fr ○

Держатель электрода с функцией аспирации и педальной активацией

- Внутренний диаметр 10 Fr (3,3 мм)
- Длина полого электрода 15,24 см
- Необходим монополярный адаптер E0502-1 или E0017

E2505-10FR

25 шт. в кор.



Держатель электрода с функцией аспирации и ручной активацией

- Внутренний диаметр 10 Fr (3,3 мм)
- Длина полого электрода 15,2 см
- Дополнительная изоляция электрода
- Ручная и педальная активация

E3310

25 шт. в кор.

Инструменты для электрохирургии монополярные

Электроды с антипригарным EDGE-покрытием

Преимущества покрытия электродов...

Электроды с покрытием обеспечивают широкий диапазон преимуществ для хирурга, включая улучшенное хирургическое воздействие и более легкую очистку по сравнению с традиционными электродами из нержавеющей стали. Все существующие виды электродов с покрытием ведут себя по-разному во время хирургической операции. Стальные электроды с антипригарным EDGE-покрытием из прочного, патентованного эластомерного полимерного покрытия обеспечивают более постоянное хирургическое воздействие при меньших установках мощности.

Бескомпромиссные режущие характеристики

При любых операциях и разных видах тканей, EDGE-электроды рассекают их как традиционные стальные, но не требуют усилий по очистке.

Легкость очистки

Экономия времени. Специальное покрытие не требует отскабливания электродов. Достаточно использовать влажный тампон.

Прочность и гибкость

EDGE-электроды можно сгибать на 90 градусов без ущерба целостности покрытия.

Повышенная безопасность

Часть EDGE-электродов имеют защитные манжеты Safety Sleeve. Они перекрывают конец инструмента, касающийся краев операционного поля. Отпала необходимость в самодельной дополнительной изоляции.

Выбор моделей

Электроды с покрытием EDGE доступны в трех вариантах длины лезвий и игл, а также изделия с дополнительной изоляцией частей, прилегающих к нецелевым структурам. Ими комплектуются электрохирургические ручки с кнопочным или клавишным управлением.

... Экономия средств и времени хирургам и лечебным учреждениям

Инструменты для электрохирургии монополярные

Электроды с антипригарным EDGE-покрытием



Электрод-скальпель с Edge-покрытием

- Шестигранный фиксатор
- Общая длина 6,35 см
- Длина рабочей части 2,8 см

E1450X

50 шт. в кор.



Электрод-игла с Edge-покрытием

- Общая длина 7,2 см
- Длина рабочей части 2,8 см
- Диаметр иглы 0,864 мм

E1452

50 шт. в кор.



Электрод-скальпель с Edge-покрытием удлинённый

- Общая длина 10,16 см
- Длина рабочей части 2,54 см

E1450-4

50 шт. в кор.



Электрод-игла с Edge-покрытием удлинённый

- Общая длина 16,51 см
- Длина рабочей части 2,54 см
- Диаметр острия 0,864 мм

E1452-6

50 шт. в кор.



Электрод-скальпель с Edge-покрытием удлинённый

- Общая длина 16,51 см
- Длина рабочей части 2,54 см

E1450-6

50 шт. в кор.



Электрод-скальпель с Edge-покрытием

- Дополнительная изоляция
- Шестигранный фиксатор
- Общая длина 7,0 см
- Длина рабочей части 5 мм

E1455

50 шт. в кор.

Инструменты для электрохирургии монополярные

Электроды с антипригарным EDGE-покрытием



Электрод-скальпель с Edge-покрытием удлинённый

- Дополнительная изоляция
- Общая длина 10,16 см
- Длина рабочей части 5 мм

E1455-4

50 шт. в кор.



Электрод-игла с Edge-покрытием

- Общая длина 7,2 см
- Длина рабочей части 5 мм
- Диаметр иглы 0,787 мм
- Дополнительная изоляция

E1465

50 шт. в кор.



Электрод-скальпель с Edge-покрытием удлинённый

- Дополнительная изоляция
- Общая длина 16,51 см
- Длина рабочей части 5 мм

E1455-6

50 шт. в кор.



Электрод-игла с Edge-покрытием удлинённый

- Общая длина 10,16 см
- Длина рабочей части 5 мм
- Диаметр иглы 0,787 мм
- Дополнительная изоляция

E1465-4

50 шт. в кор.



Электрод-скальпель с Edge-покрытием

- Дополнительная изоляция
- Защитный манжет
- Общая длина 7,0 см
- Длина рабочей части 5 мм

E1455B

25 шт. в кор.



Электрод-игла с Edge-покрытием

- Дополнительная изоляция
- Защитный манжет
- Общая длина 7,2 см
- Длина рабочей части 5 мм
- Диаметр иглы 0,787 мм

E1465B

25 шт. в кор.



Электрод-скальпель с Edge-покрытием удлинённый

- Дополнительная изоляция
- Защитный манжет
- Общая длина 10,16 см
- Длина рабочей части 5 мм

E1455B-4

25 шт. в кор.



Электрод-игла с Edge-покрытием удлинённый

- Дополнительная изоляция
- Защитный манжет
- Общая длина 10,16 см
- Длина рабочей части 4,8 мм
- Диаметр иглы 0,787 мм

E1465B-4

25 шт. в кор.

Инструменты для электрохирургии монополярные

Электроды-иглы микрохирургические вольфрамовые



Электрод-игла POINT микрохирургическая прямая

- Дополнительная изоляция
- Общая длина 4,2 см
- Длина выступающей из инструмента части 2 см
- Длина рабочей части 3,0 мм
- Диаметр иглы 0,06 мм

E1650 10 шт. в кор.



Электрод-игла POINT микрохирургическая

- Дополнительная изоляция
- Общая длина 5,1 см
- Длина выступающей из инструмента части 3 см
- Длина рабочей части 3,0 мм
- Диаметр иглы 0,06 мм, изгиб 45° в 10 мм от острия

E1653 10 шт. в кор.



Электрод-игла POINT микрохирургическая прямая

- Дополнительная изоляция
- Общая длина 5,4 см
- Длина выступающей из инструмента части 3 см
- Длина рабочей части 3,0 мм
- Диаметр иглы 0,06 мм

E1651 10 шт. в кор.



Электрод-игла POINT микрохирургическая с защитным манжетом

- Дополнительная изоляция
- Защитный манжет
- Общая длина 10,16 см
- Длина выступающей из инструмента части 9 см
- Длина рабочей части 3,0 мм
- Диаметр иглы 0,06 мм

E1654B 10 шт. в кор.



Электрод-игла POINT микрохирургическая

- Дополнительная изоляция
- Общая длина 5,4 см
- Длина выступающей из инструмента части 3 см
- Длина рабочей части 3,0 мм
- Диаметр иглы 0,06 мм, изгиб 45° в 3 мм от острия

E1652 10 шт. в кор.

Инструменты для электрохирургии монополярные

Гинекологические электроды LLETZ, LEEP



Показан реальный размер

LLETZ электрод-петля

- Петля вольфрамовая 10 мм x 10 мм
- Длина штока 13 см

E1559

10 шт. в кор.



Показан реальный размер

LLETZ электрод-петля

- Петля вольфрамовая 20 мм x 15 мм
- Длина штока 13 см

E1562

10 шт. в кор.




Показан реальный размер

LLETZ электрод-петля

- Петля вольфрамовая 15 мм x 12 мм
- Длина штока 13 см

E1560

10 шт. в кор.

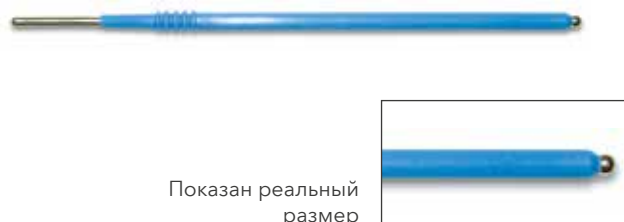

Показан реальный размер

LLETZ электрод-шарик

- Диаметр 3 мм
- Длина штока 13 см
- Материал электрода - нержавеющая сталь

E1563

10 шт. в кор.




Показан реальный размер

LLETZ электрод-петля

- Петля вольфрамовая 20 мм x 12 мм
- Длина штока 13 см

E1561

10 шт. в кор.

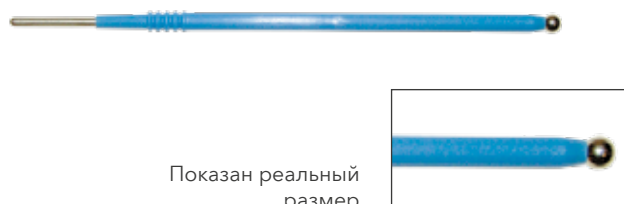

Показан реальный размер

LLETZ электрод-шарик

- Диаметр 5 мм
- Длина штока 13 см
- Материал электрода - нержавеющая сталь

E1564

10 шт. в кор.

Инструменты для электрохирургии монополярные

Гинекологические электроды LLETZ, LEEP



LLETZ электрод-петля

- Петля вольфрамовая прямоугольная 5 мм x 5 мм
- Длина штока 13 см

E1565

10 шт. в кор.



LEEP электрод-полупетля многоразовая

- 10 мм x 10 мм
- Длина штока 12 см
- Толщина вольфрамовой проволоки 0,2 мм

05689

1 шт. в кор.



LLETZ электрод-петля

- Петля вольфрамовая прямоугольная 10 мм x 8 мм
- Длина штока 13 см

E1567

10 шт. в кор.



LEEP электрод-полупетля многоразовая

- 15 мм x 10 мм
- Длина штока 12 см
- Толщина вольфрамовой проволоки 0,2 мм

05690

1 шт. в кор.



LEEP электрод-полупетля многоразовая

- 20 мм x 10 мм
- Длина штока 12 см
- Толщина вольфрамовой проволоки 0,2 мм

05691

1 шт. в кор.

Инструменты для электрохирургии монополярные

Электроды из нержавеющей стали



Электрод-шарик

- Общая длина 5,33 см
- Длина рабочей части 1 см
- Диаметр 5 мм

E1550

150 шт. в кор.



Электрод-игла

- Общая длина 7,2 см
- Длина рабочей части 2,8 см
- Диаметр иглы 0,762 мм

E1552

150 шт. в кор.



Электрод-скальпель

- Общая длина 6,2 см
- Длина рабочей части 2,54 см

E1551X

150 шт. в кор.



Электрод-игла удлиненный

- Общая длина 16,5 см
- Длина рабочей части 2,54 см
- Диаметр острия 0,762 мм

E1552-6

50 шт. в кор.



Электрод-скальпель удлиненный

- Общая длина 16,5 см
- Длина рабочей части 2,54 см

E1551-6

50 шт. в кор.

Инструменты для электрохирургии монополярные

Электроды из нержавеющей стали



Электрод артроскопический
изолированный крючок 90°

- Общая длина 21,6 см
- Длина рабочей части 0,19 см

E1510 10 шт. в кор.



Электрод артроскопический
изолированный скальпель

- Общая длина 21,6 см
- Длина рабочей части 0,19 см

E1512 10 шт. в кор.



Электрод артроскопический
изолированный крючок 45°

- Общая длина 21,6 см
- Длина рабочей части 0,19 см

E1511 10 шт. в кор.



Электрод артроскопический
не изолированный скальпель

- Общая длина 21,6 см
- Длина рабочей части 0,7 см

E1513 10 шт. в кор.



Удлинитель электрода

- Общая длина 13 см
- Удлинение на 10,2 см

E1502 1 штука



Удлинитель электрода лапароскопический

- Вводится через 5 мм троакар
- Общая длина 34,3 см
- Удлинение на 31,5 см

E1504 1 штука

Инструменты для электрохирургии монополярные

Электроды монополярные многоразовые



Электрод-шарик из нержавеющей стали

- Общая длина 5,33 см
- Длина рабочей части 1 см
- Диаметр 3,2 мм

E1000

1 штука



Электрод-шарик из нержавеющей стали

- Общая длина 5,1 см
- Длина рабочей части 5,6 мм
- Диаметр 5,6 мм

E1002

1 штука



Электрод-тонкая игла из нержавеющей стали

- Общая длина 6,6 см
- Длина рабочей части 2,54 см
- Диаметр иглы 0,51 мм

E1003

1 штука



Электрод-петля вольфрамовая

- Общая длина 5 см
- Длина и диаметр рабочей части 9,5 мм

E1005

1 штука



Электрод-скальпель из нержавеющей стали

- Общая длина 7 см
- Длина рабочей части 2,8 см

E1020

1 штука



Электрод-петля многоразовая

- Диаметр петли 8 мм
- Длина 75 мм

00746

1 штука



Электрод-нож из нержавеющей стали

- Общая длина 75 мм

00747

1 штука



Электрод-нож из нержавеющей стали, изогнутый под 45°

- Общая длина 75 мм

00748

1 штука



Электрод-нож из нержавеющей стали педиатрический

- Общая длина 75 мм

02467

1 штука



Электрод-игла из нержавеющей стали

- Общая длина 75 мм

00749

1 штука



Очиститель электродов абразивный

- Стерильный, одноразовый
- Размер 5 см x 5 см
- Клейкое основание
- Рентгенконтрастная полоса

E2401

100 шт. в кор.

Инструменты для электрохирургии монополярные

Лапароскопические электроды одноразовые



Электрод - прямой шпатель

- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 36 см

E3770-36

10 шт. в кор.



Электрод - проволочный L-крючок

- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 36 см

E3773-36

10 шт. в кор.



Электрод - изогнутый шпатель

- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 36 см

E3771-36

10 шт. в кор.



Электрод - проволочный L-крючок

- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 45 см

E3773-45

10 шт. в кор.



Электрод - изогнутый шпатель

- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 45 см

E3771-45

10 шт. в кор.



Электрод - плоский L-крючок

- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 36 см

E3774-36

10 шт. в кор.



Электрод - проволочный J-крючок

- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 36 см

E3772-36

10 шт. в кор.



Электрод - плоский L-крючок

- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 45 см

E3774-45

10 шт. в кор.

Инструменты для электрохирургии монополярные

Лапароскопические электроды с покрытием Cleancoat



Электрод - прямой шпатель

- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 36 см

E3770-36C

10 шт. в кор.



Электрод - проволочный L-крючок

- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 36 см

E3773-36C

10 шт. в кор.



Электрод - изогнутый шпатель

- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 36 см

E3771-36C

10 шт. в кор.



Электрод - проволочный L-крючок

- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 45 см

E3773-45C

10 шт. в кор.



Электрод - изогнутый шпатель

- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 45 см

E3771-45C

10 шт. в кор.



Электрод - плоский L-крючок

- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 36 см

E3774-36C

10 шт. в кор.



Электрод - проволочный J-крючок

- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 36 см

E3772-36C

10 шт. в кор.



Электрод - плоский L-крючок

- Совместим с 5 мм канюлей
- Общая длина 45 см

E3774-45C

10 шт. в кор.

Инструменты для электрохирургии монополярные

Инструмент и электроды лапароскопические полые Opti⁴



Устройство (держатель электродов) лапароскопическое OPTI⁴

- Управление 4-я функциями: ирригация, аспирация, рассечение и коагуляция тканей
- Кабель 3 м

E2750

10 шт. в кор.



OPTI⁴ электрод-плоский L-крючок выдвигаемый

- Вводится через 5 мм троакар
- Боковые аспирационные отверстия
- Общая длина 28 см

E3784R-28ASP

10 шт. в кор.



OPTI⁴ электрод-изогнутый шпатель выдвигаемый

- Вводится через 5 мм троакар
- Боковые аспирационные отверстия
- Общая длина 28 см

E3781R-28ASP

10 шт. в кор.



OPTI⁴ электрод-прямой шпатель не выдвигаемый

- Вводится через 5 мм троакар
- Общая длина 28 см

E3780-28

10 шт. в кор.



OPTI⁴ электрод-проволочный J-крючок выдвигаемый

- Вводится через 5 мм троакар
- Боковые аспирационные отверстия
- Общая длина 28 см

E3782R-28ASP

10 шт. в кор.



OPTI⁴ электрод-изогнутый шпатель не выдвигаемый

- Вводится через 5 мм троакар
- Общая длина 28 см

E3781-28

10 шт. в кор.



OPTI⁴ электрод-проволочный L-крючок выдвигаемый

- Вводится через 5 мм троакар
- Боковые аспирационные отверстия
- Общая длина 36 см

E3783R-36ASP

10 шт. в кор.



OPTI⁴ электрод-проволочный J-крючок не выдвигаемый

- Вводится через 5 мм троакар
- Общая длина 28 см

E3782-28

10 шт. в кор.

Инструменты для электрохирургии монополярные

Инструмент и электроды лапароскопические полые Opti⁴



ОПТИ⁴ электрод-проволочный L-крючок не выдвигаемый

- Вводится через 5 мм троакар
- Общая длина 28 см

E3783-28

10 шт. в кор.



ОПТИ⁴ электрод-плоский L-крючок не выдвигаемый

- Вводится через 5 мм троакар
- Общая длина 28 см

E3784-28

10 шт. в кор.



ОПТИ⁴ электрод-цилиндрический не выдвигаемый

- Вводится через 5 мм троакар
- Общая длина 28 см

E3786-28

10 шт. в кор.

Инструменты для электрохирургии монополярные

Пластины пациента (возвратные или рассеивающие электроды)



Возвратный REM-электрод для взрослых

Для генераторов с функцией RECQM

- Для пациентов с массой тела более 13.6 кг
- Кабель 2,7 м

E7507

50 шт. в кор.



Возвратный REM-электрод для детей

Для генераторов с функцией RECQM

- Для пациентов с массой тела от 2,7 до 13.6 кг
- Кабель 4,6 м

E7510-25DB

25 шт. в кор.



Возвратный REM-электрод для взрослых

Для генераторов с функцией RECQM

- Для пациентов с массой тела более 13.6 кг
- Кабель 4,6 м

E7507-DB

50 шт. в кор.



Возвратный REM-электрод для новорожденных

Для генераторов с функцией RECQM

- Для пациентов с массой тела от 0,45 до 2,7 кг
- Кабель 2,7 м

E7512

12 шт. в кор.



Возвратный REM-электрод для детей

Для генераторов с функцией RECQM

- Для пациентов с массой тела от 2,7 до 13.6 кг
- Кабель 2,7 м

E7510-25

25 шт. в кор.



Беспроводной возвратный REM-электрод для взрослых

Для генераторов с функцией RECQM

- Для пациентов с массой тела более 13.6 кг
- Используется с многожильным кабелем E0560

E7509

50 шт. в кор.

Инструменты для электрохирургии монополярные

Пластины пациента (возвратные или рассеивающие электроды)



Беспроводной возвратный REM-электрод для взрослых

Для генераторов с функцией RECQM

- Для пациентов с массой тела более 13.6 кг
- Используется с многоразовым кабелем E0560

HRA5

50 шт. в кор.



Пластина пациента PP-05 из нержавеющей стали многоразовая

Используется с коагулятором WEM SS-501SX

- Размер 85 мм x 180 мм
- Требуется многоразового кабеля 03129 или 07930

03078

1 шт. в кор.



Пластина пациента PP-04 из нержавеющей стали многоразовая

Используется с коагулятором WEM SS-501SX

- Размер 180 мм x 300 мм
- Требуется многоразового кабеля 03129 или 07930

03027

1 шт. в кор.

Инструменты для электрохирургии

Кабели для пластин пациента многоразовые



Кабель соединительный для пластин пациента, многоразовый

Для генераторов с функцией RECQM

- Длина 4,6 м
- Используется с пластинами E7509 и HRA5

E0560

1 шт. в кор.



Кабель соединительный PC-08 для стальной пластины пациента многоразовый

Используется с коагулятором WEM SS-501SX

- Длина 3 м
- Коннектор для генераторов производства WEM

03129

1 шт. в кор.



Кабель соединительный для пластин пациента, многоразовый

Для генераторов ERBE

- Длина 4,6 м
- Используется с пластинами E7509 и HRA5

E0560E

1 шт. в кор.



Кабель соединительный PC-10 для стальной пластины пациента многоразовый

- Длина 3 м
- Коннектор для генераторов американского производства

07930

1 шт. в кор.

Инструменты для электрохирургии

Кабели монополярные и переходники к ним



Кабель соединительный монополярный одноразовый для режима Valleylab

Используется только с энергетическими платформами Force Triad, Valleylab FT10 и Valleylab FX8

- Инструментальный разъем гнездовой 4 мм, генераторный коннектор SMART
- Реализует режимы Valleylab, рассечения и коагуляции в эндохирургии
- Длина 4,6 м

FT0510

25 шт. в кор.



Кабель соединительный монополярный MC-10 многоразовый лапароскопический

Используется с электрохирургическими аппаратами производства Covidien

- Инструментальный разъем гнездовой 4 мм, генераторный разъем головчатый штырь 8 мм
- Длина 3 м

07927

1 шт. в кор.



Кабель соединительный монополярный одноразовый лапароскопический

Используется с монополярным переходником E0502-1

- Инструментальный разъем гнездовой 4 мм
- Длина 3 м

E0510

50 шт. в кор.



Кабель соединительный монополярный MC-06 многоразовый эндоскопический

- Генераторный разъем штекер 4 мм
- Длина 3 м

03080

1 шт. в кор.



Кабель соединительный монополярный MC-07 многоразовый лапароскопический

Используется с электрохирургическим аппаратом WEM SS-501SX

- Инструментальный разъем гнездовой 4 мм, генераторный разъем погруженный штекер 4 мм
- Длина 3 м

04770

1 шт. в кор.



Кабель соединительный монополярный MC-03 для монополярных пинцетов

- Инструментальный разъем гнездовой 4 мм
- Длина 3 м

00703

1 шт. в кор.

Инструменты для электрохирургии

Кабели монополярные и переходники к ним



Адаптер монополярный универсальный

Для монополярных кабелей диаметром до 6 мм

E0017

1 шт. в кор.



Адаптер для S-кабеля и REM-разветвитель

Для использования с двумя REM-пластинами пациента

E0507-B

1 шт. в кор.



Адаптер монополярный

Для монополярных кабелей диаметром до 3,2 мм

E0502-1

1 шт. в кор.



Адаптер AD-20 для REM-пластин пациента с кабелем

Используется с электрохирургическим аппаратом WEM SS-501SX

08952

1 шт. в кор.

Инструменты для электрохирургии

Пинцеты биполярные с управлением педалью, многоразовые



Пинцет байонетный Scoville-Greenwood

- Общая длина 19,7 см
- Ширина браншей 1,5 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512

E4051-CT

1 штука



Пинцет байонетный Cushing

- Общая длина 19,1 см
- Ширина браншей 2,0 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512

E4054-CT

1 штука



Пинцет Cushing

- Общая длина 15,2 см
- Ширина браншей 0,7 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512

E4052-CT

1 штука



Пинцет Jewelers

- Общая длина 10,2 см
- Ширина браншей 0,4 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512

E4055-CT

1 штука



Пинцет Cushing

- Общая длина 17,8 см
- Ширина браншей 1,5 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512

E4053-CT

1 штука



Пинцет байонетный Gerald

- Общая длина 19,1 см
- Ширина браншей 0,7 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512

E4057-CT

1 штука

Инструменты для электрохирургии

Пинцеты биполярные с управлением педалью, многоразовые



Пинцет байонетный Cushing

- Общая длина 19,1 см
- Ширина браншей 0,7 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512

E4058-CT

1 штука



Пинцет байонетный BF-500

- Общая длина 20 см
- Ширина браншей 1,2 мм
- Используется с кабелями 06005, 07929 и E360150L

00763

1 штука



Пинцет Semkin с ограничителем

- Общая длина 14 см
- Ширина браншей 0,5 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512

E4060-CT

1 штука



Пинцет байонетный BF-501

- Общая длина 20 см
- Ширина браншей 0,5 мм
- Используется с кабелями 06005, 07929 и E360150L

00766

1 штука



Пинцет глазной изогнутый

- Общая длина 8,9 см
- Ширина браншей 0,5 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512

E4062-CT

1 штука



Пинцет байонетный BF-505

- Общая длина 20 см
- Ширина браншей 0,5 мм
- Используется с кабелями 06005, 07929 и E360150L

00578

1 штука



Пинцет байонетный титановый

- Общая длина 22,2 см
- Ширина браншей 1,0 мм
- Используется с кабелями E0020V, E0018 и E0512

E4073-CT

1 штука

Инструменты для электрохирургии

Кабели соединительные биполярные



Кабель биполярный к пинцетам Valleylab одноразовый

Используется с электрохирургическими аппаратами Covidien

- Для биполярных пинцетов Valleylab
- Литая вилка на генераторном конце
- Длина 3,6 м

E0512

50 шт. в кор.



Кабель биполярный многоразовый

Используется с электрохирургическими аппаратами Covidien

- Для биполярных пинцетов Valleylab
- Литая вилка на генераторном конце
- Длина 4,5 м

E0020V

1 штука



Кабель биполярный многоразовый

Используется с электрохирургическими аппаратами Covidien

- Для большинства биполярных инструментов K.Storz
- Литая вилка на генераторном конце
- Длина 4,5 м

E0021S

1 штука



Кабель биполярный многоразовый

Используется с электрохирургическими аппаратами Covidien

- Для большинства биполярных инструментов R.Wolf
- Литая вилка на генераторном конце
- Длина 4,5 м

E0022W

1 штука



Кабель для биполярной резекции K.Storz

- Для использования с биполярными резектоскопами K.Storz
- Для использования с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10
- Многоразовый
- Длина 4,6 м

FT0021S

1 штука



Кабель для биполярной резекции R.Wolf


- Для использования с биполярными резектоскопами R.Wolf
- Для использования с энергетическими платформами Force Triad и Valleylab FT10
- Многоразовый
- Длина 4,6 м

FT0022W

1 штука

Инструменты для электрохирургии

Кабели соединительные биполярные

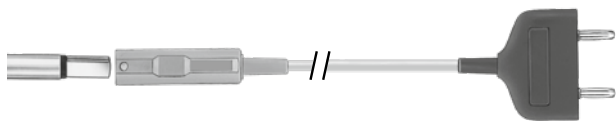

Кабель биполярный многожильный

Используется с электрохирургическими аппаратами Covidien

- Для биполярных пинцетов серий E700xxx и 700xxx
- Литая вилка на генераторном конце
- Длина 4,5 м

E360150L или E360150

1 штука



Кабель биполярный многожильный BC-11

Используется с электрохирургическими аппаратами WEM

- Стандартный европейский коннектор
- Вилка на генераторном конце с расстоянием между штырьками 22 мм
- Длина 3 м

06005

1 штука



Кабель биполярный многожильный BC-14

Используется с электрохирургическими аппаратами Covidien

- Стандартный европейский коннектор
- Литая вилка на генераторном конце
- Длина 3 м

07929

1 штука

Оборудование и инструменты для удаления дыма



Оборудование и инструменты для удаления дыма

Регистрационные удостоверения:

Аппарат для удаления хирургического дыма RapidVac с принадлежностями, ФСЗ 2011/09932
от 29 сентября 2021

Оборудование и инструменты для удаления дыма

Аппарат для удаления хирургического дыма RapidVac и принадлежности



Аппарат для удаления хирургического дыма RapidVac

- Для использования требуется фильтр SEA3700
- Синхронизируется с коагуляторами производства Covidien кабелем SEA3730
- Синхронизируется с коагуляторами иных производителей сенсором SEA3741
- Максимальный объем фильтрации 1,25 м³/мин

SE3695

1 штука



Сенсор обратной связи для дымоэвакуатора RapidVac

- Синхронизирует работу RapidVac с электрохирургическими аппаратами

SEA3741

1 штука



Фильтр для дымоэвакуатора RapidVac

- Четырехступенчатая ULPA-фильтрация
- Три входных отверстия, переходники не требуются
- Размеры отверстий: 6 мм, 10 мм, 22 мм
- 25 часов непрерывной работы, реальный срок службы – от трех до пяти месяцев

SEA3700

2 шт. в кор.



Педаль к аппарату для удаления дыма RapidVac

SEA3745

1 штука



Соединительный кабель для дымоэвакуатора RapidVac

- Синхронизирует работу RapidVac с электрохирургическими аппаратами Covidien

SEA3730

1 штука



Трубка дымоотводная 0,6 см x 3 м

- Подключаются непосредственно к фильтру RapidVac
- Лапароскопическая, без клапана

SEA3705

10 шт. в кор.

Оборудование и инструменты для удаления дыма

Аппарат для удаления хирургического дыма RapidVac и принадлежности



Трубка дымоотводная 1 см x 3 м

- Подключаются непосредственно к фильтру RapidVac
- Для дымоотвода на электрохирургической ручке

SEA3710

10 шт. в кор.



Дымоотвод, фиксируемый на электрохирургической ручке

- Подключаются непосредственно к фильтру RapidVac
- Трубка дымоотвода длиной 3 м

E3810

20 шт. в кор.



Трубка дымоотводная с губчатым фильтром 2,2 см x 3 м

- Подключаются непосредственно к фильтру RapidVac

SEA3715

10 шт. в кор.



Дымоотвод, фиксируемый на электрохирургической ручке

- Подключаются непосредственно к фильтру RapidVac
- Трубка дымоотвода длиной 4,5 м

E3815

20 шт. в кор.



Трубка дымоотводная лапароскопическая 0,6 см x 3 м

- Подключаются непосредственно к фильтру RapidVac
- Клапан для контроля пневмоперитонеума

SEA3720

10 шт. в кор.



Наконечник дымоотвода

- Устойчив к лазерному излучению
- Диаметр 22 мм, длина 20 см

SEA3725

10 шт. в кор.

Оборудование и инструменты для термоабляции очаговых образований и проводящих путей



Оборудование и инструменты для термоабляции очаговых образований и проводящих путей

Регистрационные удостоверения:

Генератор системы радиочастотной абляции Cool Tip серии E с принадлежностями, ФСЗ 2012/13093 от 21 декабря 2022

Комплекс аппаратов для микроволновой (или СВЧ) абляции с принадлежностями, ФСЗ 2011/10148 от 18 января 2023

Инструменты для хирургической абляции, ФСЗ 2011/10771 от 11 июля 2022

Антенна усиленная чрескожная Emprint с применением технологии Thermosphere, РЗН 2021/14716 от 07 июля 2021

Платформа энергетическая серии FT Valleylab FT10 с принадлежностями, РЗН 2017/5614 от 19 февраля 2024

Оборудование для радиочастотной абляции

Генератор системы Cool-Tip серии E и принадлежности



Генератор системы радиочастотной абляции Cool-Tip серии E

- Шесть режимов работы
- Возможность подключения от 1 до 3 активных электродов
- Возможность использования дистанционного термозонда
- Русифицированный интерфейс

RFAGEN

1 штука



Принадлежности к генератору системы радиочастотной абляции Cool-Tip серии E

- Насос перистальтический
- Кабель с разъемом для возвратных электродов пациента
- Ёмкость для охлаждающей жидкости
- Ножной переключатель

RFAPAC

1 набор



Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Игольчатый электрод – длина 10 см, рабочая часть 20 мм
- Возвратный электрод пациента
- Ирригационные трубки

RFA1020

1 набор



Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Игольчатый электрод – длина 10 см, рабочая часть 30 мм
- Возвратный электрод пациента
- Ирригационные трубки

RFA1030

1 набор



Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Игольчатый электрод – длина 14,4 см, рабочая часть 7 мм
- Возвратный электрод пациента
- Ирригационные трубки

RFA1507

1 набор

Оборудование для радиочастотной абляции

Набор инструментов Cool-Tip серии E и принадлежности



Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Игольчатый электрод – длина 15 см, рабочая часть 10 мм
- Возвратный электрод пациента
- Ирригационные трубки

RFA1510

1 набор



Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Игольчатый электрод – длина 20 см, рабочая часть 20 мм
- Возвратный электрод пациента
- Ирригационные трубки

RFA2020

1 набор



Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Игольчатый электрод – длина 15 см, рабочая часть 20 мм
- Возвратный электрод пациента
- Ирригационные трубки

RFA1520

1 набор



Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Игольчатый электрод – длина 20 см, рабочая часть 30 мм
- Возвратный электрод пациента
- Ирригационные трубки

RFA2030

1 набор



Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Игольчатый электрод – длина 15 см, рабочая часть 30 мм
- Возвратный электрод пациента
- Ирригационные трубки

RFA1530

1 набор



Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Игольчатый электрод – длина 25 см, рабочая часть 30 мм
- Возвратный электрод пациента
- Ирригационные трубки

RFA2530

1 набор

Оборудование для радиочастотной абляции

Набор инструментов Cool-Tip серии E и принадлежности



Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Кластерный электрод – длина 10 см, рабочая часть 25 мм
- Два возвратных электрода пациента
- Ирригационные трубки
- Интродьюсер

RFAC1025

1 набор



Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Три игольчатых электрода – длина 15 см, рабочая часть 30 мм
- Два возвратных электрода пациента
- Ирригационные трубки
- Фиксатор положения электродов

RFA15303

1 набор



Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Кластерный электрод – длина 15 см, рабочая часть 25 мм
- Два возвратных электрода пациента
- Ирригационные трубки
- Интродьюсер

RFAC1525

1 набор



Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Три игольчатых электрода – длина 15 см, рабочая часть 40 мм
- Два возвратных электрода пациента
- Ирригационные трубки
- Фиксатор положения электродов

RFA15403

1 набор



Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Кластерный электрод – длина 20 см, рабочая часть 25 мм
- Два возвратных электрода пациента
- Ирригационные трубки
- Интродьюсер

RFAC2025

1 набор



Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Три игольчатых электрода – длина 25 см, рабочая часть 30 мм
- Два возвратных электрода пациента
- Ирригационные трубки
- Фиксатор положения электродов

RFA25303

1 набор

Оборудование для радиочастотной абляции

Набор инструментов Cool-Tip серии E и принадлежности



Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции

- Три игловидных электрода – длина 25 см, рабочая часть 40 мм
- Два возвратных электрода пациента
- Ирригационные трубки
- Фиксатор положения электродов

RFA25403

1 набор



Возвратные электроды пациента для радиочастотной абляции

RFAPADB

20 штук



Дистанционный температурный зонд

Используется с абляционными аппаратами Cool Tip™ серии E и Emprint™

- Длина 20 см, диаметр 20,5 G
- Канюля с мандреном в комплекте – диаметр 18 G

RTP20

1 набор



Ножной переключатель

Используется с аппаратом для радиочастотной абляции Cool Tip™ серии E

Используется с аппаратом для микроволновой абляции Emprint™

RFASW

1 шт. в кор.



Дистанционный температурный зонд

Используется с абляционными аппаратами Cool Tip™ серии E и Emprint™

- Длина 20 см, диаметр 20,5 G
- Канюля с мандреном в комплекте – диаметр 18 G

RTP20B

5 наборов

Оборудование для микроволновой абляции

Генератор Emprint и принадлежности



Генератор для микроволновой (СВЧ) абляции Emprint

- Технология Thermosphere™
- Выходная частота 2,45 ГГц
- Охлаждаемые излучающие антенны
- Возможность использования дистанционного термозонда

CAGEN1

1 штука



Антенна чрескожная Emprint стандартная

- Технология Thermosphere™
- Длина 20 см, диаметр 2,4 мм (13 G), излучающая секция 28 мм
- Сантиметровые метки на штоке

CA20L2

1 штука



Насос для системы микроволновой (или СВЧ) абляции Emprint

- Питание от сети

CAPUMP1

1 штука



Антенна чрескожная Emprint длинная

- Технология Thermosphere™
- Длина 30 см, диаметр 2,4 мм (13 G), излучающая секция 28 мм
- Сантиметровые метки на штоке

CA30L2

1 штука



Антенна чрескожная Emprint короткая

- Технология Thermosphere™
- Длина 15 см, диаметр 2,4 мм (13 G), излучающая секция 28 мм
- Сантиметровые метки на штоке

CA15L2

1 штука



Кабель многообразовый системы Emprint

- Длина 190 см

CA190RC1

1 штука

Оборудование для микроволновой абляции

Генератор Emprint и принадлежности



Дистанционный температурный зонд

Используется с абляционными аппаратами Cool Tip™ серии E и Emprint™

- Длина 20 см, диаметр 20,5 G
- Канюля с мандреном в комплекте – диаметр 18 G

RTP20

1 набор



Дистанционный температурный зонд

Используется с абляционными аппаратами Cool Tip™ серии E и Emprint™

- Длина 20 см, диаметр 20,5 G
- Канюля с мандреном в комплекте – диаметр 18 G

RTP20B

5 наборов



Ножной переключатель

Используется с аппаратом для радиочастотной абляции Cool Tip™ серии E

Используется с аппаратом для микроволновой абляции Emprint™

RFASW

1 шт. в кор.



Передвижная стойка (тележка) для абляции

Для установки частей системы СВЧ-абляции Emprint™

- Изолирующий трансформатор с селектором входного напряжения
- Крепеж для насоса, коаксиального кабеля, пакета с жидкостью, кабелей, педали
- Все колеса блокируемые

CART1

1 шт. в кор.

Оборудование для торакоскопической изолирующей радиочастотной абляции при фибрилляции предсердий

Платформа энергетическая серии FT Valleylab FT10 и принадлежности



Платформа энергетическая Valleylab FT10

Платформа энергетическая серии FT Valleylab FT10 поддерживает работу всех электрохирургических инструментов компании. Генератор Valleylab FT10 работает эффективнее прежних аппаратов компании и доставляя точное количество энергии для достижения оптимального хирургического эффекта.

- Возможность использования для эпикардальной РЧ абляции при наджелудочковых тахикардиях специальными биполярными и монополярными инструментами
- Для РЧ абляции требуется версия ПО 4.0 или выше
- Эксклюзивная система обновления ПО Valleylab Exchange
- Система TissueFect™ адаптирует характеристики подаваемой энергии 434,000 р/сек
- Адаптивная система REM* для рассеивающих электродов
- Простота настроек с минимумом манипуляций

VLFT10GEN

1 штука



Тележка для генераторов Valleylab

- Система фиксации кабелей
- Выдвижной ящик для хранения
- Все колеса блокируемые

VLFTCRT

1 штука



Педаль лигирующая биполярная

Используется для биполярной эпикардальной РЧ абляции

- Кабель 4.6 м

LS0300

1 штука



Возвратный REM-электрод для взрослых


- Для пациентов с массой тела более 13.6 кг
- Используется с инструментами для монополярной эпикардальной РЧ абляции

E7507 или E7507-DB

50 шт. в кор.

Оборудование для торакоскопической изолирующей радиочастотной абляции при фибрилляции предсердий

Платформа энергетическая серии FT Valleylab FT10 и принадлежности

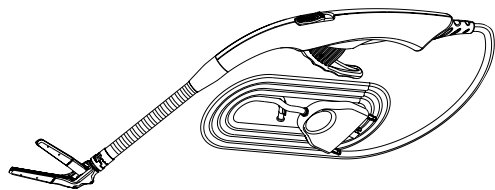


Устройство для хирургической абляции Cardioblade BP2

Используется с энергетической платформой Valleylab FT10

- Параллельные бранши длиной 7 см
- Покрытие пористым полимером гибкой 5 см части браншей
- Ротация браншей на 300 градусов
- Гибкий шток
- Система орошения физраствором

49321

1 штука

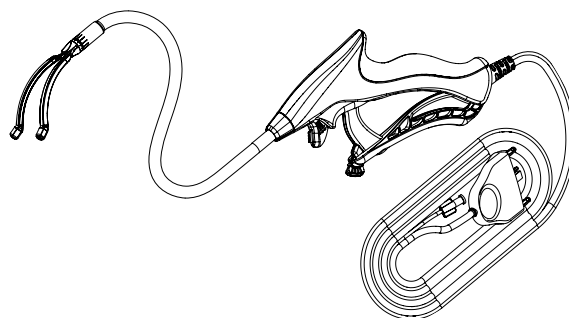


Устройство для хирургической абляции Cardioblade Gemini-S

Используется с энергетической платформой Valleylab FT10

- Жесткие тонкие бранши с направляющими длиной 6,3 см
- Покрытие электродов пористым полимером
- Ротация браншей на 300 градусов
- Гибкий шток
- Система орошения физраствором

49351

1 штука

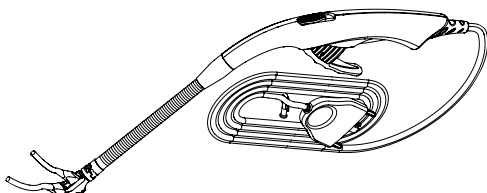


Устройство для хирургической абляции Cardioblade LP

Используется с энергетической платформой Valleylab FT10

- Жесткие тонкие параллельные бранши длиной 7 см
- Покрытие электродов пористым полимером
- Ротация браншей на 300 градусов
- Гибкий шток
- Система орошения физраствором

49341

1 штука

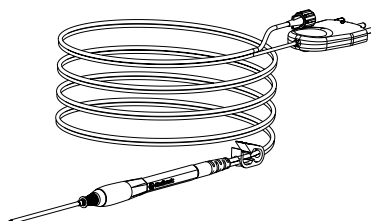

Электрод для монополярной хирургической абляции Cardioblade Ablation Pen

Используется с энергетической платформой Valleylab FT10


- Рукоятка с противоскользящими накладками
- Изгибаемый изолированный шток длиной 8 см
- Система орошения физраствором
- Используется с рассеивающим REM-электродом пациента

49313

1 штука

Оборудование для торакоскопической изолирующей радиочастотной абляции при фибрилляции предсердий

Платформа энергетическая серии FT Valleylab FT10 и принадлежности

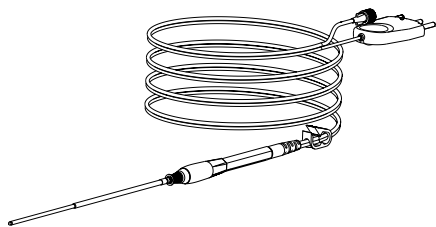

Электрод для монополярной хирургической абляции Cardioblate XL Ablation Pen

Используется с энергетической платформой Valleylab FT10

- Рукоятка с противоскользящими накладками
- Изгибаемый изолированный шток длиной 20 см
- Система орошения физраствором
- Используется с рассеивающим REM-электродом пациента

49314

1 штука

Указатели

Символы

00703	45
00746	37
00747	37
00748	37
00749	37
00763	48
00766	48
02467	37
03027	43
03078	43
03080	45
03129	44
04718	15
04770	45
04777	15
05689	34
05690	34
05691	34
06005	50
06523	13
06524	13
06578	48
07927	45
07929	50
07930	44
08952	46
09921	13
09922	13
49313	72
49314	73
49321	72
49341	72
49351	72

C

CA15L2	69
CA190RC1	69
CA20L2	69
CA30L2	69
CAGEN1	8, 69
CAPUMP1	69
CART1	15, 70
CBCA	24

E

E0017	46
E0020V	49

E0021S	49
E0022W	49
E0502-1	46
E0507-B	46
E0510	45
E0512	49
E0560	44
E0560E	44
E1000	37
E1002	37
E1003	37
E1005	37
E1020	37
E1450-4	30
E1450-6	30
E1450X	30
E1452	30
E1452-6	30
E1455	30
E1455-4	31
E1455-6	31
E1455B	31
E1455B-4	31
E1465	31
E1465-4	31
E1465B	31
E1465B-4	31
E1502	36
E1504	36
E1510	36
E1511	36
E1512	36
E1513	36
E1550	35
E1551-6	35
E1551X	35
E1552	35
E1552-6	35
E1559	33
E1560	33
E1561	33
E1562	33
E1563	33
E1564	33
E1565	34
E1567	34
E1650	32
E1651	32

E1652	32
E1653	32
E1654B	32
E2100	27
E2100E	27
E2401	37
E2505-10FR	28
E2515	27
E2516	27
E2608-6	28
E2750	40
E3305	28
E3310	28
E360150	50
E360150L	50
E3770-36	38
E3770-36C	39
E3771-36	38
E3771-36C	39
E3771-45	38
E3771-45C	39
E3772-36	38
E3772-36C	39
E3773-36	38
E3773-36C	39
E3773-45	38
E3773-45C	39
E3774-36	38
E3774-36C	39
E3774-45	38
E3774-45C	39
E3780-28	40
E3781-28	40
E3781R-28ASP	40
E3782-28	40
E3782R-28ASP	40
E3783-28	41
E3783R-36ASP	40
E3784-28	41
E3784R-28ASP	40
E3786-28	41
E3810	62
E3815	62
E4051-CT	47
E4052-CT	47
E4053-CT	47
E4054-CT	47
E4055-CT	47

Указатели

E4057-CT	47
E4058-CT	48
E4060-CT	48
E4062-CT	48
E4073-CT	48
E6008L	12
E6009	12
E6009L	12
E6019	12
E7507	42, 71
E7507-DB	42, 71
E7509	42
E7510-25	42
E7510-25DB	42
E7512	42

F

FT0021S	11, 49
FT0022W	11, 49
FT0510	45
FT3000	27
FT3000DB	27
FT6003	12
FT6009	11, 12
FTBRKIT	10
FTRCKIT	10

H

HRA5	43
------	----

L

LF0500	12
LF1212	21
LF1823	20
LF1837	20
LF1844	20
LF1923	20
LF1937	20
LF1944	20
LF2019	21
LF3225	22
LF3225C	22
LF4418	21
LF5637	19
LF5644	19
LS0300	12, 71

R

RFA1020	65
RFA1030	65

RFA1507	65
RFA1510	66
RFA1520	66
RFA1530	66
RFA15303	67
RFA15403	67
RFA2020	66
RFA2030	66
RFA2530	66
RFA25303	67
RFA25403	68
RFAC1025	67
RFAC1525	67
RFAC2025	67
RFAGEN	8, 65
RFAPAC	65
RFAPADB	68
RFASW	13, 68, 70
RTP20	68, 70
RTP20B	68, 70

S

SCBA	23
SCBIGA	23
SCDA13	23
SCDA26	23
SCDA39	23
SCDA48	23
SCGAA	24
SCSTA	24
SE3695	7, 61
SEA3725	62
SEA3745	13
SEA3700	61
SEA3705	61
SEA3710	62
SEA3715	62
SEA3720	62
SEA3730	61
SEA3741	61
SEA3745	61
STORZBRSET	10

U

UC8010	14
UC8011	15
UC8012	14
UC8013	14

V

VLFT10GEN	5, 71
VLFTCRT	14, 71
VLFX8GEN	6

W

WOLFBRSET	10
-----------	----

Указатели

Cardioblate	72
Cleancoat	39
Cool-Tip	8, 65
Emprint	8
Force Triverse	27
LEEP	34
LigaSure	19-22
LLETZ	33
OPTI ⁴	40
POINT	32
RapidVac	7, 61
Sonicision	23-24

А

Адаптер для REM-пластин пациента с кабелем	46
Адаптер для S-кабеля и REM-разветвитель	46
Адаптер монополярный	46
Антенна чрескожная Emprint	69
Аппарат для удаления хирургического дыма RapidVac	7, 61

В

Возвратные электроды пациента для радиочастотной абляции	68
Возвратный REM-электрод	42-43, 71

Г

Генератор для микроволновой (СВЧ) абляции Emprint	8, 69
Генератор системы радиочастотной абляции Cool-Tip серии E	8, 65

Д

Держатель электрода с функцией аспирации и ручной активацией	28
Держатель электродов	27-28, 40
Диссектор LigaSure точный	21
Диссектор Sonicision	23
Дистанционный температурный зонд	68, 70
Дымоотвод, фиксируемый на электрохирургической ручке	62

З

Зажим LigaSure	22
Зарядное устройство для аккумуляторов Sonicision	24

И

Инструмент LigaSure с изогнутыми браншами	21
Инструмент LigaSure с нанопокрытием	20-21

К

Кабель биполярный	49-50
Кабель для биполярной резекции	11, 49
Кабель многоцветный системы Emprint	69
Кабель соединительный для пластин пациента	44
Кабель соединительный монополярный	45
Комплект крепления баллонов к универсальной подставке-держателю	14
Комплект крепления кабелей к универсальной подставке-держателю	15

Л

Лапароскопический инструмент Ligasure	19
---------------------------------------	----

М

Многоцветная аккумуляторная батарея Sonicision	23
Многоцветный генератор Sonicision	24

Н

Наконечник дымоотвода	62
Набор активации биполярной резекции	10
Набор активации дистанционного управления	10
Набор инструментов Cool-Tip для радиочастотной абляции	65-68
Направляющая для установки аккумулятора	23
Насос для системы микроволновой абляции Emprint	69
Ножной переключатель	13, 68, 70

О

Очиститель электродов	37
-----------------------	----

П

Педаль биполярная	12, 13
Педаль для биполярной резекции	11, 12
Педаль для плазменного коагулятора	13
Педаль к аппарату для удаления дыма	13, 61
Педаль лигирующая биполярная	12, 71
Педаль монополярная	12
Педаль управления монополярными режимами	13
Передвижная стойка (тележка) для абляции	15, 70

Указатели

Пинцет биполярный	47-48	Электрод с Edge-покрытием	30-31
Пластина пациента	42-43	Электрод-игла POINT микрохирургический вольфрамовый	32
Пластина пациента из нержавеющей стали многоразовая	43	Электрохирургическая ручка	27
Платформа энергетическая Valleylab	5, 6, 71	Электрохирургическое устройство Force Triverse	27
Подставка-держатель для генераторов универсальная	14	Я	
Полка верхняя к универсальной подставке-держателю	14	Ящик выдвижной к универсальной подставке-держателю	14
Полка подвесная к универсальной подставке-держателю	14		
Принадлежности к генератору системы радиочастотной абляции Cool-Tip серии E	65		
С			
Сенсор обратной связи для дымоэвакуатора	61		
Соединительный кабель для дымоэвакуатора	61		
Стартовый пакет для резектоскопов	10		
Стерилизационный лоток Sonicision	24		
Т			
Тележка для генераторов Valleylab	14, 71		
Транспортный модуль	15		
Трубка дымоотводная	61-62		
У			
Удлинитель электрода	36		
Удлинитель электрода лапароскопический	36		
Устройство (держатель электродов) лапароскопическое OPTI4	40		
Устройство для хирургической абляции Cardioblade	72-73		
Ф			
Фильтр для дымоэвакуатора	61		
Э			
Электрод LEEP гинекологический	34		
Электрод LigaSure к многоразовому зажиму	22		
Электрод LLETZ гинекологический	33-34		
Электрод артроскопический	36		
Электрод из нержавеющей стали	35-36		
Электрод лапароскопический	38-39		
Электрод лапароскопический OPTI4	40-41		
Электрод лапароскопический с покрытием Cleancoat	39		
Электрод монополярный многоразовый	37		

Вся информация данного каталога предназначена для медицинских специалистов.

ВАЖНО: Полная инструкция с предупреждениями и противопоказаниями находятся внутри упаковки.

© 2025 Medtronic. Все права защищены. Medtronic, логотип Medtronic являются торговыми марками компании Medtronic. Бренды, обозначенные * являются торговыми марками сторонних производителей. Все остальные бренды являются собственностью компании Medtronic.

Medtronic

ООО "Медтроник"

123112, г. Москва,
Пресненская наб., д.10,
эт. 9, пом. III, ком. 41
Тел.: +7 (495) 580-73-77
Факс: +7 (495) 580-73-78
E-mail: info.russia@medtronic.ru
www.medtronic.ru

#18007275-ru-emea